

# SILVERFIXÒ

Corsetti lombari  
e dorso-lombari con filo  
d'argento

Dall'argento,  
tanti vantaggi per  
un sostegno unico.

**BENESSERE.**  
TESSUTO ELASTICO CON TRAMATURA  
IN FILO D'ARGENTO.

**SOSTEGNO.**  
STECHE AUTOMODELLANTI E  
NUOVO SISTEMA DI TENSIONAMENTO  
DEGLI SPALLACCI.

**COMFORT.**  
TESSUTO ALTAMENTE ELASTICIZZATO  
E CONFORMAZIONE ANATOMICA.



# SILVERFIXÒ

## IL SOSTEGNO SI ARRICCHISCE DI VANTAGGI CON SOLUZIONI DALL'ANIMA D'ARGENTO.

FGP ha allargato gli orizzonti del benessere con una linea innovativa dedicata al sostegno dorso-lombare. **BackSilver**, **DorsoSilver**, **LomboSilver** e i nuovi **RelaxSilver** e **DynamicSilver** sono un sostegno evoluto perché arricchito da soluzioni tecniche e scelte di materiali che donano comfort, vestibilità, libertà di vivere i gesti quotidiani e il movimento a tutti i livelli. E l'impiego dell'argento all'interno del tessuto è un'attenzione in più per performance del corsetto ancora più elevate.

### TRAMATURA D'ARGENTO: INDIETRO NEL TEMPO PER ESSERE UN PASSO AVANTI.

Oggi l'innovazione parte dalla storia, e prende origine da uno dei metalli più usati nei secoli per i tanti vantaggi. Da sempre, l'argento è conosciuto, apprezzato, utilizzato per le sue proprietà ed FGP ne fa tesoro facendone l'anima interna della linea SilverFixò.

Una tramatura che valorizza le performance delle soluzioni e la professionalità di chi le propone.

Ecco perché la nostra ricerca ha scelto l'argento:

#### — ANTIMICROBICO:

combatte i cattivi odori sfavorendo lo sviluppo di microbi sul dispositivo.

#### — ANTISTATICO:

in grado di assorbire ed eliminare le cariche elettriche accumulate.

#### — TERMOREGOLANTE:

disperde il calore in eccesso.


#### — PERMANENTE:

proprietà che durano nel tempo.

#### — SCHERMANTE:

assorbe l'energia statica, l'elettrosmog e i raggi UV.

Non utilizzare i dispositivi a diretto contatto con la pelle.

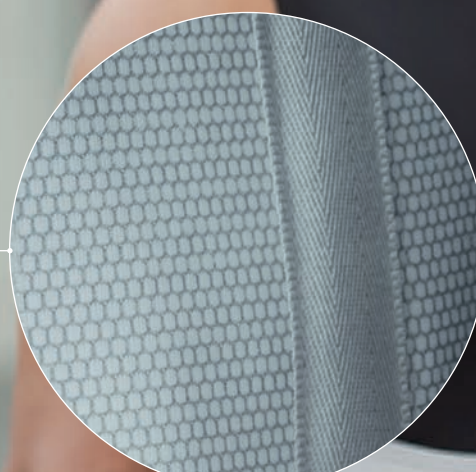

### TESSUTO SENSITIVE FABRICS®:

L'INNOVAZIONE  
CHE AVVOLGE E CHE  
SI TOCCA CON MANO.

Un abbraccio discreto grazie al suo spessore ridotto, avvolgente grazie alla grande elasticità, traspirante grazie alla particolare tramatura che permette la circolazione dell'aria tra le fibre.

Il tessuto Sensitive® permette una perfetta vestibilità, una maggiore performance nella distribuzione delle forze.

Una soluzione per un comfort più evoluto che sposta i confini del benessere.





**FGP: DALLA NOSTRA RICERCA,  
UN BENESSERE RITROVATO.**

Ascoltare le esigenze dei pazienti, dialogare costantemente con i professionisti medici e tecnici ortopedici: le risposte FGP nascono da qui, e da un impegno quotidiano nell'evolvere soluzioni per migliorare la vita di tutti.

Da sempre FGP seleziona i materiali più all'avanguardia, studia e realizza prodotti, dispositivi, progetti più performanti dedicati al benessere in ogni sua forma. Un'innovazione frutto di ricerca interna, tutta italiana, portata avanti per essere sempre un passo più avanti.



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

## DOPPIA PATELLA MODULARE

Le patelle di **RelaxSilver** permettono diverse opzioni di chiusura, a seconda della situazione e delle esigenze di chi lo indossa:

### 1. CHIUSURA ORIZZONTALE

Se unite orizzontalmente, le due coppie di fasce formano una chiusura alta 22 cm.



### 2. CHIUSURA INFERIORE

Se la coppia di fasce superiore viene lasciata aperta, il corsetto resta posizionato offrendo sostegno anche per chi resta in posizione seduta per un tempo prolungato.



### 3. CHIUSURA OBLIQUA

Se la coppia di fasce superiore viene chiusa verso il basso, l'altezza frontale si riduce a 15 cm. Ideale per chi soffre di reflusso gastrico e problemi digestivi.



### 4. CHIUSURA SOVRAPPOSTA

Se la coppia di fasce superiore viene sormontata a quella inferiore, l'altezza della patella si abbassa fino a 13 cm.



ALTEZZA POSTERIORE 38 cm



**RELAXSILVER**

**MASSIMA EFFICACIA**

I due tiranti ad elevata elasticità consentono a **RelaxSilver** una elevata distrazione per una sensibile riduzione del dolore.



# SILVERFIXÒ

## LA GAMMA SI ARRICCHISCE DI PERFORMANCE, CON DUE NUOVI E INNOVATIVI CORSETTI.

C'è chi ricerca la grande comodità, c'è chi ricerca la piena libertà. E da oggi ci sono **RelaxSilver** e **DynamicSilver**: le nuove soluzioni firmate FGP per chi desidera la piena vestibilità e per chi vive il movimento come esperienza quotidiana.

I nuovi dispositivi si aggiungono a **BackSilver**, **DorsoSilver**, **LomboSilver** e completano così l'innovativa gamma di corsetti per vivere al meglio il sostegno quotidiano.

### DYNAMICSILVER

#### — MASSIMA VESTIBILITÀ

La patella anteriore ridotta e il tirante ad elevata elasticità rendono **DynamicSilver** facile da portare e un aiuto prezioso per ridurre il dolore.

#### — ALTEZZA RIDOTTA

Altezza posteriore 27 cm per fare di **DynamicSilver** un sostegno dall'elevato comfort nello sport e per vivere il movimento di tutti i giorni.



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# SILVERFIXÒ

## LA PERFORMANCE SI ARRICCHISCE DI EFFICACIA CON SCELTE TECNICHE E TECNOLOGICHE RINNOVATE.

La ricerca FGP ha tante forme e tanti modi di esprimersi. **Double X** è l'innovativo sistema made in FGP, pensato per la linea dorsolombare, in grado di migliorare comfort e stabilità. È ideato e realizzato in tre step tra di loro consequenziali: le fasce elasticizzate garantiscono vestibilità e libertà di movimento, le spalline imbottite e sagomate offrono stabilità, i tiranti permettono una facile trasmissione delle forze per un riallineamento corretto della colonna.


### NUOVE GUIDE

Due guide dedicate mantengono i tiranti posizionati sempre correttamente facilitando così l'operazione di indosso.



### SOSTEGNO E VESTIBILITÀ

In **DorsoSilver** la conformazione dei due elementi uniti tra di loro ma che lavorano separatamente garantisce solidità e sostegno nella parte dorsale, elasticità e vestibilità nella parte lombare.

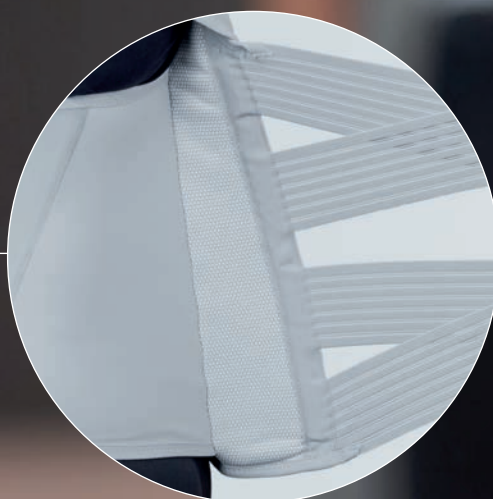



## NUOVO SISTEMA DI TIRANTI

**Double X** è il nuovo sistema di tensionamento degli spillacci facile da utilizzare, che sfrutta il principio di azione-reazione attraverso un movimento di tensionamento.

Una soluzione con incrocio posteriore che dona stabilità e comfort al nuovo corsetto **DorsoSilver** e **BackSilver**.



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

# RELAXSILVER

## CORSETTO LOMBARE CON DOPPIA PATELLA ANTERIORE



### STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

### TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

### STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

### CHIUSURA ANTERIORE

- doppia patella di chiusura a strappo in grado di modulare l'altezza anteriore del corsetto
- materiale antiarricciamento

### INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

### MISURE

#### Taglie    Ø Vita

XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

**Altezza** 38 cm

**Codice d'ordine:** LSIL-200





# DYNAMICSILVER

## CORSETTO LOMBARE



### STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

### TIRANTI

- 3 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

### STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccimento

### INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

### MISURE

#### Taglie    Ø Vita

XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: LSIL-050



# LOMBOSILVER

## CORSETTO LOMBARE



### STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

### TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

### STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

### MISURE

#### Taglie Ø Vita

XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 33 cm



Codice d'ordine: LSIL-100

### INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

# DORSOSILVER

## CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI



### STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggiore comfort

### TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- sistema Double X con incrocio posteriore e spallacci imbottiti sagomati per un migliore comfort

### STECCATURA

- 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

### MISURE

#### Taglie Ø Vita

XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 54 cm



Codice d'ordine: DSIL-100

### INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

# BACKSILVER

## CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI E ASTA DI SOSTEGNO



### STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggiore comfort
- patella anteriore di dimensioni ridotte
- sacca porta asta dotata di imbottitura di protezione

### TIRANTI

- due tiranti elastici che si agganciano anteriormente in un unico tirante
- sistema di spallacci Double X con doppio incrocio posteriore e spallacci sagomati per un migliore comfort

### STECCATURA

- 2 stecche in acciaio armonico removibili
- 1 asta sagomata in alluminio modellabile ed estraibile

### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

### INDICAZIONI

- dorsalgie e lumbalgie (acute e croniche)
- dorsalgie e lumbalgie di tipo meccanico
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- supporto nella gestione di localizzazioni metastatiche vertebrali dorso-lombari
- post operatorio interventi discectomia
- coadiuvante nel postoperatorio di interventi correttivi per scoliosi
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- spondilidiscoartrosi dorso-lombare
- tratto colonna interessato: D4-S1



### MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 54 cm

Codice d'ordine: DBSIL-100



## UN SUPPORTO MODULABILE CON UN PUNTO FISSO: UN BENESSERE AL TOP.

Passo dopo passo, BackSilver accompagna il paziente nel percorso riabilitativo. La stecca centrale sagomata in lega di alluminio e quelle in acciaio armonico sono collocate in apposite tasche e facilmente estraibili per adattare la spinta alle necessità terapeutiche del paziente.



Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
E [fgp@fgpsrl.it](mailto:fgp@fgpsrl.it)  
[www.fgpsrl.it](http://www.fgpsrl.it)



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 1 - 09/18

[clab.comunicazione.it](http://clab.comunicazione.it)



Scarica l'App  
**FGPOrteSystem®**

