

LINEA FIXÒ® FIT

Corsetti semirigidi lombari e dorso-lombari.

COMFORT
E SOSTEGNO
SENZA COMPROMESSI



I corsetti **LOMBOFIXÒ® FIT**, **LOMBOFIXÒ® 33 FIT** e **DORSOFIXÒ® FIT** si rinnovano con una progettazione anatomica che unisce **funzione terapeutica** e **comfort superiore**. Dalla nuova sagomatura fasciante alla patella anteriore riprogettata, ogni elemento è stato ottimizzato per fornire **vestibilità ideale ed evitare pressioni indesiderate**.

Le quattro stecche automodellanti, le fasce elastiche e **la base in cotone al 97%** offrono stabilizzazione del tratto lombare e dorso-lombare favorendo **comfort, traspirabilità e supporto** durante tutto il percorso riabilitativo.

LOMBOFIXÒ® FIT — LOMBOFIXÒ® 33 FIT




Patella anteriore riprogettata con profilo diagonale ottimizzato per una vestibilità superiore. I materiali utilizzati prevengono l'arricciamento.

Sagomatura inferiore riprogettata anatomicamente per un comfort superiore: il nuovo profilo ergonomico elimina le interferenze durante la seduta, offrendo libertà di movimento.

Conformazione sottoseno ottimizzata per evitare pressioni indesiderate e fornire maggiore comfort.

Effetto avvolgente sottogluteo che aumenta la stabilità durante tutti i momenti di utilizzo.

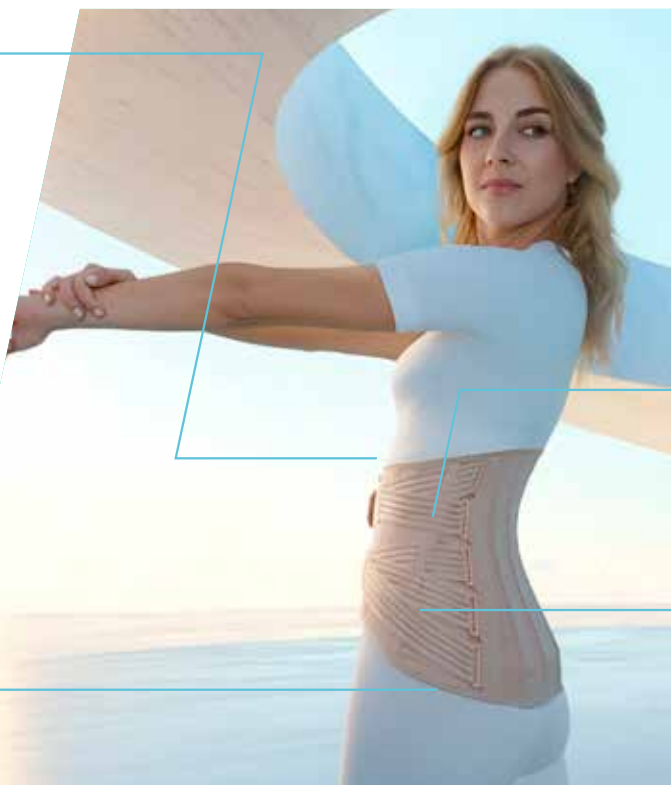

DORSOFIXÒ® FIT

Spallacci sagomati ed imbottiti per un comfort maggiore.

Attenzione al design della **parte alta**, riprogettata per una vestibilità superiore.

Quattro stecche posteriori in acciaio automodellante.
La struttura del portastecche è progettata per consentire l'estrazione delle due stecche centrali oppure il loro rinforzo utilizzando le stecche aggiuntive fornite in dotazione.

Sistema modulare di **regolazione della spinta** per adattare il tutore alle varie necessità del paziente.

Dotato di fermatiranti che offrono al paziente la semplificazione delle operazioni di indosso.

Tiranti realizzati in materiale ad alta elasticità per fornire un richiamo funzionale e una distrazione vertebrale ottimale.

FILOSOFIA PROGETTUALE CONDIVISA

I corsetti **LOMBOFIXÒ® FIT** e **DORSOFIXÒ® FIT** condividono i plus descritti in queste pagine per offrire una qualità superiore e prestazioni per tutto il tratto lombare.

LOMBOFIXÒ® FIT

LOMBOFIXÒ® 33 FIT

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto lombare della colonna. Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D12 - S1 della colonna, come ad esempio:

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

LOMBOFIXÒ® FIT

ALTEZZA

LFU-600N (uomo) 36 cm; LFD-610N (donna) 38 cm

CODICE D'ORDINE

LFU-600N (uomo); LFD-610N (donna)

LOMBOFIXÒ® 33 FIT

ALTEZZA

LFU-500N (uomo) 33 cm; LFD-510N (donna) 33 cm

CODICE D'ORDINE

LFU-500N (uomo); LFD-510N (donna)



MD

DORSOFIXÒ® FIT

INDICAZIONI

Tutore destinato alla stabilizzazione e sostegno attraverso la ridistribuzione della pressione del tratto dorso-lombare della colonna. Utile nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tratto D4 - S1 della colonna, come ad esempio:

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci sagomati e imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione della spinta che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm
XXXL	136-146 cm	

ALTEZZA

55 cm

CODICE D'ORDINE

DFU-700N (uomo); DFD-710N (donna)



MD



Inquadra il QR Code
e scopri tutti i prodotti.

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

f i n
fgpsrl.it



FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FFOLDFIXOFIT
Rev 00 - 09/25