

LINEA CORSETTI LUMBAMED®

medi


Funzionalità avanzate e comfort evoluto
per una linea completamente rinnovata.




FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LUMBAMED®

LE 4 DIMENSIONI DEL COMFORT

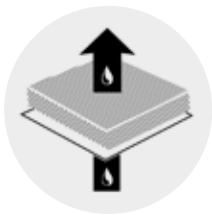

Materiali confortevoli

I materiali traspiranti favoriscono una termoregolazione ottimale, senza rinunciare a comfort e stabilità.




Tramatura differenziata

Ogni tutore è realizzato con due diverse tramature: una più spessa, per migliorare la stabilità lombare, e una più sottile, per facilitare il posizionamento ed evitare pressioni indesiderate.



Clima comfort

Il sistema Clima Comfort favorisce la traspirabilità e contribuisce a mantenere la pelle più asciutta, anche durante un utilizzo prolungato.

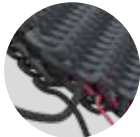

Composizione tessile ottimizzata

La combinazione di fibre high-tech e fibre naturali, come l'eucalipto, rende il tessuto particolarmente delicato sulla pelle. La nuova generazione integra anche SEAQUAL® YARN, un innovativo filato ottenuto da plastica riciclata.

Cos'è il SEAQUAL® YARN?
Filato certificato Global Recycled Standard, realizzato con PET riciclato da bottiglie: 10% plastica recuperata in mare, 90% da fonti terrestri.



Vestibilità ottimale

Il tutore si adatta in modo flessibile ai movimenti del corpo. Nei modelli modulari, la possibilità di rimuovere alcuni elementi consente di accompagnare il paziente nelle diverse fasi del percorso di recupero.



Sagomatura ottimizzata

Il nuovo profilo ergonomico della parte inferiore riduce le interferenze durante la seduta e aiuta a prevenire irritazioni o pressioni indesiderate.



Patella pieghevole

Il bordo superiore e inferiore ottimizzato della patella addominale migliora l'adattabilità del tutore e rende più confortevole la posizione seduta.



Design modulare

Alcuni modelli permettono una maggiore personalizzazione: specifici elementi possono essere rimossi o regolati per seguire l'evoluzione della terapia.

AMMED

Una nuova generazione di tutori lombari pensata per offrire **comfort, vestibilità, semplicità d'uso ed efficacia terapeutica** lungo tutto il percorso di trattamento.



Facilità d'uso

Grazie alla sua maneggevolezza, il tutore può essere indossato e rimosso facilmente dal paziente.



Maniglie di posizionamento

Le maniglie sono presenti su entrambe le patelle e facilitano la chiusura e l'apertura del tutore.




Apertura rapida

La parte centrale della patella addominale è dotata di una linguetta che agevola l'apertura del tutore.



Nuovo sistema di chiusura a strappo

Il nuovo sistema di velcri semplifica la chiusura e migliora la gestione quotidiana del tutore.

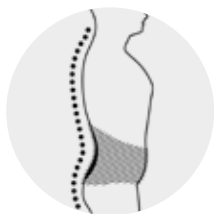

Efficacia terapeutica

Gli elementi funzionali offrono alla schiena un supporto mirato, in linea con gli obiettivi terapeutici dei diversi modelli.



Tessuto compressivo a maglia

La compressione migliora la propriocezione e supporta la stabilizzazione propria del corpo.



Stecche anatomiche in acciaio

Le stecche contribuiscono a stabilizzare e sostenere il tratto lombare.



Pelote massaggianti

La pelota VARIO-FLEX crea un effetto massaggiante in corrispondenza dei muscoli paravertebrali e aiuta ad alleviare il dolore.

LUMBAMED® BASIC

Corsetto lombare con stecche di stabilizzazione.



Indicazioni

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare, ad es.:

- lombalgia
- insufficienza muscolare
- dolori nel tratto lombosacrale

Struttura

- Materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido grazie alla combinazione di fibre high-tech e fibre naturali, come l'eucalipto, con l'aggiunta dell'innovativo filato SEAQUAL® YARN.
- Tessuto Medi con sistema Clima Comfort.

Tiranti

Nessuno.

Steccatura

4 stecche anatomicamente preformate e posizionate a ventaglio per migliorare il comfort. Non removibili.

Chiusura anteriore

- Chiusura a strappo con maniglie su entrambe le patelle, per facilitare apertura e chiusura.
- Bordo superiore e inferiore della patella pieghevole, per una migliore adattabilità.



Le stecche in acciaio integrate stabilizzano la zona lombare, favorendo il sollievo dal dolore attraverso la correzione della postura.

LUMBAMED® PLUS

Tutore lombare con pelota massaggiante.



Indicazioni

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare attraverso una redistribuzione della pressione tramite un cuscinetto dorsale, ad es.:

- lombalgie
- squilibri delle capacità motorie-muscolari nella regione lombare

Struttura

- Materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido grazie alla combinazione di fibre high-tech e fibre naturali, come l'eucalipto, con l'aggiunta dell'innovativo filato SEAQUAL® YARN.
- Tessuto Medi con sistema Klima Comfort.
- Pelota posteriore VARIO-FLEX in silicone, con superficie massaggiante 3D e copertura in morbido tessuto traspirante. Riposizionabile e removibile.

Tiranti

Nessuno.

Steccatura

Nessuna.

Chiusura anteriore

- Chiusura a strappo con maniglie su entrambe le patelle, per facilitare apertura e chiusura.
- Bordo superiore e inferiore della patella pieghevole, per una migliore adattabilità.

Tutori come Lumbamed® plus possono supportare l'intero sistema muscolo-scheletrico. Studi clinici dimostrano che l'utilizzo regolare di Lumbamed® plus contribuisce a migliorare la forza muscolare del core (1).

(1) Thomas R. et al. The effect of lumbar orthoses on pain relief, muscle strength and posture. Orthopaedic Technology 2013;12:64-69



La pelota posteriore Vario-Flex, grazie al suo aggancio a strappo, permette un posizionamento personalizzato per un massaggio mirato nei punti dolenti.




LUMBAMED® DISC

Corsetto con sistema a ponte con funzione di mobilizzazione progressiva.




Fase acuta

Ortesi completa con sistema a ponte incluso.

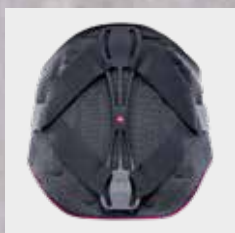

Fase cronica

Ortesi con stecche preformate di sostegno.

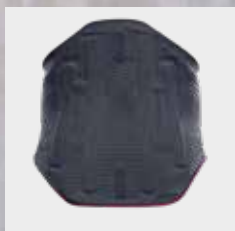

Indicazioni

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessario uno scarico parziale tramite delordizzazione e successiva mobilizzazione funzionale della colonna lombare, ad es.:

- protrusione discale, ernia del disco (trattamento conservativo, postoperatorio)
- sindrome dolorosa pseudoradicolare
- squilibri muscolari nella regione lombare
- lombalgia moderata
- lombosciatalgia moderata

Struttura

- Materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido grazie alla combinazione di fibre high-tech e fibre naturali, come l'eucalipto, con l'aggiunta dell'innovativo filato SEAQUAL® YARN.
- Tessuto Medi con sistema Clima Comfort.
- Design modulare.

Tiranti

- 2 fasce elastiche agganciate al sistema a ponte creano un effetto a 3 punti, consentendo una regolazione personalizzata sul paziente. Le fasce si fissano anteriormente in un unico tirante.

Steccatura

- 4 stecche anatomicamente preformate e posizionate a ventaglio per migliorare il comfort. Non removibili.
- Sistema a ponte utile ad aumentare l'effetto di distrazione vertebrale, removibile e orientabile a 180° in caso di curva lordotica pronunciata.

Chiusura anteriore

- Chiusura a strappo con maniglie su entrambe le patelle, per facilitare apertura e chiusura.
- Bordo superiore e inferiore della patella pieghevole, per una migliore adattabilità.

Note

Il tutore è dotato di sistema modulare per incentivare la mobilizzazione progressiva del paziente.



La combinazione tra le stecche in acciaio e il sistema a ponte è in grado di creare un effetto a 3 punti, fondamentale per la stabilizzazione del tratto lombare.

LUMBAMED® SACRO

Corsetto per l'articolazione sacro-iliaca.



Indicazioni

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione del bacino, ad es.:

- sindrome dell'articolazione ileosacrale
- instabilità dell'articolazione ileosacrale
- mialgie e tendinopatie nella regione del bacino
- instabilità del bacino
- in caso di microinstabilità recidivanti (m. rectus abdominis, m. piriformis)

Struttura

- Materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido grazie alla combinazione di fibre high-tech e fibre naturali, come l'eucalipto, con l'aggiunta dell'innovativo filato SEAQUAL® YARN.
- Tessuto Medi con sistema Clima Comfort.
- Design modulabile.
- 2 cuscinetti massaggianti posteriori, riposizionabili e removibili.

Tiranti

- 2 fasce anelastiche utili a stabilizzare l'area pelvica e l'articolazione sacroiliaca.

Steccatura

Nessuna.

Chiusura anteriore

- Chiusura a strappo con maniglie su entrambe le patelle, per facilitare apertura e chiusura.
- Bordo superiore e inferiore della patella pieghevole, per una migliore adattabilità.

Note

Il tutore è dotato di sistema modulare per incentivare la mobilitazione progressiva del paziente.

Fase acuta

Ortesi completa con cintura pelvica.



Fase cronica

Solo cintura pelvica.



Le pelote possono essere usate in entrambe le fasi



La cintura pelvica in materiale anelastico favorisce la stabilizzazione del bacino e dell'articolazione sacroiliaca. Inoltre, le pelote, riposizionabili, permettono una pressione sui punti dolenti per ridurre il dolore.

Taglie

I miglioramenti modellistici apportati alla linea hanno permesso di sviluppare i prodotti in versione unisex. Inoltre, grazie all'introduzione delle taglie 6 e 7, è possibile coprire circonferenze addominali fino a 170 cm.

Misure

Modelli:

LUMBAMED® BASIC


LUMBAMED® PLUS

LUMBAMED® DISC


Taglie	Ø Bacino donna	Ø Vita uomo
1°	76 – 86 cm	66 – 76 cm
2°	86 – 98 cm	76 – 88 cm
3°	98 – 111 cm	88 – 101 cm
4°	111 – 125 cm	101 – 115 cm
5°	125 – 140 cm	115 – 130 cm
6°	140 – 155 cm	130 – 150 cm
7°	155 – 170 cm	150 – 170 cm

MD

Donna

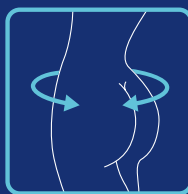

Uomo

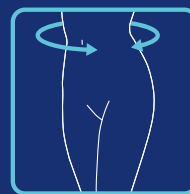


Modello:

LUMBAMED® SACRO

Taglie	Ø Bacino
1°	76 – 86 cm
2°	86 – 98 cm
3°	98 – 111 cm
4°	111 – 125 cm
5°	125 – 140 cm
6°	140 – 155 cm
7°	155 – 170 cm

MD

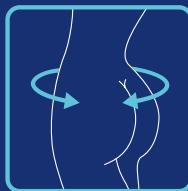

Lumbamed® sacro è un tutore pelvico, quindi la misurazione della circonferenza dei fianchi è sempre quella corretta.

Codici d'ordine

Lumbamed® Basic: M664

Lumbamed® Plus: M669

Lumbamed® Disc: M667

Lumbamed® Sacro: M680



Inquadra il QR Code
e scopri tutti i prodotti.



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



fgpsrl.it



FGP
Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl Via Alessandro Volta 3, I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867 F +39 0458600835 E fgp@fgpsrl.it