



**FGP**

Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**NUOVA**

LINEA MEDI E+MOTION®

**PUSH YOUR  
PERFORMANCE**

**medi**

# E+MOTION: IL SUPPORTO FUNZIONALE CHE TI AIUTA A RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI.

NATA PER LO SPORT AGONISTICO, LA LINEA MEDI E+MOTION®, IN ESCLUSIVA DA FGP, SI ISPIRA ALLA RICERCA DELLA MASSIMA PERFORMANCE, REALIZZANDO UNA NUOVA CATEGORIA DI **TUTORI D'ALTO PROFILO E DALL'EFFICACIA TESTATA\***.



I cinque prodotti, destinati ai distretti anatomici più frequentemente interessati da patologie e sindromi dolorose (ginocchio, gomito, polso, caviglia e distretto lombare), **sono oggi totalmente rinnovati, nel design e nelle caratteristiche.**

Come nella pratica sportiva, ogni aspetto è finalizzato a prestazioni d'eccellenza. La perfetta combinazione tra stabilità ed elasticità garantisce un supporto sicuro, senza limitare la libertà di movimento, favorita da **zone di flessione maggiorate.** L'utilizzo della lana merino offre un materiale naturalmente hi-tech che garantisce traspirabilità e termoregolazione.

**E+MOTION®, PERÒ, NON È PENSATA SOLO PER LO SPORT, MA PUÒ ESSERE INDOSSATA DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, NEL TEMPO LIBERO E IN TUTTE LE OCCASIONI CHE RICHIEDONO UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA SUPPORTO E MOVIMENTO.**

*\*Dalla Federazione Tedesca di Sci (DSV) al Bavarian Olympic Training Centre: i migliori atleti hanno messo alla prova i prodotti E+motion®.*



# TRE CARATTERISTICHE CHE SI SOMMANO PER MOLTIPLICARE LA PERFORMANCE.

## MATERIALI

CON LANA MERINO E  
TECNOLOGIA DRY SKIN.

### MERINO

Naturalmente resistente agli odori è la fibra termoregolatrice per eccellenza. Grazie alla finitura interna, non è soggetta all'effetto pilling nemmeno dopo ripetuti lavaggi.

### MULESING-FREE

La lana utilizzata proviene da allevamenti che non applicano trattamenti dolorosi, nel rispetto del benessere animale e dell'ambiente.

### TECNOLOGIA DRY SKIN

Grazie a una elevata capacità di assorbimento, il passaggio dell'umidità dalla pelle all'esterno è due volte più rapido rispetto alla precedente versione della linea Emotion®.



## VESTIBILITÀ

TRAMATURA SPORTIVA  
ERGONOMICA, PER UNA  
SENSAZIONE PIACEVOLE  
IN OGNI MOVIMENTO.

### SAGOMATURA ERGONOMICA

Per una vestibilità corretta e praticamente senza pieghe

### ZONE DI FLESSIONE EXTRA LARGE

Massima elasticità nelle aree di flessione, per assicurare maggiore libertà di movimento dove necessario.



## COMPRESSIONE

STABILITÀ DIMENSIONALE,  
EFFETTO MASSAGGIO E RESISTENZA.

### MAGGIORE STABILITÀ E RESISTENZA

Filati dall'elevata capacità di recupero elastico (tendenza naturale a tornare alla loro forma originale). Risultato: una tramatura molto compatta, un tessuto più stretto di oltre il 25% e più sottile del 10% rispetto ad altre maglie\*.

### 3D SILICONE QUARZO PAD

Durante il movimento l'effetto massaggiante esercitato dagli inserti in silicone-quarzo con rilievi 3D, favorisce il circolo venoso e può aiutare a ridurre il gonfiore e il dolore.

*\*comparazione con altri prodotti medi*

# MANUMED ACTIVE® E+MOTION®

COD. D'ORDINE: M.844E DX - M.844 ESX

## POLSIERA IN TESSUTO ELASTICO EMOTION



### INDICAZIONI

Tutte le situazioni in cui è necessario un sostegno del polso con un rinforzo o un cuscinetto, ad esempio:

- lesioni al polso (es. slogature o distorsioni)
- artrosi del polso
- tenosinovite
- sensazione di instabilità articolare
- condizioni irritative (post trauma, post operatorio, reumatiche)

MD

### STRUTTURA

- tessuto in materiale latex-free con fibre merinos, odor control, termoregolatore
- tecnologia Dry Skin per una maggiore gestione della traspirabilità
- bordi morbidi e confortevoli, senza cuciture
- comfort zone maggiorata nella zona del pollice per una maggiore libertà di movimento
- nuova tramatura per un miglior effetto compressivo

### STECCATURA

- palmare ergonomico in plastica

### CHIUSURA

- nessuna
- fascia di stabilizzazione sul polso con foro di scarico per lo stiloide ulnare, con chiusura a strappo

### MISURE (dx/sx)

Taglie	Ø Polso
1°	13-15 cm
2°	15-17 cm
3°	17-19 cm
4°	19-21 cm



Le taglie 1° e 2° sono utilizzabili anche da bambini

# EPICOMED® E+MOTION®

COD. D'ORDINE: M.822E

## GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO EMOTION CON PRESSORE IN SILICONE



### INDICAZIONI

Tutte le situazioni in cui è necessaria la compressione dei tessuti molli attraverso cuscinetti al gomito, ad esempio:

- epicondilita (es. gomito del tennista o del golfista)
- artrosi
- artriti

MD

### STRUTTURA

- tessuto in materiale latex-free con fibre merinos, odor control, termoregolatore
- tecnologia Dry Skin per una maggiore gestione della traspirabilità
- comfort zone maggiorata nella zona della fossa cubitale
- bordo superiore morbido e confortevole, dotato di anti-slip system per una maggiore stabilità e tramatura a costa per una maggiore adattabilità
- nuova tramatura per un miglior effetto compressivo
- senza cuciture

### PRESSORE

- in silicone con fibre di quarzo 3D con scarico trocleare e superficie massaggiante utile per la riduzione del gonfiore
- dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile con scala indicativa della tensione da esercitare

### MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio
2°	20-23 cm
3°	23-26 cm
4°	26-29 cm
5°	29-32 cm
6°	32-35 cm



La taglia 2° è utilizzabile anche da bambini

# LUMBAMED® PLUS E+MOTION®

COD. D'ORDINE: M.670E

## CORSETTO LOMBARE CON PELOTA MASSAGGIANTE EMOTION



### INDICAZIONI

Tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare attraverso una ridistribuzione della pressione tramite un cuscinetto dorsale, ad esempio:

- lombalgie
- squilibri delle capacità motorie-muscolari nella regione lombare

MD

### STRUTTURA

- tessuto in materiale latex-free, traspirante ed elastico con fibre merinos, odor control, termoregolatore
- tecnologia Dry Skin per una maggiore gestione della traspirabilità
- pelota posteriore di silicone integrato con fibre di quarzo 3D per un'azione massaggiante, removibile
- maggiore sgambatura per una migliore forma ergonomica
- nuova tramatura per un miglior effetto compressivo
- senza cuciture

### TIRANTI

- nessuno

### STECCATURA

- 2 stecche a spirale posteriori

### CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico dotato di doppio elemento grippante

### MISURE

Taglie	Ø Bacino donna	Ø Vita uomo
1°	76-86 cm	66-76 cm
2°	86-98 cm	76-88 cm
3°	98-111 cm	88-101 cm
4°	111-125 cm	101-115 cm
5°	125-140 cm	115-130 cm

Altezza  
24 cm



Donna



Uomo

**GENUMEDI®  
E+MOTION®**

COD. D'ORDINE: M.613E - M.613Eew\*

\*ExtraWide

## GINOCCHIERA ELASTICA EMOTION CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE



### INDICAZIONI

Tutte le situazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto/i ad azione compressiva locale intorno alla rotula, ad esempio:

- modesta instabilità
- artrosi e artrite
- sindrome dolorosa femoro-rotulea

**MD**

### STRUTTURA

- tessuto in materiale latex-free, traspirante ed elastico con fibre merinos, odor control, termoregolatore
- tecnologia Dry Skin per una maggiore gestione della traspirabilità
- comfort zone aumentata a livello del popliteo
- dotata di banda superiore maggiorata con inserti in silicone
- con foro rotuleo coperto
- nuova tramatura per un miglior effetto compressivo, senza cuciture

### SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

### STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone con aggiunta di fibre di quarzo ad anello con profilo 3D per massaggio, utile nella riduzione del gonfiore
- removibile, in 3 dimensioni variabili rispetto alla taglia

### CHIUSURA

- nessuna


### MISURE (ambidestro)

Tg	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
1°	37-40 cm	25-28 cm	-
2°	40-43 cm	28-31 cm	-
3°	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
4°	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
5°	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
6°	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm
7°	55-58 cm	43-46 cm	58-61 cm

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

### Altezza

30 cm

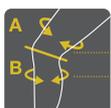

15 cm  
5 cm



La taglia 2° è utilizzabile anche da bambini

**LEVAMED®  
E+MOTION®**

COD. D'ORDINE: M.508E

## CAVIGLIERA ELASTICA EMOTION CON SUPPORTO IN SILICONE



### INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto/i imbottito/i locale/i sulla caviglia, ad esempio:

- leggera instabilità dell'articolazione della caviglia
- slogamenti e distorsioni
- versamenti articolari e gonfiori dovuti ad artrite e artrosi

**MD**

### STRUTTURA

- tessuto in materiale latex-free, traspirante ed elastico con fibre merinos, odor control, termoregolatore
- tecnologia Dry Skin per una maggiore gestione della traspirabilità
- nuova tramatura per un miglior effetto compressivo
- conformazione anatomica senza cuciture con comfort zone aumentata nella zona del collo del piede

### STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone con fibre di quarzo retromalleolari integrati con design 3D per massaggio, utile nella riduzione del gonfiore

### CHIUSURA

- nessuna

### MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
1°	17-20 cm
2°	20-22 cm
3°	22-24 cm
4°	24-26 cm
5°	26-28 cm



Le taglie 1° e 2° sono utilizzabili anche da bambini



Vendita esclusiva diretta.  
Non vendibile online.



**Sede centrale**  
**medi GmbH & Co. KG**  
Medicusstr. 1  
D-95448 Bayreuth  
Germania  
P +49 921 912-0  
F +49 921 912-783  
export@medi.de - www.medi.de/en



**FGP srl**  
Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
fgp@fgpsrl.it - www.fgpsrl.it

