

F 35 TRICONTROL PLUS

Iperestensore vertebrale a 3 punti
basculante telescopico

Stabilità elevata al benessere.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



GARANTIRE LA STABILITÀ, RICERCARE IL COMFORT IDEALE.

Ricerca il benessere è l'impegno quotidiano di FGP. Da questo obiettivo nasce l'iperestensore vertebrale **F35 TRICONTROL PLUS** capace di coniugare controllo totale e massimo comfort per il paziente: il nuovo tutore offre, infatti, il più **alto livello di personalizzazione** e allo stesso tempo una **grande facilità di gestione da parte del tecnico ortopedico** che può regolare il nuovo iperestensore con un solo attrezzo, senza doverlo mai smontare completamente.

Da sempre questo tipo di tutore viene utilizzato dopo fratture, crolli o cedimenti vertebrali di varia natura su base osteoporotica, traumatica, a seguito di patologie neoplastiche o nel post operatorio. Il principio dei 3 punti, che ne è alla base, rimane inalterato ed è garantito da pelote sternali e dorsali confortevoli e modellabile da una banda pelvica perfettamente anatomica.

PELOTA STERNALE

La struttura in alluminio con effetto a molla della pelota e il sistema di aggancio alla struttura basculante permettono la modellazione della stessa per **scaricare la pressione sui muscoli pettorali**, evitando la zona dello sterno. L'imbottitura in poliuretano, scaricata centralmente, ne fa aumentare il comfort.

SNODO TR ASCELLARE

Permette di **regolare l'inclinazione superiore** alle diverse conformazioni anatomiche dei pazienti (ad esempio nel caso di sterno prominente). Il nuovo sistema, realizzato in materiale plastico costampato con bussola filettata in acciaio per la massima tenuta, permette una precisa regolazione (10° per ogni tacca presente sullo snodo).

ASCELLARI TELESCOPICI

La facilità di regolazione telescopica permette un adattamento scrupoloso sul paziente. L'accurata scappatura li rende anatomici e aderenti.

BANDA PELVICA

E SNODO C.ROLL FIX BREVETTATO

Pancia sagomata adattabile per aderire perfettamente alle varie conformazioni anatomiche. Con un solo gesto, lo snodo C.ROLL FIX permette di bloccare l'escursione del basculamento nel punto di massima chiusura per facilitare e rendere più confortevole la seduta del paziente.





NUOVA CHIUSURA C.FAST & SAFE

veloce e sicura. La posizione anteriorizzata ne facilita l'apertura con entrambe le mani. La chiusura è dotata di un **sistema di protezione contro lo sgancio involontario**, che ne consente lo sgancio solo dopo i primi 30° di apertura.

NUOVA CHIUSURA C.EASY RING

Chiusura facile e intuitiva anzitutto per il paziente. Grazie alla sua **forma rotonda** permette di agganciare e sganciare la cintura di appoggio lombare della pelota dorsale a prescindere dalla sua inclinazione, **facilitandone la gestione da parte dell'utilizzatore**.



ASTE LATERALI TELESOPICHE

regolabili a scorrimento. Il sistema permette di **regolare l'iperestensore in altezza**, semplicemente **allentando le 4 viti di bloccaggio**, senza toglierle. Per facilitarne la regolazione sono presenti delle tacche di riferimento che ne identificano il posizionamento. Grazie alla particolare **forma convessa di irrigidimento delle aste laterali**, il tutore mantiene inalterata la sua rigidità e, di conseguenza, il sostegno anche nella fase di massimo scorrimento delle aste. Inoltre, l'innovativo sistema di aggancio delle pelote laterali, ne permette la regolazione in altezza per una maggiore personalizzazione.

F35 TRICONTROL PLUS

unisce **stabilità e comfort** grazie a una struttura in alluminio anodizzato dallo spessore di 2,5 mm, che ne permette la modellazione, e alla presenza di **morbide imbottiture** realizzate in poliuretano con copertura in tessuto Sensitive® Fabrics per una migliore traspirabilità.

PELOTA DORSALE in poliuretano, con scarichi vertebrali per evitare pressioni indesiderate. Grazie al sistema di **aggancio a strappo** è facilmente posizionabile sia in **verticale che in orizzontale**. La pelota è allacciata mediante cintura: questa cintura, dotata di pinzetta a strappo per il fissaggio, è ritagliabile a misura ed è dotata di fibbia di bloccaggio a doppio passaggio.



F 35 TRICONTROL PLUS

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE TELESOPICO



Vendita esclusiva diretta

FGP prevede solo il canale distributivo fisico per la vendita di questo prodotto.



BANDA PELVICA

Basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione

SPINTA STERNALE

Fissa con struttura in alluminio con effetto a molla, snodabile, di piccole dimensioni, con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics

STRUTTURA

In alluminio anodizzato con regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza ascellare
Imbottiture in poliuretano con rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics
Possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

Agganciata mediante cintura ritagliabile dotata di pinzetta a strappo, dotata di fibbia a doppio passaggio per il bloccaggio della stessa
Realizzata con imbottitura in poliuretano con scarichi vertebrali e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics
Sistema di aggancio a strappo che permette un posizionamento sia verticale che orizzontale

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD

coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

INDICAZIONI

Cedimenti somatici (traumatici e non),
cedimenti e fratture in osteoporosi
Post operatorio regione lombare
Fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
Trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
Instabilità dorso-lombare non operabile
Tratto colonna interessato: **D10-L3**

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	60-75 cm
S	76-90 cm
M	91-105 cm
L	106-115 cm
XL	116-125 cm



Altezza F35 TRI-100 standard
F35 TRI-090 short

Codici d'ordine: F35 TRI-100; F35 TRI-090




Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

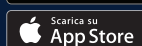

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016