

SILVERFIXÒ

Corsetti lombari e dorso-lombari
con filo d'argento

Il sostegno per ogni
esigenza, il comfort
in ogni momento.

LINEA COMPLETA

PER TUTTE LE ESIGENZE CLINICHE
E DI COMFORT

BENESSERE

TESSUTO ELASTICO CON TRAMATURA
IN FILO D'ARGENTO

NUOVI CORSETTI DORSOSILVER EVO E BACKSILVER EVO

CON NUOVO SISTEMA DI TENSIONAMENTO
SPALLACCI DOUBLE X PRO



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LINEA SILVERFIXÒ

L'EVOLUZIONE DEL DESIGN
E DELLA TECNOLOGIA PER IL MASSIMO
DELLA FUNZIONALITÀ.



Per rispondere all'impegno di un benessere in continua evoluzione, **FGP ha rinnovato performance e funzionalità dell'innovativa linea SilverFixò** dedicata al sostegno dorso-lombare.

Il nuovo sistema Double X Pro migliora la possibilità di tensionamento e l'effetto di richiamo degli spillacci dei tutori **BackSilver Evo** e **DorsoSilver Evo**, mentre il nuovo **StabilitySilver** unisce una grande efficacia a una chiusura semplificata. Completano la gamma **LomboSilver** e **DynamicSilver** che, grazie a un'altezza contenuta, abbinano sostegno e libertà di movimento.

BACKSILVER EVO

DORSOSILVER EVO

STABILITYSILVER

LOMBOSILVER

DYNAMICSILVER

L'ECCELLENZA DEI MATERIALI PER UN BENESSERE PREZIOSO.

La linea SilverFixò è caratterizzata da soluzioni tecniche e scelte di materiali che donano comfort, vestibilità, libertà di vivere i gesti quotidiani e il movimento a tutti i livelli.

Il filo **Resistex® Silver**, utilizzato per la realizzazione della parte interna dei corsetti, grazie alla presenza dell'argento garantisce le seguenti caratteristiche a tutta la linea:

▶ ANTIMICROBICO

Combatte i cattivi odori sfavorendo lo sviluppo di microbi sul dispositivo.

▶ ANTISTATICO

In grado di assorbire ed eliminare le cariche elettriche accumulate.

▶ TERMOREGOLANTE


Disperde il calore in eccesso.

▶ PERMANENTE

Proprietà che durano nel tempo.

▶ SCHERMANTE

Assorbe l'energia statica, l'elettrosmog e i raggi UV.

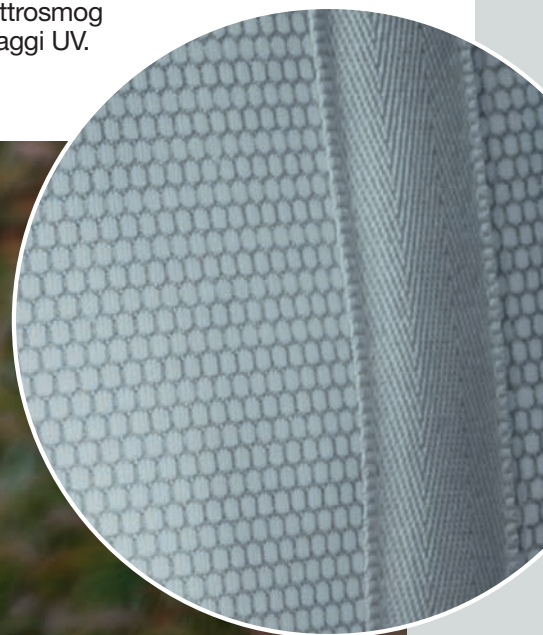

NON UTILIZZARE I DISPOSITIVI
A DIRETTO CONTATTO CON LA PELLE.

Tutti i corsetti della gamma SilverFixò combinano uno spessore ridotto e una sorprendente elasticità per offrire la sensazione di un abbraccio avvolgente: ne deriva una vestibilità ideale, caratteristica che assicura un comfort evoluto e porta il benessere ad un nuovo punto d'arrivo.

CORSETTI LOMBARI

LA SICUREZZA DEL GIUSTO SOSTEGNO INCONTRA COMFORT E DINAMICITÀ.

I corsetti lombari della linea SilverFixò, nelle differenti configurazioni strutturali e nelle diverse altezze posteriori, sono accomunati da un obiettivo condiviso: **garantire un'elevata distrazione vertebrale per una sensibile riduzione del dolore**, accompagnando chi li indossa in tante attività in casa e fuori casa, nel tempo libero e al lavoro, anche nelle comuni attività motorie e sportive.

NUOVO STABILITYSILVER CHIUSURA SEMPLIFICATA, MASSIMA EFFICACIA.

Il nuovo StabilitySilver grazie alla sua pannello frontale unificato, a strappo, permette un veloce posizionamento del tutore.

Una volta chiuso, i due tiranti ad elevata elasticità consentono di esercitare una spinta ottimale fino ad avvertire una riduzione del dolore, ma senza alcun senso di costrizione e disagio: 37 cm di altezza posteriore lo rendono idoneo a supportare il paziente con patologie più importanti. Un'ulteriore garanzia di comfort è fornita dalla sagoma anatomica.



DYNAMICSILVER ALTEZZA RIDOTTA E LIBERTÀ DI MOVIMENTO.



La **patella anteriore ridotta** e il **tirante ad elevata elasticità** rendono il corsetto elastico DynamicSilver facile da portare e un aiuto prezioso per ridurre il dolore.

L'altezza posteriore di 27 cm offre un sostegno comodo nello sport e nelle attività quotidiane, per vivere il movimento di tutti i giorni, con l'ulteriore beneficio dell'elevata traspirabilità del tessuto.



LOMBOSILVER GRANDE SUPPORTO, GRANDE VESTIBILITÀ.

Con un'altezza di 33 cm, intermedia tra quella di DynamicSilver e StabilitySilver, il corsetto semirigido e sagomato LomboSilver **consente di svolgere la maggior parte delle attività quotidiane**, dal camminare al lavoro d'ufficio, sempre con il giusto sostegno grazie al sistema a due tiranti.



CORSETTI DORSO-LOMBARI

MAI COSÌ FACILI DA INDOSSARE,
MAI COSÌ EFFICACI.

NUOVO SISTEMA DI TIRANTI DOUBLE X PRO

Double X Pro di FGP è il nuovo **sistema di spallacci ancora più efficace**, che sfrutta il principio di azione-reazione attraverso un movimento di tensionamento. Una soluzione con incrocio posteriore che dona **stabilità e comfort** ai nuovi corsetti DorsoSilver Evo e BackSilver Evo. Il sistema presenta dei tiranti realizzati come pezzi unici (senza necessità di anelli di congiunzione) che oltre a un maggior richiamo consentono uno **scorrimento più fluido**, guidato dai passanti presenti sulle spalline.



DORSOSILVER EVO
LA PERFETTA
COMBINAZIONE
TRA SOLIDITÀ ED ELASTICITÀ.



Anche la linea dorsolombare SilverFixò si rinnova migliorando ulteriormente comfort e stabilità dei nuovi corsetti.

DORSOSILVER EVO

Con doppio tirante di aggancio anteriore e 2 stecche posteriori removibili

BACKSILVER EVO

Con un unico tirante, 2 stecche in acciaio armonico removibili e 1 asta sagomata in alluminio modellabile ed estraibile.

Per entrambi i modelli, indossabili comodamente, proprio come uno zaino, **la novità è rappresentata dal nuovo sistema di tiranti Double X Pro e dai nastri di sicurezza** che mantengono la regolazione del corsetto impostata, una volta aperti i tiranti.



BACKSILVER EVO IL SOSTEGNO MODELLABILE SULLE ESIGENZE DEL PAZIENTE.

Grazie ai nastri di sicurezza, anche lo spallaccio rimane posizionato correttamente per facilitare l'indosso.



NASTRINI DI SICUREZZA: PER MANTENERE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL CORSETTO E FACILITARE L'INDOSSO.

Una volta indossati, i tiranti lombari possono essere facilmente ripresi, anche a corsetto indossato, grazie alla presenza di nastri di sicurezza che ne consentono il facile recupero anche al paziente con scarsa mobilità.



STABILITYSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO CON FILO D'ARGENTO



STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 37 cm



Codice d'ordine: **LSIL-300**

Vendita esclusiva diretta
FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.



DYNAMICSILVER

CORSETTO ELASTICO CON FILO D'ARGENTO



MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 27 cm



Codice d'ordine: **LSIL-050**

Vendita esclusiva diretta
FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.



STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 3 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

LOMBOSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO CON FILO D'ARGENTO



MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 33 cm



Codice d'ordine: **LSIL-100**

Vendita esclusiva diretta
FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.



STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

BACKSILVER EVO

CORSETTO SEMIRIGIDO CON FILO D'ARGENTO,
SPALLACCI E ASTA DI SOSTEGNO



STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort
- patella anteriore di dimensioni ridotte
- sacca porta asta dotata di imbottitura di protezione

TIRANTI

- due tiranti elastici che si agganciano anteriormente in un unico tirante
- sistema di spallacci Double X Pro con doppio incrocio posteriore e spallacci sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche in acciaio armonico removibili
- 1 asta sagomata in alluminio modellabile ed estraibile

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lumbalgie (acute e croniche)
- dorsalgie e lumbalgie di tipo meccanico
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- supporto nella gestione di localizzazioni metastatiche vertebrali dorso-lombari
- post operatorio interventi discectomia
- coadiuvante nel postoperatorio di interventi correttivi per scoliosi
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- spondilidiscoartrosi dorso-lombare
- tratto colonna interessato: D4-S1



MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 54 cm



Codice d'ordine: DBSIL-150

Passo dopo passo, BackSilver Evo accompagna il paziente nel percorso riabilitativo. La stecca centrale sagomata in lega di alluminio e quelle in acciaio armonico sono collocate in apposite tasche e facilmente estraibili per adattare la spinta alle necessità terapeutiche del paziente.

Vendita esclusiva diretta
FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.



DORSOSILVER EVO

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI
E FILO D'ARGENTO



STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggiore comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- sistema Double X Pro con incrocio posteriore e spallacci contrapposti imbottiti sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccimento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 54 cm



Codice d'ordine: **DSIL-150**

Vendita esclusiva diretta
FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.






FGP srl
 Via Alessandro Volta 3
 I-37062 Dossobuono VR
 T +39 0458600867
 F +39 0458600835
 www.fgpsrl.it - fgpsrl@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA
 UNI CEI EN ISO 13485:2016



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

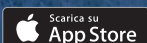

Orthopedic
 & Rehabilitation
 Equipment