

HipOne®

**Tutore funzionale d'anca
ambidestro**

**Tutti i movimenti
che pensavi
di non poter fare.**

HipOne®. NUOVI SNODI, NUOVE MISURE PER UN'ADATTABILITÀ COMPLETA.

HipOne® è il primo tutore d'anca che consente un perfetto adattamento a ciascuna conformazione anatomica, grazie all'innovativo design, alla speciale struttura e all'utilizzo dei materiali all'avanguardia.

Migliorato nelle sue caratteristiche originali, HipOne® presenta oggi delle particolarità davvero uniche che si contraddistinguono nel panorama delle ortesi riabilitative d'anca.

L'innovativo snodo R.O.M., progettato per rispondere alle più diverse necessità di regolazione (flessione-estensione, abduzione/adduzione), si evolve ulteriormente grazie al nuovissimo dispositivo accessorio "distanziatore", che permette di allineare perfettamente la presa di bacino e alla conformità di coscia, specialmente nei casi più difficili.

HipOne® offre inoltre il controllo fisiologico dell'abduzione, garanzia di stabilizzazione e prevenzione dei movimenti del paziente, specialmente dopo l'intervento di protesizzazione.

Predisposto per un utilizzo ambidestro, rendono HipOne®, l'unico tutore d'anca più completo ed innovativo presente sul mercato.



INDICAZIONI

Trattamento conservativo dell'anca e lussazione d'anca

Lussazione articolazione anca traumatica

Fratture cotile

Post operatorio

Lussazione articolare protesi anca

Esiti ri protesizzazioni anca


Esiti ricostruzione cotile

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø Vita (A)	Ø Proximale (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

TABELLA REGOLAZIONI

EXT.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
FLEX.	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
IMM.	0°	15°	30°				

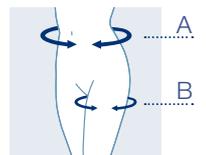

Codice d'ordine:

IMA-120: HipOne con asta corta

IMA-110 BR: HipOne con braccetto distanziale rosso

IMA-120 BR: HipOne con asta corta e braccetto distanziale

SP-HBR: braccetto distanziale



Morbida imbottitura
per un comfort superiore



Regolazione pratica e precisa
per una perfetta adattabilità anatomica



I VANTAGGI:

Ultra leggero

Adattabilità anatomica

Con esclusivo braccetto distanziale in grado di garantire la libertà di movimento in flessione/estensione entro i limiti R.O.M. stabiliti, e di indurre il movimento di abduzione

Semplice la selezione dell'entità dell'abduzione che si vuole sia indotta all'articolazione



Struttura di facile modellazione



Sistema di sgancio rapido



Fissaggio mediante sistema di strap facilmente regolabili



NUOVA ASTA IN VERSIONE CORTA

Segue perfettamente qualsiasi anatomia e movimento, permettendo di posizionare ancora più precisamente il centro di rotazione dello snodo in corrispondenza dell'articolazione coxo-femorale.



BRACCETTO DISTANZIALE ROSSO

Aumenta l'adattabilità alle diverse conformazioni, permettendo un ottimale allineamento della parte inferiore del tutore alla direzione femorale.



PIÙ MOVIMENTI, PIÙ CONTROLLO

L'innovativo snodo puà allargarsi e stringersi lateralmente per seguire in modo specifico e sicuro qualsiasi anatomia.



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

 facebook.com/fgpsrl



AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008
e UNI EN ISO 13485:2004

Rev.1 - 02/12

www.ciabocomunicazione.it