

2022

CATALOGO GENERALE



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

IL BENESSERE
IN CONTINUA
EVOLUZIONE



DAL 1989 CI IMPEGNIAMO SENZA SOSTA PER OFFRIRE SOLUZIONI DI BENESSERE E RIABILITAZIONE PER TUTTI

Ci miglioriamo ogni giorno per migliorare la vita di ognuno.

Questo è il nostro concetto di innovazione: una filosofia che coinvolge tanti aspetti del nostro lavoro per creare prodotti sempre più performanti e ottimizzare le prestazioni di quelli già esistenti.

Ogni giorno sperimentiamo nuovi materiali, studiando nuovi design e nuove funzionalità, ci avvaliamo dell'ausilio di sistemi software all'avanguardia e del supporto di specialisti con cui ci confrontiamo quotidianamente. Perché per noi la ricerca costante è un investimento per il benessere di tutti.

Solo così, guardando sempre avanti e anticipando le esigenze riabilitative, siamo oggi leader e punto di riferimento per il settore.

IL BENESSERE
IN CONTINUA
EVOLUZIONE





Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LA RICERCA DEL BENESSERE ATTRAVERSO IL RECUPERO DEL MOVIMENTO

In FGP pensiamo che il benessere psico-fisico sia un **diritto fondamentale** e che per questo debba essere accessibile a tutti: per questo il cuore della nostra ricerca e produzione è **il recupero e la conservazione della libertà di movimento**, come componente della qualità di vita a tutte le età.

Dal 1989 operiamo approfondendo le problematiche ortopediche e **anticipando le soluzioni**, supportando ogni evoluzione di prodotto con rigorosi studi clinici, in **collaborazione con enti di ricerca italiani e internazionali**.





Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



INNOVAZIONE IN CONTINUO MOVIMENTO

La **trasformazione digitale**, operata da FGP in questi anni, interessa sia gli aspetti produttivi, grazie a **software d'avanguardia integrati nelle nostre tecnologie**, sia gli aspetti di relazione con gli specialisti dell'ortopedia cui è dedicata FGP OrteSystem® l'app che consente la consultazione e un aggiornamento costante sugli oltre 450 articoli a catalogo.



OLTRE 120 BREVETTI DEPOSITATI



**LABORATORIO
DI BIOMECCANICA INTERNO:**
test sul 100% dei prodotti



MATERIALI ESCLUSIVI,
molti dei quali con tecnologia brevettata



INVESTIMENTO IN R&D:
circa il 10% dei ricavi annuali



**PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
100% MADE IN ITALY**
Certificazione UNI CEI ISO 13485:2016



**CURA ARTIGIANALE
E CONTROLLO DI OGNI FINITURA**
a garanzia di comfort e vestibilità



ORTESYSTEM®

**CONNESSI CON LE ESIGENZE
DEL PAZIENTE, GRAZIE A UN SISTEMA
DI RICERCA INTELLIGENTE**

L'app OrteSystem® consente ai **medici e tecnici ortopedici** di accedere al mondo FGP in qualsiasi momento.

L'app è costruita su un **sistema intuitivo di filtri** che permette di trovare **risposte rapide e precise** relative a ogni patologia da trattare. Con OrteSystem®, inoltre, è possibile condividere il risultato delle proprie ricerche in modo sicuro e sostenibile, limitando gli spostamenti.

OS FGP **FGP** OrteSystem®



3 FILTRI PER: ricerca rapida, caratteristiche prodotto, patologie



FILTRO NUOVI PRODOTTI



FILTRO RICERCHE PRECEDENTI



**FUNZIONE CONDIVIDI LA SCHEDA
PRODOTTO** (tramite WhatsApp, email, sms e altre modalità)



**FUNZIONE CONSIGLIA PRODOTTO
AL PAZIENTE PER EMAIL**
(riservata ai medici)

REALIZZIAMO IL BENESSERE FILO PER FILO

L'innovazione FGP inizia dallo **studio dei tessuti e di materiali all'avanguardia**, per un'esperienza di benessere completa attraverso soluzioni performanti e confortevoli.

TESSUTO FULLFIT® PERFORMANCE E COMODITÀ IN UN'UNICA SOLUZIONE.

FullFit® è l'innovativo **tessuto double-layer**, elastico e leggero, conformabile, dedicato a chi vive **sport e gesti quotidiani** come momenti di benessere.

Aspetti tecnici di Fullfit®

- Struttura esterna liscia: garantisce una maggior durata; l'azione compressiva protegge i fasci muscolari e ne favorisce l'attività.
- Struttura interna morbida: offre una piacevole sensazione al tatto; la struttura a nido d'ape veicola il sudore all'esterno, mantenendo il calore corporeo e garantendo traspirabilità.
- Tecnologia Q-Skin®: una fibra in poliammide contenente ioni d'argento consente di abbattere la flora batterica causata da odori sgradevoli, assicurando freschezza e comfort in ogni momento.



TESSUTO PHYLO®

UNA BARRIERA NATURALE PER UN COMFORT ATTIVO

Phylo® è un tessuto esclusivo brevettato da FGP e studiato per garantire il massimo del comfort: applica differenti tecnologie di lavorazione e di trattamento, ed è utilizzato in diversi modelli di tutori, interamente realizzati da FGP nei propri centri produttivi italiani.

Aspetti tecnici di Phylo®

- Trame tridimensionali, per un efficace massaggio e per favorire il passaggio d'aria.
- Fili di nuova generazione più elastici e piacevoli sulla pelle.
- Lavorazione a effetto memoria, per mantenere inalterate traspirabilità e morbidezza.
- Trattamento antibatterico naturale Fresh Tech, con molecole d'argento che riducono il 99,9% dei batteri causa di odori sgradevoli.
- Trattamento "climatizzante" Smart Temp: un esclusivo polimero idrofunzionale, che reagisce in base al grado di umidità e al calore cutaneo, consentendo al tessuto Phylo® di regolare la temperatura in modo dinamico.

HEIQ FRESH TECH
DURABLE ODOR CONTROL

HEIQ SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION



PHYLOTEK® TECHNOLOGY: FA DI OGNI GINOCCHIERA UN PEZZO UNICO

Phylotek® è la tecnologia brevettata da FGP che permette di realizzare ginocchiera in un unico pezzo, senza cuciture e con spessore differenziato sul cavo popliteo. Una grande innovazione in termini di vestibilità che rende ogni ginocchiera in grado di adattarsi alle diverse conformazioni anatomiche: ogni zona della trama agisce con compressione, controllo e precisione differenziate, mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

INDICE ANALITICO

FGP BLU

BLU INSOLE	16
------------	----

RACHIDE CERVICALE

CLC-100	20
CLM-250P	20
CLL-300	21
CLL-400	21
CLL-901	22
ASPEN® VISTA	24
ASPEN® VISTA TX	24
ASPEN® VISTA MULTIPOST	25
VISTA® ICU BACK PANEL	25
VISTA® CTO2	26
VISTA® CTO4	26
VISTA® MULTIPOST THERAPY	27
ASPEN® CERVICAL COLLAR	27
ASPEN® CTO	28
ASPEN® PEDIATRIC	28
ASPEN® CTO PEDIATRIC	29

TRONCO

I-35 TOP	32
F35 POWER	32
F35-100	33
F35-100TR	33
G35-100	34
F35 TRICONTROL PLUS	34
SPINOMED® V	35
SPINOMED® ACTIVE	35
ASPEN TRI-POINT FSO®	36
STABILITYSILVER	36
DYNAMICSILVER	37
LOMBOSILVER	37
DORSOSILVER EVO/EVO SHORT	38
BACKSILVER EVO	38
LOMBOFIXÒ® 4.0	39
LOMBOFIXÒ® 33-4.0	39
LOMBOFIXÒ®	40
DORSOFIXÒ® 4.0	40
DORSOFIXÒ®	41
IN-CROSS	41
IN-CROSS 33	42
PLURIVAL	42
GLAM	43
ALLEVIA	43
ALLEVIA PLUS	44
HORIZON 627	44
ASPEN® LUMBAR SUPPORT	45
PRO ACTION	45
2 SKIN®	46

FLEXÒ	46
CRM 950	47
CRL 300	47
CRL 350	48
LUMBAMED® BASIC	48
LUMBAMED® PLUS	49
LUMBAMED® PLUS E+MOTION	49
LUMBAMED® DISC	50
LUMBAMED® SACRO	50
Accessori per iperestensori	51
P+ FORCE	53
P+ TECH	54
P+ EFFECT	55
P+ PERFECT ZIP	56
P+ SMART BRA	57
P+ YOUNG UP	58
P+ YOUNG EASY UP	59
P+ DORSOLLIEVO	60
P+ PANTS	61

ARTO SUPERIORE

POLSO-MANO

STAX	64
SCAPHOMED®	65
FINGER CAP	65
PDN-SCA	66
FILAMED® 101 / FILAMED® 111	66
RHIZOMED® SOFT	67
D.T3-01	67
PFO-100	68
DTX-04 MANUMED®	69
DTX-05 MANUMED® T	69
D.T3-02	70
D.T3-03	70
DUAL LOCK	71
DUAL LOCK MAX	71
DTX-06 MANUMED® LONG	72
PLE-101 MANUMED® DISK	72
PLE-201 THUMBLOCK®	73
CTP-101 SUR.FING®	73
MANUMED® E+MOTION	74

AVAMBRACCIO-SPALLA

EPIBRACE® PRO	74
D.T3-FSP	75
EPICOMED®	75
EPICOMED® E+MOTION	76
RGB-150	76
RGB-100	77
IMB-200 NEW	77

IMB-300	78	FILAMED® 201	105
IMB-350G	78	FILAMED® 301	106
IMB-400	79	FILAMED® 411	106
IMB-700N	79	FILAMED® 401	107
KIT POST OP SPALLA	80	FILAMED® 451	107
IMB-700	80	FILAMED® 501	108
IMB-750	81	FILAMED® 601	108
IMB-800 MULTISAS®	81	FILAMED® 701	109
SHOULDER ACTION	83	FILAMED® 701 AR	109
OMOMED®	83	FILAMED® 701 WRAP	110
RDS-100	84	FILAMED® 801	110
RDS-200 CLAVIO®	84	FILAMED® 851	111
HFB	85	REHABRACE®	111
ACROFIX	85	GNT-601	112
EPICO ACTIVE	86	GN-3PAN	112
EPICO-REVO	86	PTS	113
EPICO-REVO PS	87	GNO-970 LEGGY®	114
REVO-KIT	87	GNO-970 LEGGY® COOL	114

ARTO INFERIORE

ANCA-GINOCCHIO

IMA-110 HIPONE®	90	GNO-970 LEGGY® ECO	115
IMA-110 BR HIPONE®	90	GNO-970 LEGGY® ECO COOL	115
IMA-103	91	GNO-970 LEGGY® PLUS	116
IMA-150	91	GNO-970 LEGGY® PLUS ECO	116
IMA-109	92	GNO-960	117
STABIMED PHYLOTEK®	93	FLEX-PRO	117
STABIMED PRO PHYLOTEK®	93	M.4® s PCL DYNAMIC	118
COLLAMED PHYLOTEK®	94	M.4® s COMFORT	118
PHYLO® 20	95	M.4® s COMFORT SHORT	119
PHYLO® 40	95	M.4® s X LOCK	119
PHYLO® 41	96	PROTECT 4 EVO	120
PHYLO® 60	96	PROTECT 4 SHORT	120
PHYLO® 61	97	M.4® s OA	121
PHYLO® 72	97	M.4® s OA SHORT	121
PHYLO® 72 A	98	M.4® s OA COMFORT	122
PHYLO® 74	98	PROTECT 4 OA	122
PHYLO® 75	99	LIGHT OA	123
PHYLO® 76	99	SOFT OA	123
PHYLO® 76 A	100	M.3® s	124
PHYLO® 90 PT-CONTROL	100	M.4® ANTIRECURVATUM	124
PHYLO® 90 A PT-CONTROL	101	ACCESSORI PER ORTESI DEL GINOCCHIO	125
D.T3-TTP	101		
TR-BRACE	102		
M 601	102		
GENUMEDI®	103		
GENUMEDI® E+MOTION	103		
GENUMEDI® PRO	104		
GENUMEDI® PSS	104		
GENUMEDI® PT	105		

CAVIGLIA

CVO-700 BOOTY®/CVO-710 BOOTY® SHORT	126
CVO-700 ECO/CVO-700P ECO	126
CVO-750 BOOTY®/CVO-720 BOOTY® SHORT	127
CVO-750 ECO SMART/DELUX	127
M.STEP®	128
CVO-601	128
FILAMED® 901	129
D.T3-CVT	129
CVO-800 ANKLE STABIL	130
8LIGHT	130

CVO-400	132	PDN-ALV	157
LEVAMED® 508	132	FASCIA PRT-S21	158
LEVAMED® E+MOTION	133	PROTEZIONE PRT-S22	158
LEVAMED® ACTIVE	133	PROTEZIONE PRT-S23	158
ACHIMED®	134	MEMOSTEP PRT-S50	159
M 501	134	ACTIONSTEP PRT-S51	159
CVO-730 KIT	135	GUIDA ALLE MISURAZIONI	160

RIABILITAZIONE/VARIO

SWI-TWO	135
---------	-----

LINEA FULLFIT®

GOMITIERA FullFit®	139
COSCIALE FullFit®	140
GINOCCHIERA FullFit®	140
POLPACCERA FullFit®	141
CAVIGLIERA FullFit®	141

LINEA KIDZ

KIDZ-CLM	NUOVO 144
ASPEN® PEDIATRIC	144
ASPEN® CTO PEDIATRIC	145
KIDZ-P04	NUOVO 145
KIDZ-P06	NUOVO 146
KIDZ-P06D	NUOVO 146
KIDZ-RGB	NUOVO 147
KIDZ-IMB	NUOVO 147
RDS-100K	NUOVO 148
KIDZ-TEK	NUOVO 148
KIDZ-TRB	NUOVO 149
KIDZ-601	NUOVO 149
KIDZ-990	NUOVO 150
KIDZ-750	NUOVO 150
KIDZ-CL8	NUOVO 151
M.STEP® KIDZ	151

LINEA PIEDE

PLANTARE PRT-S01	154
PLANTARE PRT-S02	154
SOLETTA PRT-S04	154
TALLONIERA PRT-S06	154
TALLONIERA PRT-S07	155
CUSCINETTO PRT-S09	155
CUSCINETTO PRT-S10	155
CUSCINETTO PRT-S11	155
SEPARATORE PRT-S12	156
DIVARICATORE PRT-S13	156
PROTEZIONE PRT-S20	156
PROTEZIONE PRT-S14	156
PRO_HALLUX PRT-S15 N	157
HALLUX_MED PRT-S16	157

INDICE LINEE

LINEA ASPEN®

ASPEN® VISTA	24
ASPEN® VISTA TX	24
ASPEN® VISTA MULTIPOST	25
VISTA® ICU BACK PANEL	25
VISTA® CTO2	26
VISTA® CTO4	26
VISTA® MULTIPOST THERAPHY	27
ASPEN® CERVICAL COLLAR	27
ASPEN® CTO	28
ASPEN® PEDIATRIC	28
ASPEN® CTO PEDIATRIC	29
ASPEN TRI-POINT FSO®	36
HORIZON 627	44
ASPEN® LUMBAR SUPPORT	45

LINEA SILVERFIXÒ

STABILITYSILVER	36
DYNAMICSILVER	37
LOMBOSILVER	37
DORSOSILVER EVO/EVO SHORT	NUOVO 38
BACKSILVER EVO	38

LINEA POSTURALE

P+ FORCE	53
P+ TECH	54
P+ EFFECT	55
P+ PERFECT ZIP	56
P+ SMART BRA	57
P+ YOUNG UP	58
P+ YOUNG EASY UP	59
P+ DORSOLLIEVO	60
P+ PANTS	61

LINEA D.T3

D.T3-01	67
D.T3-02	70
D.T3-03	70
D.T3-FSP	75
D.T3-TTP	101
D.T3-CVT	129

LINEA PHYLO

STABIMED PHYLOTEK®	93
STABIMED PRO PHYLOTEK®	93
COLLAMED PHYLOTEK®	94
PHYLO® 20	95
PHYLO® 40	95
PHYLO® 41	96
PHYLO® 60	96
PHYLO® 61	97
PHYLO® 72	97
PHYLO® 72 A	98
PHYLO® 74	98
PHYLO® 75	99
PHYLO® 76	99
PHYLO® 76 A	100
PHYLO® 90 PT-CONTROL	100
PHYLO® 90 A PT-CONTROL	101

LINEA TESSUTO ELASTICO

MANUMED® E+MOTION	74
EPICOMED®	75
EPICOMED® E+MOTION	76
M 601	102
GENUMEDI®	103
GENUMEDI® E+MOTION	103
GENUMEDI® PRO	104
GENUMEDI® PSS	104
GENUMEDI® PT	105
LEVAMED® 508	132
LEVAMED® E+MOTION	133
LEVAMED® ACTIVE	133
ACHIMED®	134
M 501	134

LINEA FULLFIT®

GOMITIERA FullFit®	139
COSCIALE FullFit®	140
GINOCCHIERA FullFit®	140
POLPACCERA FullFit®	141
CAVIGLIERA FullFit®	141

LINEA FILAMED

FILAMED® 101 / FILAMED® 111	66
FILAMED® 201	105
FILAMED® 301	106
FILAMED® 411	106
FILAMED® 401	107
FILAMED® 451	107
FILAMED® 501	108
FILAMED® 601	108
FILAMED® 701	109

FILAMED® 701 AR	109
FILAMED® 701 WRAP	110
FILAMED® 801	110
FILAMED® 851	111
FILAMED® 901	129

LINEA PROTECT

PLANTARE PRT-S01	154
PLANTARE PRT-S02	154
SOLETTA PRT-S04	154
TALLONIERA PRT-S06	154
TALLONIERA PRT-S07	155
CUSCINETTO PRT-S09	155
CUSCINETTO PRT-S10	155
CUSCINETTO PRT-S11	155
SEPARATORE PRT-S12	156
DIVARICATORE PRT-S13	156
PROTEZIONE PRT-S20	156
PROTEZIONE PRT-S14	156
PRO_HALLUX PRT-S15 N	157
HALLUX_MED PRT-S16	157
PDN-ALV	157
FASCIA PRT-S21	158
PROTEZIONE PRT-S22	158
PROTEZIONE PRT-S23	158
MEMOSTEP PRT-S50	159
ACTIONSTEP PRT-S51	159

LINEA KIDZ

KIDZ-CLM	NUOVO 144
ASPEN® PEDIATRIC	144
ASPEN® CTO PEDIATRIC	145
KIDZ-P04	NUOVO 145
KIDZ-P06	NUOVO 146
KIDZ-P06D	NUOVO 146
KIDZ-RGB	NUOVO 147
KIDZ-IMB	NUOVO 147
RDS-100K	NUOVO 148
KIDZ-TEK	NUOVO 148
KIDZ-TRB	NUOVO 149
KIDZ-601	NUOVO 149
KIDZ-990	NUOVO 150
KIDZ-750	NUOVO 150
KIDZ-CL8	NUOVO 151
M.STEP® KIDZ	151

**BLU INSOLE:
IL SISTEMA CON
SENSORI PER RILEVARE
CON PRECISIONE
IL GIUSTO CARICO.**

PRECISIONE

Grazie a 214
sensori resistivi

EFFICACIA

Agevola
il percorso
riabilitativo

SICUREZZA

Il giusto carico
ad ogni passo



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

INDICAZIONI

Rilevare il carico applicato dal paziente sull'arto interessato e fornire allo stesso un feedback, sonoro o meccanico (vibrazione), con due livelli di allarme impostabili.



MISURE (DX/SX)

Taglia unica personalizzabile 35-48



RACHIDE CERVICALE



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

CLC-100

COLLARE CERVICALE MORBIDO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del rachide cervicale.

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- dotato di maglina di ricambio

INDICAZIONI

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di lieve entità

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32-38 cm
M	38-44 cm
L	44-50 cm

Altezze 6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm

Codice d'ordine: CLC-100



CLM-250P

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO
MODULABILE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del rachide cervicale.

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone e rinforzo in polietilene

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- dotato di maglina di ricambio

INDICAZIONI

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervicalgia in quadro artrosico
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di lieve entità

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm

Altezza 10 cm

Codice d'ordine: CLM-250P





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del rachide cervicale.

STRUTTURA

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

MISURE

Taglie	Ø Collo
XS	29-35 cm
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm



Altezza regolabile con sistema a strappo

Codice d'ordine: CLL-300



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del rachide cervicale.

STRUTTURA

- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- cervicalgia
- discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
- esiti dolorosi di fratture cervicali
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- dolore cervicale in artrite reumatoide iniziale
- dolore cervicale in artrosi
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di moderata entità

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34-39 cm
M	38-44 cm
L	42-48 cm
XL	47-55 cm



Altezza regolabile con sistema a strappo

Codice d'ordine: CLL-400



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del rachide cervicale.

STRUTTURA

- bivalve in plastazote con placche rigide di rinforzo anteriore e posteriore

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- predisposizione per collegamento ad iperestensore modello F35, F35 POWER, I35 TOP

INDICAZIONI

- cervicalgia severa secondaria ad artrosi
- artrite reumatoide
- spondilite anchilosante
- esiti di fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate)
- esiti interventi chirurgici al rachide cervicale
- trattamento continuativo in patologie croniche non operabili (neoplastiche e non)
- piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
- artrosi cervicale
- condizioni infiammatorie degenerative post-traumatiche di severa entità

MISURE

Taglie Ø Collo

S	30–35 cm
M	35–40 cm
L	40–45 cm

Altezza	CLL-901/2 1/4	5 cm
	CLL-901/3 1/4	7,5 cm
	CLL-901/4 1/4	10 cm
	CLL-901/5 1/4	12 cm

Codice d'ordine: CLL-901





**INSIEME
PER UNA MIGLIOR
QUALITÀ DI VITA.**

Aspen ed FGP: unire le competenze
per moltiplicare i benefici offerti.

 **Aspen**
MEDICAL PRODUCTS

ASPEN® VISTA

COLLARE CERVICALE BIVALVE
REGOLABILE IN ALTEZZA



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- mal di testa cervicogenico
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- trauma / colpo di frusta
- distorsioni / stiramenti
- radicolopatia
- tratto colonna interessato: C2-C7

MISURE

Universale

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA

ASPEN® VISTA TX

COLLARE CERVICALE BIVALVE REGOLABILE
IN ALTEZZA CON APPOGGIO STERNALE



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- mal di testa cervicogenico
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- trauma / colpo di frusta
- distorsioni / stiramenti
- radicolopatia
- tratto colonna interessato: C2-C7

MISURE

Universale

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA TX



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- mal di testa cervicogenico
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- trauma / colpo di frusta
- distorsioni / stiramenti
- radicolopatia
- tratto colonna interessato: C2-C7

MISURE

Universale

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA MP



STRUTTURA

- Accessorio realizzato in plastica rigida con imbottitura a doppia densità a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

MENTONIERA

- no

FORO TRACHEALE

- no

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- utile per pazienti che devono stare allettati per molto tempo.
- previene l'insorgenza di decubiti.
- utilizzare solo con collari vista.
- tratto colonna interessato: C2-C7

NOTE: accessorio compatibile con tutti i collari Vista.

MISURE

Universale

Codice d'ordine: VISTA ICU

VISTA® CTO2

**COLLARE CERVICALE BIVALVE CON
IMMOBILIZZAZIONE STERNALE (MINERVA)**



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica in materiale plastico

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

INDICAZIONI

- stabilizzazione post intervento
- instabilità cervico-toracica
- gestione della frattura
- tratto colonna interessato: C1-D2

NOTE

Il collare è modulabile e permette la gestione del percorso riabilitativo del paziente.

MISURE

Universale

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera e aste toraciche con sistema telescopico

Codice d'ordine: VISTA CTO2

VISTA® CTO4

**COLLARE CERVICALE BIVALVE CON
IMMOBILIZZAZIONE TORACICA (MINERVA)**



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica in materiale plastico e asta dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

INDICAZIONI

- stabilizzazione post intervento
- instabilità cervico-toracica
- gestione della frattura
- tratto colonna interessato: C1-D2

NOTE

Il collare è modulabile e permette la gestione del percorso riabilitativo del paziente.

MISURE

Universale

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera e aste toraciche con sistema telescopico

Codice d'ordine: VISTA CTO4



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica rigida con imbottitura in tessuto con struttura alveolare traspirante all'interno e vellutino grippante all'esterno, pneumatico con cuscinetto cervicale removibile per terapia caldo/freddo

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- mal di testa cervicogenico
- perdita del range di movimento
- dolore al collo generale
- spasmi muscolari
- radicolopatia
- dolore toracico
- neuropatia
- colpo di frusta
- rigidità del collo
- tratto colonna interessato: C1-C7



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica semirigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- mal di testa cervicogenico
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- trauma / colpo di frusta
- distorsioni / stiramenti
- radicolopatia
- tratto colonna interessato: C2-C7

MISURE

Universale

Altezza regolabile con sistema brevettato a ghiera

Codice d'ordine: VISTA MP THERAPY

MISURE

Taglie

Altezza

CORTO	2 cm	SHORT
REGOLARE	3,5 cm	REGULAR
ALTO	5 cm	TALL
EXTRA ALTO	7 cm	EXTRA TALL



La misura si riferisce alla distanza tra il mento in posizione neutrale e la parte prossimale della spalla (richiedere misuratore)

Codice d'ordine: ASPEN

ASPEN® CTO

COLLARE CERVICALE BIVALVE CON
IMMOBILIZZAZIONE TORACICA (MINERVA)



STRUTTURA

- Bivalve in plastica semirigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno latex free, asta toracica e dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

INDICAZIONI

- stabilizzazione post intervento
- instabilità cervico-toracica
- gestione della frattura
- tratto colonna interessato: C1-D2

NOTE

La costruzione del tutore lo identifica come Gold Standard anche per pazienti con peso elevato.

MISURE

Taglie*	Altezza	
CORTO	2 cm	SHORT
REGOLARE	3,5 cm	REGULAR
ALTO	5 cm	TALL
EXTRA ALTO	7 cm	EXTRA TALL



La misura si riferisce alla distanza tra il mento in posizione neutrale e la parte prossimale della spalla (richiedere misuratore)

*identificare la taglia sulla base del collare Aspen Cervical Collar.

Codice d'ordine: ASPEN CTO

ASPEN® PEDIATRIC

COLLARE CERVICALE BIVALVE PEDIATRICO



STRUTTURA

- Bivalve realizzata in plastica semirigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- mal di testa cervicogenico
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- trauma / colpo di frusta
- distorsioni / stiramenti
- radicolopatia
- tratto colonna interessato: C2-C7

MISURE

Taglie*	Peso	Altezza
PD1	5–13 Kg	53–84 cm
PD2	10–15 kg	74–94 cm
PD3	11–16 kg	84–102 cm
PD4	12–19 kg	89–114 cm
PD5	19–25 kg	94–122 cm

*identificare la taglia sulla base dei due parametri, peso e altezza.

Codice d'ordine: ASPEN KIDZ

COLLARE CERVICALE BIVALVA CON IMMOBILIZZAZIONE TORACICA PEDIATRICO (MINERVA)



STRUTTURA

- Bivalve in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica e dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

INDICAZIONI

- stabilizzazione post intervento
- instabilità cervico-toracica
- gestione della frattura

TAGLIA UNICA VALIDA PER LE MISURE

Taglie*	Peso	Altezza
PD4	12–19 Kg	89–114 cm
PD5	19–25 kg	94–122 cm

Il collare contiene al suo interno il pannello frontale PD4 e PD5

*identificare la taglia sulla base del Collare Aspen Pediatric

Codice d'ordine: ASPEN CTO KIDZ





TRONCO



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

I-35 TOP

**IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE TELESCOPICO**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile di ridotte dimensioni

STRUTTURA

- scatola in alluminio ed imbottiture antiscivolo spessorate grippanti
- regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata con imbottitura in materiale accoppiato con scarico vertebrale e ulteriori sistema di stecche in alluminio modellabile
- disponibile in 3 taglie

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	45–60 cm
S	60–80 cm
M	80–110 cm
L	110–130 cm

Altezza I35T-100 standard
I35T-090 short

Codici d'ordine: I35T-100; I35T-090



F35 POWER

**IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE CON BANDA PELVICA REGOLABILE**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione (30°)

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota snodabile imbottita e rivestita in tessuto Sensitive® Fabric

STRUTTURA

- in alluminio con regolazione telescopica dell'altezza
- imbottiture rivestite in tessuto Sensitive® Fabric con imbottiture laterali fissate mediante viti in tecnopolimero

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in tessuto Sensitive® Fabric con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza F35P-100 standard
F35P-090 short

Codici d'ordine: F35P-100; F35P-090





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota in similpelle snodabile imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm



Altezza F35-100, F35-100T standard
F35-090, F35-090T short

Disponibile in versione light: F35-100T; F35-090T

Codici d'ordine: F35-100; F35-090



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- basculante

SPINTA STERNALE

- regolabile dotata di pelota pneumatica snodabile di dimensioni ridotte

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso
- possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE


- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

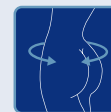

Altezza F35-100TR standard
F35-090TR short

Codici d'ordine: F35-100TR; F35-090TR

G35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI FISSO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- fissa

SPINTA STERNALE

- fissa dotata di pelota in similpelle imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza G35-100 standard
G35-090 short

Codici d'ordine: G35-100; G35-090



F35 TRICONTROL PLUS

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE TELESCOPICO

NUOVO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

BANDA PELVICA

- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione

SPINTA STERNALE

- fissa con struttura in alluminio con effetto a molla, snodabile, di piccole dimensioni, con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics

STRUTTURA

- in alluminio anodizzato con regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza ascellare
- imbottiture in poliuretano con rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics
- possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura ritagliabile dotata di pinzetta a strappo, dotata di fibbia a doppio passaggio per il bloccaggio della stessa
- realizzata con imbottitura in poliuretano con scarichi vertebrali e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabrics
- sistema di aggancio a strappo che permette un posizionamento sia verticale che orizzontale

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non) cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	60–75 cm
S	76–90 cm
M	91–105 cm
L	106–115 cm
XL	116–125 cm

Altezza F35 TRI-100 standard
F35 TRI-090 short

Codici d'ordine: F35 TRI-100; F35 TRI-090



NUOVO


STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in una tasca in morbido tessuto di vellutino accoppiato

TIRANTI

- 2 tiranti personalizzabili che si agganciano alle fibbie presenti sulla patella anteriore
- il tirante ascellare è dotato di morbida imbottitura e stecca-guida per facilitare l'indosso e della spinta posteriore regolabile anti-assuefazione
- ampio tirante lombare

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

NOTE

- si indossa come uno zainetto

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario uno scarico e/o una correzione del rachide lombare/toracico nonché una limitazione del movimento sul piano sagittale, come ad es.:


- fratture da fragilità ossea, indotta da osteoporosi a carico del rachide dorsale e lombare
- malattia di Scheuermann o cifosi giovanile
- cifosi dorsolombare con mal di schiena cronico

MISURE

Taglie	H Tronco	H asta	Art. nr.
XS	fino a 43 cm	39 cm	5669081005
S	44-49 cm	42 cm	5669082005
M	50-55 cm	47 cm	5669083005
L	56-61 cm	52 cm	5669084005
XL	61-67 cm	57 cm	5669085005


Codice d'ordine: M730

Nero
 Champagne

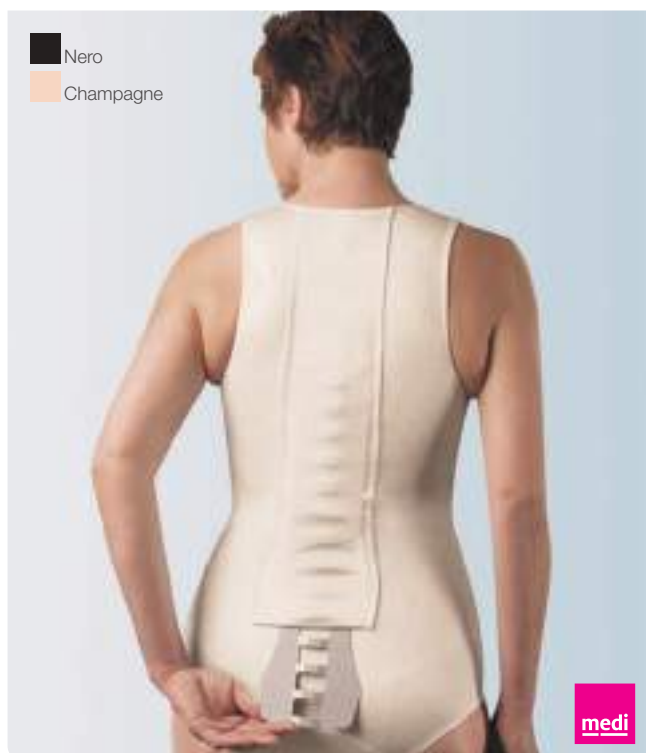

STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in un modellatore in materiale elastico realizzato su misura

TIRANTI

- nessuno

CHIUSURA ANTERIORE

- con cerniera

NOTE

- discreto sotto gli abiti e personalizzato

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui sono necessari uno scarico e/o una correzione della colonna lombare/toracica nonché una limitazione del movimento sul piano sagittale, ad es.:

- frattura osteoporotica delle vertebre toraciche e/o lombari
- morbo di Scheuermann
- ipercifosi con dolore cronico

MISURE

Prodotto personalizzato
Richiedere la scheda per la corretta presa misure

Altezza su misura

Codice d'ordine: M700



STRUTTURA

- materiale anelastico con struttura alveolata traspirante e zone a strappo

TIRANTI

- due, con meccanismo brevettato a carrucola SlickTrack™ System

STECCATURA

- asta di sostegno laterale, regolabile, dotata di accessori

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

INDICAZIONI

- scoliosi degenerativa negli adulti
- scoliosi idiopatica negli adulti
- lesioni al midollo spinale
- paresi celebrale
- malattia di Parkinson
- sclerosi multipla
- sindrome di Brown Séquard
- emiplegia post ictus

MISURE

Universale

Altezza 25 cm

Codice d'ordine: 3POINT-ASPEN



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 37 cm

Codice d'ordine: LSIL-300





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 3 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: LSIL-050



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocuralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60-70 cm
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LSIL-100



DORSOSILVER EVO

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI E FILO D'ARGENTO



**DORSOSILVER
EVO SHORT**

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive® Fabric, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort

TIRANTI

- 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- sistema Double X Pro con incrocio posteriore e spallacci contrapposti imbottiti sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 54 cm

NUOVO

**DORSOSILVER
EVO SHORT**

Altezza 47 cm

Codice d'ordine: DSIL-150 normale; DSIL-150 SH short

BACKSILVER EVO

CORSETTO SEMIRIGIDO CON FILO D'ARGENTO, SPALLACCI E ASTA DI SOSTEGNO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
- tramatura interna in filo d'argento
- sagomatura anatomica per un maggior comfort
- patella anteriore di dimensioni ridotte
- sacca porta asta dotata di imbottitura di protezione

TIRANTI

- 2 tiranti elastici che si agganciano anteriormente in un unico tirante
- sistema di spallacci Double X Pro con doppio incrocio posteriore e spallacci sagomati per un migliore comfort

STECCATURA

- 2 stecche in acciaio armonico removibili
- 1 asta sagomata in alluminio modellabile ed estraibile

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- dorsalgie e lombalgie di tipo meccanico
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- supporto nella gestione di localizzazioni metastatiche vertebrali dorso-lombari
- post operatorio interventi discectomia
- coadiuvante nel postoperatorio di interventi correttivi per scoliosi
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- spondilidiscoartrosi dorso-lombare
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 54 cm

Codice d'ordine: DBSIL-150



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza LFU-600 36 cm
LFD-610 38 cm

Codici d'ordine: LFU-600 uomo; LFD-610 donna



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: LFU-500 uomo; LFD-510 donna



LOMBOFIXÒ®

CORSETTO SEMIRIGIDO STOFFA E STECCHE

DORSOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI

TRONCO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico traspirante

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza LFU-100 36 cm
LFD-110 38 cm

Codici d'ordine: LFU-100 uomo; LFD-110 donna



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci sagomati e imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione della spinta che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarriccamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-700 uomo; DFD-710 donna





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico traspirante

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione che si agganciano anteriormente in un tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, le due stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico

NOTE

- in dotazione vengono fornite 2 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- tre fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-200 uomo; DFD-210 donna



MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm


Altezza 28 cm

Codici d'ordine: INC-100 nero; INC-101 écru



IN-CROSS 33

CORSETTO ELASTICO

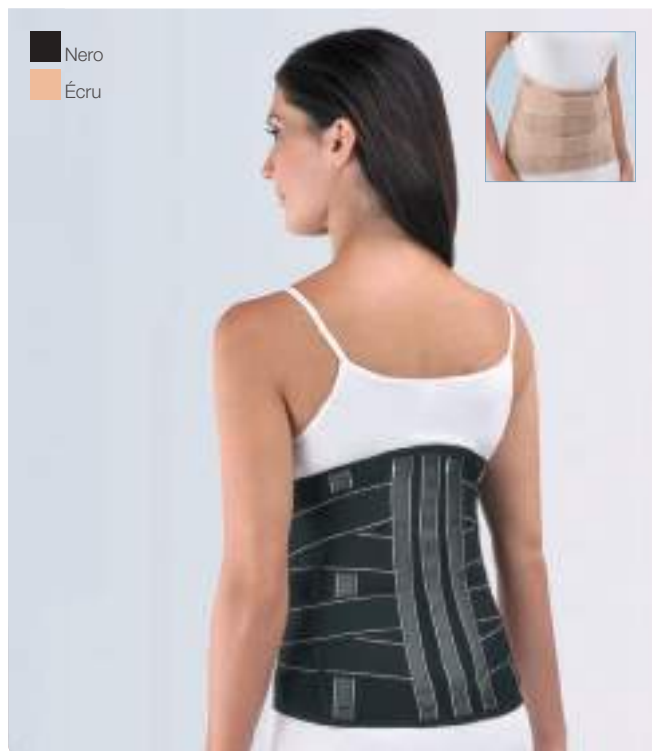

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: INC-200 nero; INC-201 écru



PLURIVAL

CORSETTO ELASTICO TRAFORATO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jacquard

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PLU-100





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio presagomate, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta

NOTE

- particolarmente adatto alla silhouette femminile

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1


MISURE

Taglie Ø Vita

XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 25 cm

Codici d'ordine: GLA-100 nero/nero; GLA-200 nero/skin

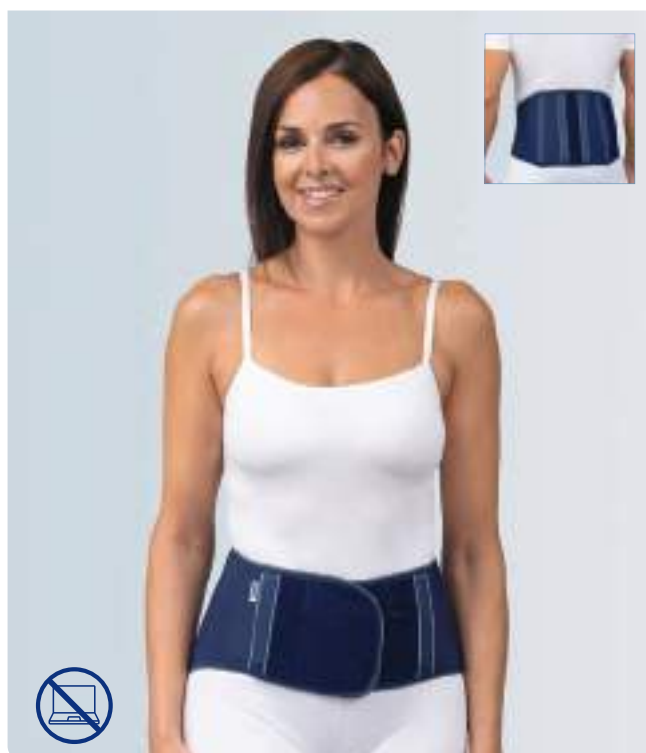

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante e 2 anteriori non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

INDICAZIONI

- lombalgia lieve
- lombosciatalgia
- traumi lievi del rachide lombare
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare

MISURE

Taglie Ø Vita

S	62–74 cm
M	75–88 cm
L	89–103 cm
XL	104–120 cm

Altezza 24 cm

Codice d'ordine: ALL-100



ALLEVIA PLUS

CORSETTO ELASTICO CON TIRANTI



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- 2 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante e 2 anteriori non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

INDICAZIONI

- lombalgia lieve
- lombosciatalgia
- traumi lievi del rachide lombare
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare

MISURE

Taglie	Ø Vita
S	62–74 cm
M	75–88 cm
L	89–103 cm
XL	104–120 cm

Altezza 24 cm

Codici d'ordine: ALL-101



HORIZON 627

CORSETTO SEMIRIGIDO LOMBOSACRALE CON SISTEMA DI TIRANTI A CARRUCOLA



Aspen
MEDICAL PRODUCTS

STRUTTURA

- materiale anelastico con struttura alveolata traspirante e zone a strappo

TIRANTI

- due, con sistema SlickTrack™ System

STECCATURA

- nessuna

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

INDICAZIONI

- supporto post operatorio/sollievo dal dolore; ipotonicità della muscolatura del tronco; disfunzione dell'articolazione sacro-iliaca; sindrome post-laminectomia; grave malattia degenerativa delle articolazioni; infiammazione dell'articolazione sacro-iliaca; procedura decompressiva; malattia del disco degenerativa; rigonfiamento o ernia del disco; dolore lombare acuto; dolore lombare cronico; gestione delle fratture; spondilolistesi; terapia elettrotermica intradiscale; stenosi spinale; distorsioni/stiramenti; sindrome faccettaria; radicolopatia; spondilosi; infiltrazioni; tratto colonna interessato: L1-L5

MISURE

Universale, regolabile

Altezza posteriore 23 cm

Codici d'ordine: HORI 627



STRUTTURA

- tessuto grippante anelastico per una maggiore efficacia

TIRANTI

- due, con meccanismo brevettato a carrucola SlickTrack™ System

STECCATURA

- nessuna

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

INDICAZIONI

- supporto post operatorio/sollievo dal dolore; ipotonicità della muscolatura del tronco; disfunzione dell'articolazione sacro-iliaca; sindrome post-laminectomia; grave malattia degenerativa delle articolazioni; infiammazione dell'articolazione sacro-iliaca; procedura decompressiva; malattia del disco degenerativa; rigonfiamento o ernia del disco; dolore lombare acuto; dolore lombare cronico; gestione delle fratture; spondilolistesi; terapia elettrotermica intradiscale; stenosi spinale; distorsioni/stiramenti; sindrome faccettaria; radicolopatia; spondilosi; infiltrazioni; tratto colonna interessato: L1-L5

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	53-69 cm
S	66-79 cm
M	79-91 cm
L	91-107 cm
XL	104-122 cm
XXL	109-132 cm

Altezza posteriore 22 cm

Codici d'ordine: ASPEN-LUMBSUP



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto semirigido con particolare trama areata altamente traspirante

TIRANTI

- due fasce anelastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano creando un effetto a carrucola e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in polietilene flessibile non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con pelota addominale in polietilene rigida removibile

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1


MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	68-85 cm
M	80-100 cm
L	95-120 cm
XL	115-135 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PRT-T1

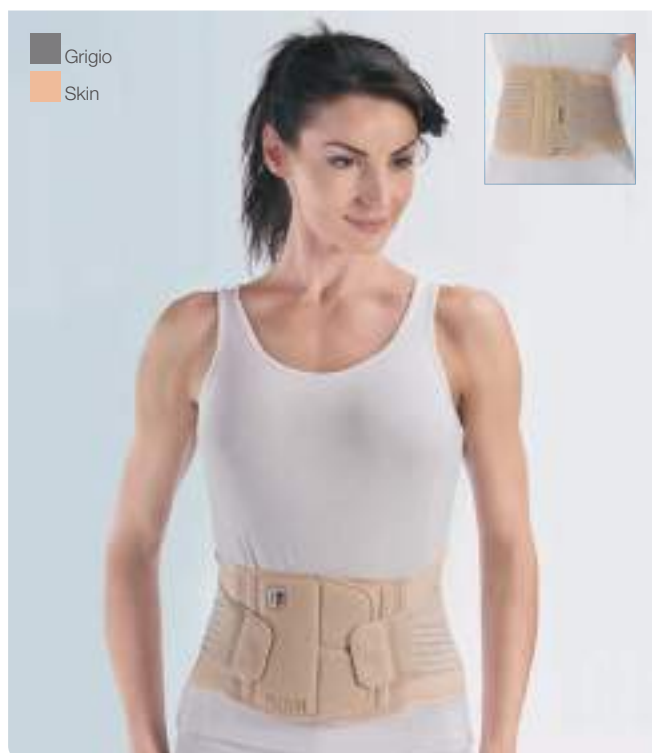

CORSETTO ELASTICO DOUBLE SKIN
CON TIRANTI REMOVIBILI

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica traspirante e antibatterico accoppiato con membrana idrofilica, realizzato senza cuciture

TIRANTI

- due fasce elastiche saldate alla pelota posteriore totalmente removibile si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

NOTE

- la patella anteriore è dotata di maniglia interna per facilitare la chiusura, il tirante removibile permette di modulare il tutore in base al percorso terapeutico del paziente

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	65–79 cm
M	80–94 cm
L	95–109 cm
XL	110–124 cm
XXL	125–140 cm

Altezza 2S-200, 2S-201 27 cm
2S-250, 2S-251 24 cm

Codici d'ordine:

2S-200 skin; 2S-250 skin; 2S-201 grigio; 2S-251 grigio



CORSETTO SEMIRIGIDO MILLERIGHE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido con sistema di trazione lombare a diamante

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
S	60–74 cm
M	75–89 cm
L	90–104 cm
XL	105–119 cm
XXL	120–135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-900





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico millerighe semirigido traspirante

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–74 cm
M	75–89 cm
L	90–104 cm
XL	105–119 cm
XXL	120–135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-950



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

NOTE

- incrocio posteriore coadiuvante nell'efficacia della distrazione vertebrale

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70–85 cm
M	80–95 cm
L	90–105 cm
XL	100–115 cm
XXL	oltre 116 cm


Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-300 nero; CRL-301 écru



CRL 350

CORSETTO ELASTICO CON TIRANTI

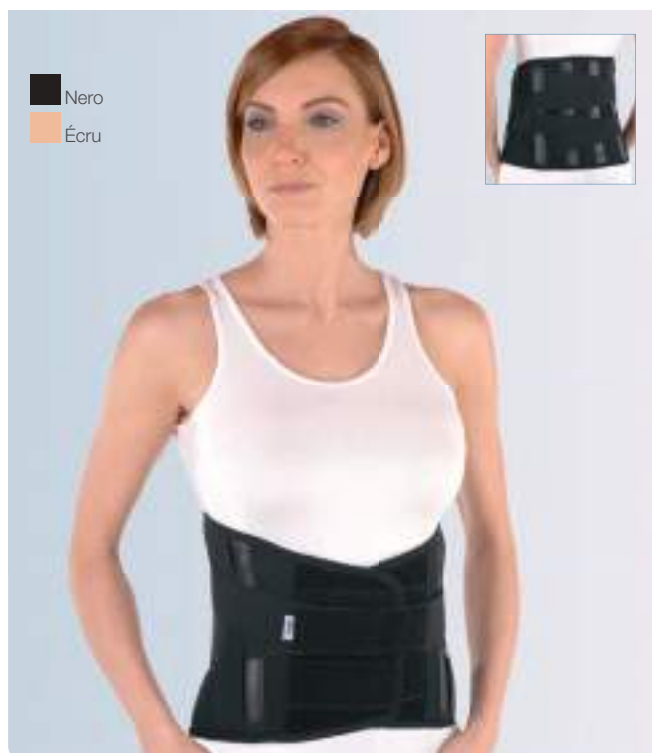

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

STRUTTURA

- tessuto elastico

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70–85 cm
M	80–95 cm
L	90–105 cm
XL	100–115 cm
XXL	oltre 116 cm

Altezza 27 cm

Codici d'ordine: CRL-350 nero; CRL-351 écru



LUMBAMED® BASIC

CORSETTO LOMBARE CON STECCHE DI STABILIZZAZIONE



STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio da modellare e removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare, ad es.:

- lombalgia
- insufficienza muscolare
- dolore nel tratto lombosacrale


MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna 663	Ø Vita Uomo 664
I	76–86 cm	66–76 cm
II	87–98 cm	77–88 cm
III	99–111 cm	89–101 cm
IV	112–125 cm	102–115 cm
V	126–140 cm	116–130 cm

Altezza M.663 27 cm
M.664 26 cm

Codici d'ordine: M.663 donna; M.664 uomo

Donna

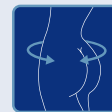

Uomo





STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- pelota posteriore in silicone con superficie massaggiante in 3D dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 2 stecche posteriori a spirale

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare attraverso una ridistribuzione della pressione tramite un cuscinetto dorsale, ad es.:

- lombalgie
- squilibri delle capacità motorie-muscolari nella regione lombare



STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante ed elastico con fibre di lana Merinos
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- pelota posteriore di silicone integrato con fibre di quarzo per un'azione massaggiante dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 2 stecche a spirale posteriori

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della colonna lombare attraverso una ridistribuzione della pressione tramite un cuscinetto dorsale, ad es.:

- lombalgie
- squilibri delle capacità motorie-muscolari nella regione lombare

MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna 669	Ø Vita Uomo 666
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

Altezza M.669 24 cm
M.666 23 cm

Codici d'ordine: M.669 donna; M.666 uomo

Donna




MISURE

Taglie	Ø Bacino donna	Ø Vita uomo
I	76-86 cm	66-76 cm
II	87-98 cm	77-88 cm
III	99-111 cm	89-101 cm
IV	112-125 cm	102-115 cm
V	126-140 cm	116-130 cm

Altezza 24 cm

Codici d'ordine: M.670E

Donna

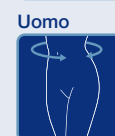

LUMBAMED® DISC

CORSETTO CON SISTEMA A PONTE CON FUNZIONE DI MOBILIZZAZIONE PROGRESSIVA



STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort

TIRANTI

- 2 fasce elastiche agganciate al sistema a ponte che si fissano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio armonico da modellare

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- bordo superiore e inferiore della patella pieghevole

NOTE

- sistema modulare per incrementare la mobilità

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessario uno scarico parziale tramite delordizzazione e successiva mobilizzazione funzionale della colonna lombare, ad es.:

- protrusione discale, ernia del disco (trattamento conservativo, postoperatorio)
- sindrome dolorosa pseudoradicolare
- squilibri muscolari nella regione lombare
- lombalgia moderata
- lomboischialgia moderata

MISURE

Taglie	Ø Bacino Donna 667	Ø Vita Uomo 668
I	76–86 cm	66–76 cm
II	87–98 cm	77–88 cm
III	99–111 cm	89–101 cm
IV	112–125 cm	102–115 cm
V	126–140 cm	116–130 cm

Altezza M.667 35 cm
M.668 37 cm

Codici d'ordine: M.667 donna; M.668 uomo

Donna



Uomo



LUMBAMED® SACRO

CORSETTO PER L'ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA



STRUTTURA

- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- design modulabile

TIRANTI

- 2 cuscini massaggianti posteriori riposizionabili e removibili

TIRANTI

- 2 fasce elastiche per garantire migliore elasticità e aderenza con possibilità di essere removibili

STECCATURA

- nessuna

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo con maniglia

NOTE

- il corsetto permette la modulabilità sulla base del percorso terapeutico del paziente

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione del bacino, ad es.:

- sindrome dell'articolazione ileosacrale
- instabilità dell'articolazione ileosacrale
- mialgie e tendinopatie nella regione del bacino
- instabilità del bacino
- in caso di miotendopatie recidivanti (m. rectus abdominis, m. piriformis)

MISURE

Taglie	Ø Bacino
I	70–85 cm
II	85–100 cm
III	100–115 cm
IV	115–130 cm
V	130–145 cm

Altezza 18 cm

Codici d'ordine: M.680



PELOTE STERNALI



A. PELOTA STERNALE CLASSICA

Posizionabile su **G35-100**

MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)

B. ART. 42 PELOTA STERNALE ELASTICA

Struttura in alluminio elastica con effetto a molla

Posizionabile su **G35-100**

MISURE: taglia unica

C. ART. 41 PELOTA STERNALE ELASTICA PNEUMATICA

Struttura in alluminio elastica con effetto a molla e imbottitura pneumatica. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

D. ART. 43 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

E. ART. 45 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

F. ART. 44 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)

MISURE: taglia unica

G. ART. 46 PELOTA STERNALE

Struttura in alluminio con effetto a molla, snodabile, di piccole dimensioni, con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto Sensitive® Fabric.

Posizionabile su **F35 TRI-100 standard** e **F35 TRI-090 short**

MISURE: piccola (XS-S-M); grande (L-XL)

PELOTE DORSALI



H. CF2-N CUSCINO LOMBOSACRALE

Cuscino lombosacrale anatomico con asta in alluminio modellabile

MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)

I. PELOTA DORSALE CLASSICA

Posizionabile su **G35-100**

MISURE: piccola (S); media (M-L); grande (XL)

L. ART. 44 PELOTA DORSALE

Con imbottitura e scarichi vertebrali

Posizionabile su **F35P-100**, **F35-100**, **F35-100TR** e **G35-100**

MISURE: piccola (S); grande (M-L-XL)

COLORE: bianco o grigio (per F35P-100)

M. PELOTE DORSALI

Posizionabile su **I-35 TOP**

MISURE: piccola (XS)

media (S-M-L per I-35 TOP SHORT e S-M per I-35 TOP)

grande (L)

N. PELOTE DORSALI

Posizionabile su **F35 TRI-100 standard** e **F35 TRI-090 short**

CHIUSURE



O. CHIUSURA B. FAST

Codice d'ordine: **SP-TBF**

In colore bianco o grigio



P. CHIUSURA PGS

Codice d'ordine: **SP-TPGS**

In colore bianco o grigio



Q. CHIUSURA C. FAST & SAFE

Codice d'ordine: **SP-TFS**




R. CHIUSURA C. EASY RING

Codice d'ordine: **SP-TCRIN**



MAGLIA POSTURALE CON CERNIERA

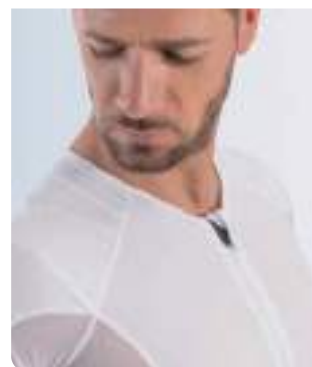

TRONCO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA

- con zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari



MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

Codici d'ordine:

colore nero - PXT-SHIRT W donna; PXT-SHIRT M uomo / colore bianco - PXT-SHIRT B W donna; PXT-SHIRT B M uomo



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia del “capo integrale” ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato “Nilit Breeze” garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete

CHIUSURA

- senza zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali



MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
XS	80–88 cm
S	88–96 cm
M	96–104 cm
L	104–112 cm
XL	112–122 cm



Codici d'ordine: PPS-TECH B bianca; PPS-TECH N nera

MAGLIA POSTURALE SEAMLESS



TRONCO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- senza zip

INDICAZIONI


- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali




MISURE (UNISEX)

Tg. Ø Seno/Torace

1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm

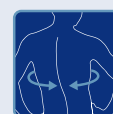

Codici d'ordine: PPS-EFFECT B bianca; PPS-EFFECT N nera

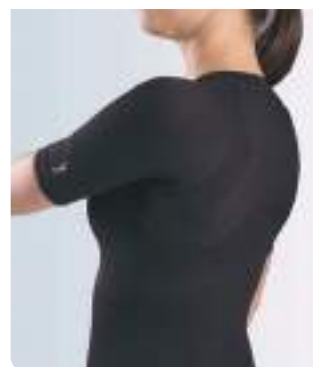

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA


- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- con zip


INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

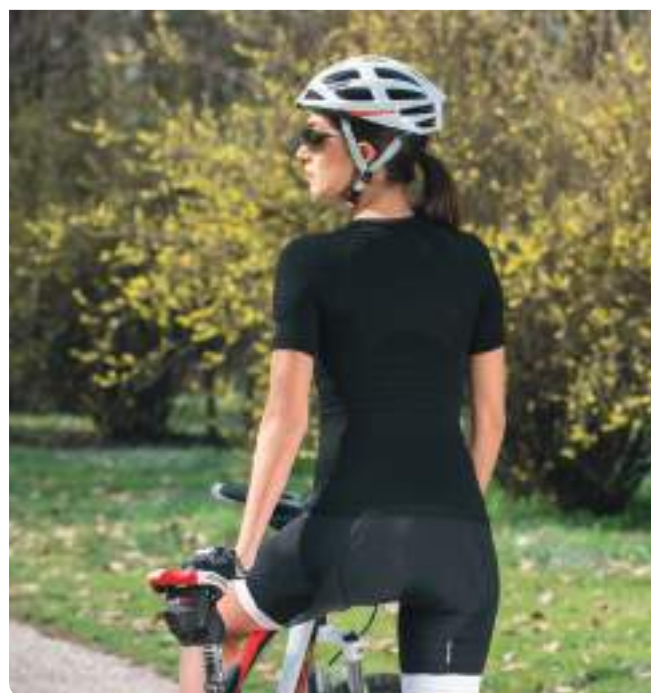

MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm

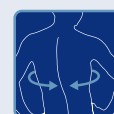

Codici d'ordine: PPS-PZIP B bianca; PPS-PZIP N nera



TRONCO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO ^{MD} coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA

- realizzato con tecnologia WholeGarment®, ovvero assenza totale di cuciture, con filo Nilit® Breeze per una sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura nella zona interscapolare
- bordo inferiore morbido ed elastico

INDICAZIONI


- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali




MISURE

Tg.	Sottoseno	Tg. Reggiseno*
S	66-76 cm	1°-2°
M	72-82 cm	2°-3°
L	78-88 cm	3°-4°
XL	84-94 cm	4°-5°
XXL	90-100 cm	6°-7°

*taglia abituale del reggiseno indossato

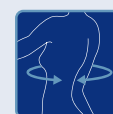

Codice d'ordine: PPS-SMART BRA B (bianca); PPS-SMART BRA BL (blu); PPS-SMART BRA N (nero)

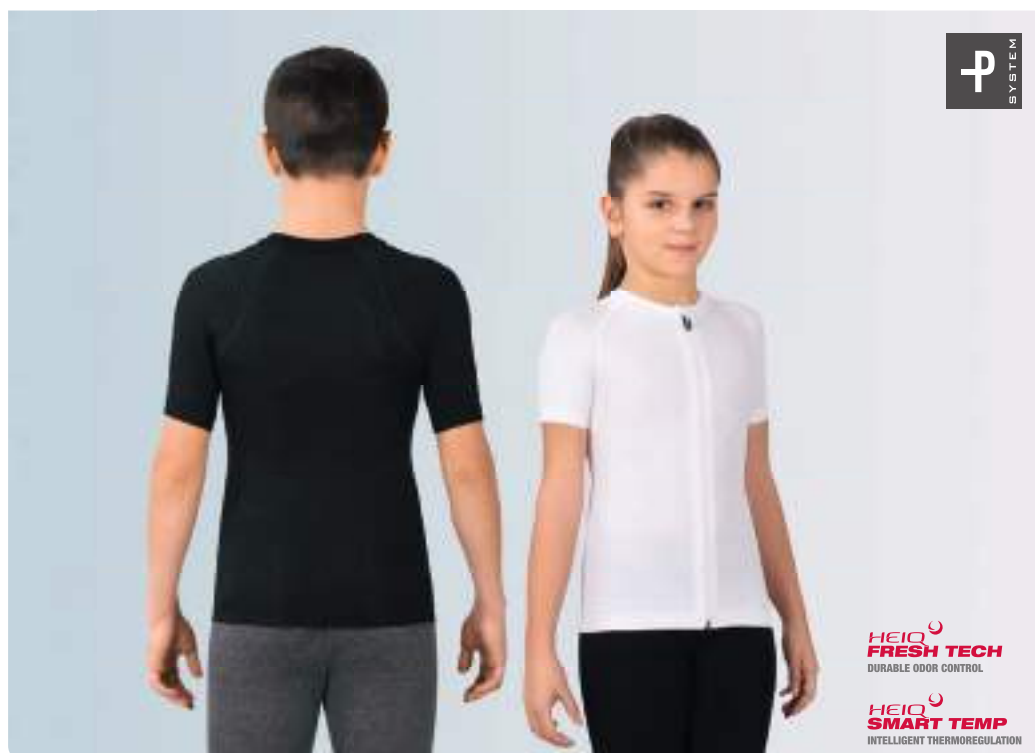

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- con zip


INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali




MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Torace
1°	60–67 cm
2°	67–74 cm
3°	74–80 cm

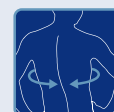

Codici d'ordine: PPS-YOUNG UP B bianca; PPS-YOUNG UP N nera

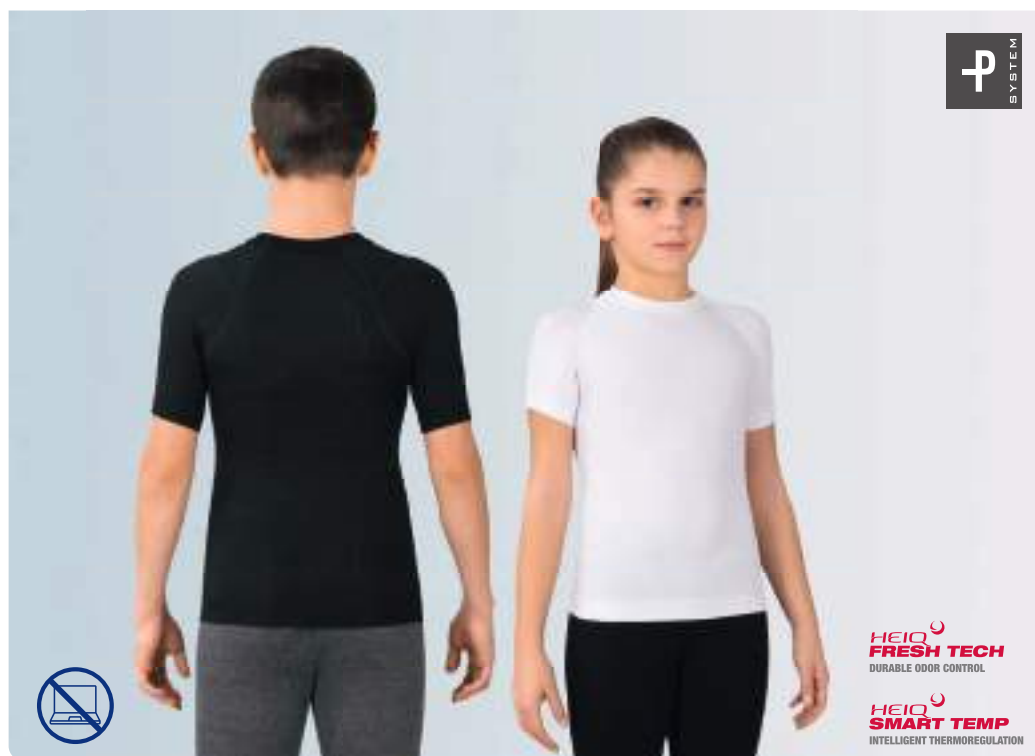

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA


- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e termoregolatore
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort

CHIUSURA

- senza zip


INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

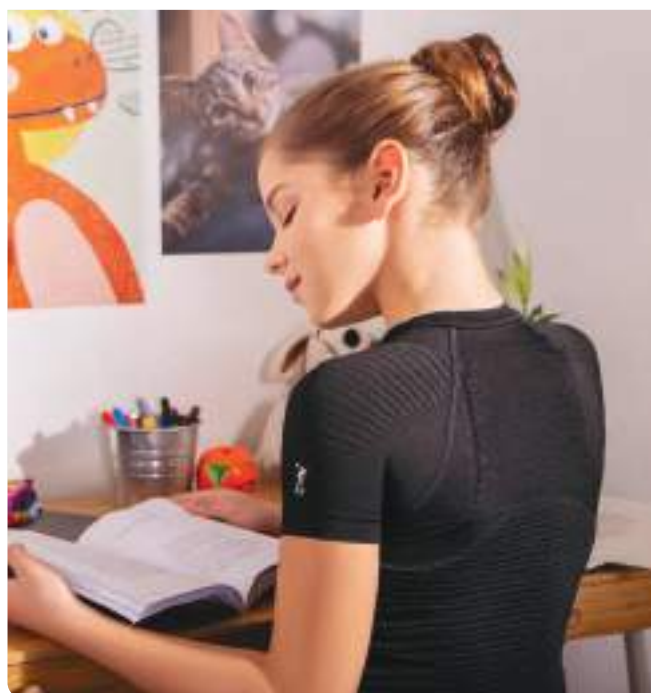

MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Torace
1°	60-67 cm
2°	67-74 cm
3°	74-80 cm

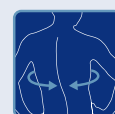



Sistema modulare di trazione



Barre di rinforzo in alluminio

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA

- la parte a contatto con il dorso è realizzata in materiale 3D traspirante, privo di cuciture
- le fasce di trazione ascellare ed addominale sono realizzate in materiale ad alto coefficiente elastico con sistema modulare di tensionamento
- dotato di barre di rinforzo in alluminio modellabile

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonoatrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari



MISURE


Tg.	Ø Vita
XS	56-64 cm
S	64-72 cm
M	72-80 cm
L	80-90 cm
XL	90-100 cm

Altezza 44,5 cm



Codici d'ordine: PPS-DSO G grigio; PPS-DSO S skin

PANTALONE POSTURALE

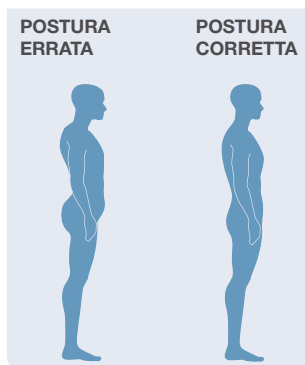

Riallineamento del bacino

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO ^{MD} coadiuvante nel trattamento degli atteggiamenti posturali non corretti del tronco.

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric a fasce di spinta del cingolo sacrale rinforzate in materiale anelastico

CHIUSURA

- a strappo a livello addominale

INDICAZIONI

- coadiuvante nella correzione delle patologie correlate all'antiversione del bacino
- correzione atteggiamento iperlordotico
- coadiuvante nel trattamento delle stenosi lombari
- patologie della sacroiliaca



MISURE DONNA

Tg.	Ø Bacino
XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm



MISURE UOMO

Tg.	Ø Vita
S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm



Codici d'ordine: PXT-PANTS W donna; PXT-PANTS M uomo



ARTO SUPERIORE





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MDI** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- data dalla struttura stessa in ABS

STRUTTURA

- in ABS trasparente con fori per l'aerazione

NOTE

- disponibile anche in scatola completa di 30 pezzi nelle varie misure

INDICAZIONI

- fratture falangi distali
- distorsioni
- contusioni
- lesioni di Segond
- esito di intervento di Ishiguro


MISURE

Taglie **La confezione (30 pz.) contiene:**

1°	3 pz. mis. 1°
2°	4 pz. mis. 2°
3°	4 pz. mis. 3°
4°	4 pz. mis. 4°
5°	4 pz. mis. 5°
5° 1/2	4 pz. mis. 5°-1/2
6°	4 pz. mis. 6°
7°	3 pz. mis. 7°

Codici d'ordine:

STX-001 per singolo pezzo; STX-030 per confezione

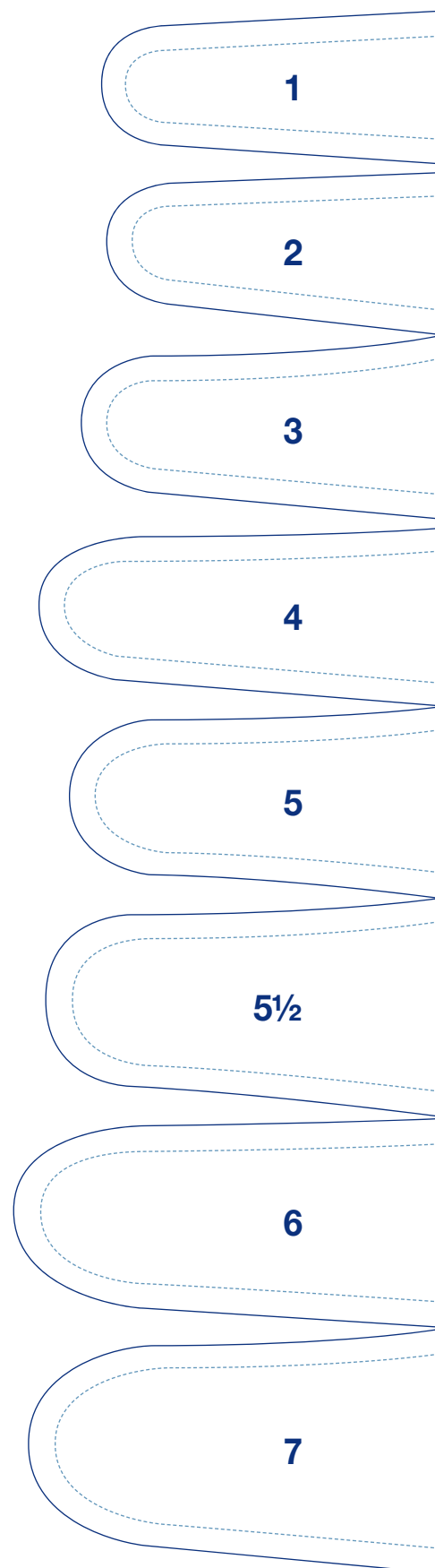



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- mediante guscio anatomico in tecnopolimero con bordi arrotondati e materiale più rigido in corrispondenza dello scafoide

STRUTTURA

- cuffia interna di protezione in tessuto elastico senza cuciture

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante sistema a strappo elastico sul polso

INDICAZIONI

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: SCA-101



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con silicone interno

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- a strappo sul polso

INDICAZIONI

- rizoartrosi
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: FIN-101

PDN-SCA

PROGRAMMA NIGHT & DAY
PER RIZOARTROSI

PROGRAMMA RIZOARTROSI
NIGHT&DAY
SCAPHOMED®+FINGER CAP



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- il programma Night & Day è composto dal tutore SCAPHOMED® e FINGER CAP

FASE DAY

- prevede l'uso di SCAPHOMED® nelle ore diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito tutore rigido

FASE NIGHT

- prevede l'uso di FINGER CAP durante la notte, per favorire il processo anti-infiammatorio a riposo, mantenendo il controllo dello scafoide grazie all'innovativo tessuto elastico e contenitivo

INDICAZIONI

- rizoartrosi moderata o grave
- tendinopatie del pollice
- distorsioni metacarpofalangee
- esiti frattura di Bennett
- lesione di Stener
- morbo di De Quervain
- post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
- fratture base falange prossimale del primo dito

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: PDN-SCA

FILAMED® 101

POLSINO SEMPLICE



FILAMED® 111
Versione con dito

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- nessuna

STRUTTURA

- in neoprene leggero

PRESA POLLICE

- FILAMED® 101: no
- FILAMED® 111: si

CHIUSURA

- a strappo sul polso

INDICAZIONI FILAMED® 101

- distorsioni lievi del polso
- lievi artralgie del polso
- polso SNAC iniziale
- polso SLAC iniziale
- lievi instabilità radio-carpiche

INDICAZIONI FILAMED® 111

- distorsioni di polso e primo dito
- iniziale morbo di De Quervain
- iniziale primo dito a scatto doloroso
- esiti lesioni di Stener (pollice dello sciatore)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codici d'ordine: FILAMED 101; FILAMED 111 con dito



STECCATURA

- elemento distanziale tra pollice e indice in tecnopolimero

STRUTTURA BASE

- in cotone all'interno e con ampie zone grippanti esternamente

PRESA POLLICE

- si con zona a soffietto modulabile alle varie conformazioni anatomiche del pollice e tiranti

CHIUSURA

- a strappo sia a livello del polso che del pollice

NOTE

- il dispositivo non impedisce la presa pollice-indice

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessario immobilizzare l'articolazione a sella del pollice e l'articolazione metacarpo-falangea, ad es.:

- rizoartrosi
- lesioni del legamento (pollice dello sciatore)
- irritazioni dell'articolazione del pollice



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- laterale in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

PRESA POLLICE

- si

CHIUSURA

- a strappo sul polso e sul pollice regolabile a misura tagliando il materiale in eccesso

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- rizoartrosi lieve o moderata
- traumi distorsivi del primo dito
- esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
- esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
- esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

MISURE (Ambidestro)

Taglie	Ø Polso
I	13-17 cm
II	18-23 cm

Altezza 8 cm



Codice d'ordine: RHI-100

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	fino a 15 cm
M	15-20 cm
L	20-25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 14,5 cm



Codice d'ordine: DT3-01



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- mediante la struttura in alluminio posta lateralmente

STRUTTURA

- in alluminio modellabile
- possibilità di regolazione del ROM dell'articolazione del polso e metacarpo falangea
- imbottitura termoformata in morbido vellutino grippante

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili

NOTE

- il tutore è un brevetto esclusivo FGP

INDICAZIONI

- fratture di IV e o V metacarpo conservative o chirurgiche
- fratture prima falange di IV e o V dito conservative o chirurgiche
- lussazione volare della metacarpo falangea IV e o V raggio
- lesione tendine superficiale e o profondo del IV-V raggio post operatorio
- morbo di Dupuytren IV e/o V raggio
- lesioni tendini estensori (comune di IV e/o V raggio e/o proprio del V raggio) post operatorio
- lussazione dorsale della metacarpofalangea del IV e/o V raggio
- dinamizzazione precoce o tardiva di IV e/o V raggio (trattamento conservativo o post operatorio)



BLOCCATO IN FLESSIONE



DINAMICO



BLOCCATO A 0°



BLOCCO IN SWAN NECK POSITION



MISURE (DX/SX)

Taglie		Altezza
S	5,5-6,5 cm	23 cm
M	6,5-8,0 cm	25 cm
L	8,0-9,5 cm	27 cm

Nel prendere le misure va considerata la distanza tra i centri di rotazione del polso e del V metacarpo.

Codice d'ordine: PFO-100





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto traspirante

CHIUSURA

- mediante 3 fasce a strappo
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10–14 cm
1°	14–18 cm
2°	19–23 cm
3°	24–28 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: DTX-04



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto traspirante

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante 3 fasce a strappo
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10–14 cm
1°	14–18 cm
2°	19–23 cm
3°	24–28 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: DTX-05



D.T3-02

POLSIERA STECCATA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-02



D.T3-03

POLSIERA STECCATA LIGHT



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-03





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo superiore in tecnopolimero

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

NOTE

- la copertura del passante multiplo superiore è dubleface rendendo la polsiera personalizzabile

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 21 cm



Codice d'ordine: DUA-100



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- passante multiplo superiore in tecnopolimero

STRUTTURA

- materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori per maggior traspirabilità
- materiale esterno in velluto grappante per una totale adattabilità
- sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
- totalmente privo di cuciture
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo
- fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

NOTE

- la copertura del passante multiplo superiore è dubleface rendendo la polsiera personalizzabile

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14-18 cm
M	19-23 cm
L	24-28 cm

Altezza 27 cm



Codice d'ordine: DUA-200

DTX-06 MANUMED® LONG

POLSIERA STECCATA LUNGA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile
- rinforzi laterali in polietilene

STRUTTURA

- in tessuto traspirante
- apribile completamente

CHIUSURA

- mediante 3 fasce a strappo
- la fascia polso è amovibile e riposizionabile per la personalizzazione del tutore e per una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie in malattia reumatica
- post interventi alle filiere del carpo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 14 cm
S	15–17 cm
M	18–20 cm
L	21–23 cm
XL	oltre 23 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DTX-06



PLE-101 MANUMED® DISK

TUTORE RIGIDO PER POLSO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini a strappo regolabili

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	14,5–19,5 cm	22 cm
2°	19,5–23,5 cm	24 cm

Codice d'ordine: PLE-101





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con supporto per pollice

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

PRESA POLLICE

- sì

CHIUSURA

- mediante 3 cinturini regolabili a strappo e cinturino di fissaggio del pollice

INDICAZIONI

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14–18 cm
M	19–23 cm
L	24–28 cm

Altezza 22 cm



Codice d'ordine: PLE-201



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- mediante struttura interna in alluminio modellabile con prolungamento sulle dita della mano

STRUTTURA

- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
- apribile completamente
- cuciture solo sui tiranti

CHIUSURA

- mediante 4 cinturini a strappo regolabili

INDICAZIONI

- lesioni nervo radiale
- esiti fratture combinate di mano e polso
- post operatorio di lesioni a tendini flessori ed estensori dal II al IV raggio
- sindrome del tunnel carpale

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. mano
S	15–17,5 cm
M	17,5–19,5 cm
L	19,5–22 cm

Altezza 29 cm



Codice d'ordine: CTP-101



STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordi morbidi e confortevoli
- comfort zone nella zona del pollice per una maggiore libertà di movimento

CHIUSURA

- nessuna
- fascia di stabilizzazione sul polso

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario un sostegno del polso con un rinforzo o un cuscinetto, ad es.:

- lesioni al polso, ad es. slogature e distorsioni
- artrosi al polso
- tenosinovite
- sensazione di instabilità articolare

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	13–15 cm
2°	15–17 cm
3°	17–19 cm
4°	19–21 cm

Codice d'ordine: M.844E



La tg I e II
è utilizzabile
anche da
bambini



Cuscinetto pressore orientabile

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto pressore orientabile in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

CHIUSURA

- a strappo con sistema di tensionamento facilitato grazie alle tacche numerate di riferimento
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleit



Disponibile in 4 colori

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine:

EPI-200 F fucsia; **EPI-200 L** lime;
EPI-200 A azzurro; **EPI-200 G** grigio



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

PRESSORE

- pneumatico posizionabile nella zona desiderata

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- epicondiliti
- epitrocleiti



STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole

PRESSORE

- in silicone integrato lateralmente con scarico trocleare e superficie massaggiante
- dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con imbottiture profilate sul gomito, ad es.:

- epicondiliti (ad esempio gomito del tennista o del golfista)
- artrosi
- artriti

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-FSP

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Avambraccio

I	17–20 cm
II	20–23 cm
III	23–26 cm
IV	26–29 cm
V	29–32 cm
VI	32–35 cm



5 cm
dal gomito



La tg I e II
è utilizzabile
anche da
bambini

Codice d'ordine: M.822

**GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO
CON PRESSORE IN SILICONE EMOTION**



STRUTTURA

- tessuto in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole

PRESSORE

- in silicone con fibre di quarzo con scarico trocleare e superficie massaggiante
- dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria la compressione dei tessuti molli attraverso cuscinetti al gomito, ad es.:

- epicondiliti (ad esempio gomito del tennista o del golfista)
- artrosi
- artriti

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio
II	20–23 cm
III	23–26 cm
IV	26–29 cm
V	29–32 cm
VI	32–35 cm



La tg II è utilizzabile anche da bambini

Codice d'ordine: M.822E

**REGGIBRACCIO SEMPLICE
CON REGOLAZIONE A STRAPPO**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla in vellutino regolabile con sistema a strappo

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomeroale e o acromion clavareale
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

MISURE

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33–40 cm
L	oltre 40 cm



Codice d'ordine: RGB-150



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- soft con sacca in cotone e cintura spalla regolabile mediante fibbia dotata di tubolare di protezione collo

CHIUSURA

- mediante fibbia


INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito
- entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
- rottura atraumatica del capolungo del bicipite
- fase acuta di artrosi glenomerale e o acromion claveare
- trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

MISURE

Taglie **Lungh. avambraccio**

S	fino a 32 cm
M	33-40 cm
L	oltre 40 cm

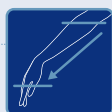

Codice d'ordine: RGB-100



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito libero
- cuffia in tessuto traspirante tridimensionale con bordatura in cotone per la stabilizzazione del gomito con sistema a strappo
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- cinghie nella zona delle spalle in vellutino grippante con doppio manicotto imbottito a protezione del collo

NOTE

- le dimensioni ampie e il design sagomato rendono il dispositivo maggiormente confortevole e permettono di avvolgere e contenere più efficacemente la zona interessata

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-200N

IMB-300

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con contenimento del gomito
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-300

IMB-350G

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO IN TESSUTO GRIPPANTE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito chiuso
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-350 OG

IMB-400

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 30° A 70°



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

GRADO ABDUZIONE

- da 30° a 70°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito e pallina riabilitativa di supporto mano

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce a strappo in vellutino imbottito grippante
- dotato di fascia addominale a strappo

NOTE

- dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-400

IMB-700N

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino grippante con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura; dotata di cintura addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (ambidestro)

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: IMB-700N

KIT POST OP. SPALLA

KIT RIABILITAZIONE SPALLA CON CUSCINO IMB-700N + 2 FASCE ELASTICHE A RESISTENZA VARIABILE + 1 LIBRETTO DI ESERCIZI



IMB 700 N

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura
- dotata di cintura addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- il kit comprende oltre al tutore IMB-700N 2 fasce elastiche a resistenza variabile e un libretto di esercizi per la riabilitazione

INDICAZIONI

- coadiuvante riabilitazione patologie della spalla

MISURE (ambidestro)

Taglie **Lungh. avambraccio**

S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: KIT-SPALLA

IMB-700

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino grigliato

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con fettuccia di rinforzo sulla base

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo, manicotto imbottito di protezione collo
- dotato di fascia addominale regolabile

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-700



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 30°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino gruppante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino gruppante all'esterno

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna. A richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-750



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

GRADO ABDUZIONE

- a 15°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico ed avvolgente con copertura in vellutino e morbida lycra nella zona di appoggio dell'avambraccio
- cuneo di regolazione intra-extra rotazione fino a 20° con copertura in vellutino gruppante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- rete di contenimento avambraccio in morbido tessuto traspirante agganciata con sistema a strappo sulla struttura del cuscino

- dotato di pallina riabilitativa

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo con fibbia a scatto di chiusura e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna, inoltre l'alloggiamento dell'avambraccio inglobato nel cuscino stesso permette di distribuire in modo migliore il peso e ridurre lo stress muscolare, dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (DX/SX)

Taglia unica

Codice d'ordine: IMB-800





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA BASE

- tessuto elastico traspirante con particolare gommatura in grado di aderire alla cute e creare la giusta tensionatura del tutore
- dotata di particolare cuffia spalla con regolazione a strappo per controllare il movimento della spalla

INDICAZIONI

- instabilità articolazione glenomeroale
- prevenzione lussazioni glenomeroali
- esiti pregresse lussazioni glenomeroali
- coadiuvante nel recupero dello stupor del nervo ascellare
- lussazione glenomeroale recidivante
- esiti di intervento di Latarjet e artroscopia di spalla
- esiti lussazioni acromion clavari di I o II grado secondo Rockwood

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Torace
S	75–85 cm
M	82–100 cm
L	97–110 cm
XL	107–120 cm



Codice d'ordine: ACT-100



STRUTTURA BASE

- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole
- dotato di cinghiaggio spalla elastico con doppia fibbia di regolazione per il controllo del movimento
- 2 anelli di trazione permettono di modulare il range di movimento
- cintura vita in materiale elastico

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessario limitare, bloccare o modificare almeno una direzione di movimento della spalla, ad es.:

- trattamento conservativo in seguito a lussazione della spalla anteriore, sublussazione anteriore cronica
- omartrosi dolorosa
- trattamento postoperatorio dopo intervento di stabilizzazione della spalla

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Bicipite
0	inferiore 26 cm
I	26–29 cm
II	29–33 cm
III	33–36 cm
IV	36–39 cm



Codice d'ordine: M.808

RDS-100

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA BASE

- sistema ad 8 con fasce di tensionamento ampie dotate di imbottitura morbida e sagomate anatomicamente
- design studiato per garantire miglior vestibilità sotto gli abiti
- inserto interno in silicone per maggiore stabilità

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce adattabili e ritagliabili, con fissaggio tramite linguette a strappo
- dotato di fibbie autoadattanti per una vestibilità ottimale

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

MISURE

Taglie	Ø Torace
XS	60–75 cm
S	75–90 cm
M	90–105 cm
L	105–115 cm
XL	115–125 cm



Codice d'ordine: RDS-100

RDS-200 CLAVIO®

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore termosaldada realizzata in materiale traspirante alveolare a contatto con la pelle e vellutino nella parte esterna
- i cinghiaggi delle spalle sono realizzati in monospugna all'interno e vellutino all'esterno con tubolari di protezione e agganciati con fibbie alla struttura posteriore

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

MISURE

Taglie	Ø Torace
S	65–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–120 cm



Codice d'ordine: RDS-200



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA BASE

- tessuto imbottito in poliammide e elastomero
- manicotto predisposto per l'inserimento di barre in alluminio laterali estraibili e modellabili

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- polsino reggibraccio removibile

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- sistema di cinghie a strappo regolabili e ritagliabili
- dotato di fascia di immobilizzazione braccio removibile

NOTE

- copertura di protezione del manicotto per una maggiore discrezione e comfort

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle fratture dell'omero prossimale
- trattamento conservativo delle fratture dell'omero non operabili
- trattamento post operatorio delle fratture di omero, scapola clavicola (Floating Shoulder)
- trattamento delle fratture del trochite omerale non chirurgiche

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Braccio

S	21–28 cm
M	26–34 cm
L	31–40 cm



Codice d'ordine: HFB-100



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA BASE

- spallina principale in vellutino imbottita e modellata dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta con cinghie regolabili e fibbie autoadattanti
- fascia regolabile sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- cintura addominale a strappo con chiusura regolabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto tridimensionale dalla struttura alveolare leggero e traspirante, con zona grippante nella regione del gomito
- fascia di rinforzo alla base
- anello d'ancoraggio per il pollice
- cinghia di sostegno del polso

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce in vellutino ritagliabili con fissaggio tramite linguette a strappo con pinzetta numerata
- sistema di fissaggio ad anello

NOTE

- la numerazione delle fasce a strappo di chiusura facilitano la prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico

INDICAZIONI

- trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni acromion clavari
- trattamento post operatorio delle fratture dell'estremo laterale di clavicola

MISURE (DX/SX)

Taglie Lungh. avambraccio

S	fino a 32 cm
M	33–40 cm
L	41–46 cm



Codice d'ordine: ACRO-100

EPICO ACTIVE

TUTORE SOFT PER GOMITO CON R.O.M.



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- struttura di base in tessuto double-layer in grado di garantire un'ottima elasticità. La struttura interna a nido d'ape offre una piacevole sensazione di morbidezza al tatto e traspirabilità.
- tessuto in tecnologia Q-skin®, una fibra in poliammide che tramite ioni d'argento presenti al suo interno, aiuta a diminuire la flora batterica in eccesso riducendo così eventuali odori sgradevoli
- zona cavo cubitale realizzata in rete elastica traspirante utile a garantire maggiore traspirabilità ed evitare accumuli di materiali in fase di flessione
- bordo inferiore siliconato per una maggiore tenuta
- imbottitura nella zona del capitello radiale a protezione e comfort

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- doppi snodi policentrici piatti in alluminio Avional
- regolabile mediante kit in dotazione
- quattro gradi di regolazione per la flessione e per l'estensione

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- assente

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- trattamento funzionale precoce nella terapia conservativa dopo una lussazione del gomito con instabilità del gomito mediale e/o laterale
- utilizzo conservativo al fine di evitare lussazioni recidivanti del gomito
- utilizzo post-operatorio in caso di osteocondrite dissecante
- utilizzo post-operatorio dopo il trattamento di patologie della cartilagine, e dopo intervento di sutura o plastica dei legamenti

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio	Ø Bicipite
XS	19-23 cm	21-24 cm
S	23-26 cm	24-28 cm
M	26-29 cm	28-32 cm
L	29-32 cm	32-37 cm
XL	> 32 cm	> 37 cm

REGOLAZIONI

Ext. 10°, 20°, 30°, 40°

Flex. 45°, 60°, 75°, 90°

Codice d'ordine: EPI-ACT



EPICO-REVO

TUTORE PER GOMITO R.O.M.



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post op. o conservativo di fratture di gomito
- trattamento fratture distali dell'omero

MISURE (DX/SX)

Taglia unica
A richiesta versione Short

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

Codice d'ordine: EPICO-REVO

EPICO-REVO PS

TUTORE PER GOMITO R.O.M. CON DISPOSITIVO DI PRONO SUPINAZIONE DEL POLSO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- dispositivo palmare che consente la prono-supinazione del polso
- cintura spalla con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con reg. ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito e trattamento fratture distali dell'omero
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito

MISURE (DX/SX)

Taglia unica
A richiesta versione Short

Codice d'ordine: EPICO-REVO PS

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
40°	40°	40°
50°	50°	50°
60°	60°	60°
70°	70°	70°
80°	80°	80°
90°	90°	90°
100°	100°	100°
110°	110°	110°
120°	120°	120°

REVO-KIT

ACCESSORIO PER PRONO SUPINAZIONE POLSO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- dispositivo palmare in tecnopolimero che consente la prono-supinazione del polso mediante l'asta in acciaio

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

CHIUSURA

- si aggancia ad incastro sulla struttura grazie alla particolare conformazione

NOTA

- accessorio applicabile su versione per adulto del tutore EPICO-REVO

Codice d'ordine: REVO KIT





ARTO INFERIORE



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

IMA-110 HipOne®

**TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA
COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in vellutino grippante

SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120)

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

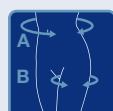


TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine:
IMA-110 asta normale; IMA-120 asta corta

IMA-110 BR HipOne®

**TUTORE FUNZIONALE R.O.M.
PER ANCA CON BRACCETTO DISTANZIALE**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottiture in vellutino grippante

SNODO

- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
- dotato di braccetto distanziale per permettere l'allineamento della parte inferiore del tutore alla direzione del femore
- disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120 BR)

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

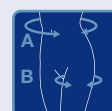


TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°
Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine: IMA-110 BR asta normale;
IMA-120 BR asta corta; SP-HBR braccetto distanziale



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in materiale plastico
- imbottitura in morbida monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO

- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetice del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)	Ø Distale (C)
S	70-80 cm	38-46 cm	35-40 cm
M	81-100 cm	47-56 cm	41-47 cm
L	101-115 cm	57-66 cm	48-54 cm
XL	116-135 cm	67-76 cm	55-62 cm

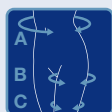


TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

Codice d'ordine: IMA-103



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
- imbottitura in vellutino grippante

SNODO

- vite di allineamento asta femorale
- disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione

CHIUSURA

- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
- della presa coscia a strappo

INDICAZIONI

- coxartrosi non operabile
- lussazione d'anca
- lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
- fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetice del terzo prossimale del femore
- post operatorio emibacino, acetabolo
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

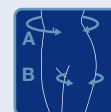


TABELLA REGOLAZIONI

Ext.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°
Flex.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°			
Imm.	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°

Codice d'ordine: IMA-150



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico
- dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile mediante cerniere di apertura

SNODO

- set di stecche a spirale

CHIUSURA

- del bacino e della coscia a strappo

INDICAZIONI

- FAI (femoral acetabular Impingement) pre-post operatorio
- esiti lussazioni d'anca
- coxartrosi non operabile
- esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Vita

S	60-72 cm
M	73-85 cm
L	86-98 cm
XL	99-110 cm

Altezza 44 cm



Codice d'ordine: IMA-109



LINEA PHYLOTEK®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO
PHYSIOGLIDE®



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglidle con regolazione rapida mediante stop
- coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: TEK-ST



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	

LINEA PHYLOTEK®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO
POLICENTRICO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna a strappo orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non; iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: TEK-ST PRO



COLLAMED PHYLOTEK®

LINEA PHYLOTEK®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA CON SNODO PHYSIOGLIDE®



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione rapida mediante stop
- coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP



Spessori ridotti nella parte posteriore per un maggiore comfort

INDICAZIONI

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm



15 cm

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: TEK-CO

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (Flex free)	



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lievi distorsioni di ginocchio
- idrarto o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 25 cm

Codice d'ordine: PHY-20



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 25 cm

Codice d'ordine: PHY-40



PHYLO® 41

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON STABILIZZATORE ROTULEO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360° con tasca

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-41



PHYLO® 60

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON STECCHE A SPIRALE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatia femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-60



LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON STECCHE A SPIRALE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- gonartrosi lieve

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-61



LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento ed esiti distorsioni di ginocchio
- traumatismi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-72



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

PHYLO® 72 A

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Codice d'ordine: PHY-72A

PHYLO® 74

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- coprisnodo in poliuretano

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm



Codice d'ordine: PHY-74

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- coprisnodo in poliuretano

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- traumi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio e instabilità post traumatica
- gonartrosi lieve

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-75



LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero ultrapiatto
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumi della rotula
- lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm

Codice d'ordine: PHY-76



PHYLO® 76 A

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico libero ultrapiatto
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve o moderata

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 34 cm



Codice d'ordine: PHY-76 A

PHYLO® 90 PT-CONTROL

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
- regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 36 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

Codice d'ordine: PHY-90

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
- regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- traumatismi della rotula
- grave artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

CINTURINO SOTTOROTULEO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- con pressore pneumatico anatomico

CHIUSURA

- a strappo

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 36 cm

Codice d'ordine: PHY-90A



REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-TTP



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
- particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto pressore in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante

CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE

- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter
- sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
- tendinopatia del rotuleo
- esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo



Disponibile in 4 colori

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine:

TRB-100 F fucsia; TRB-100 L lime;
TRB-100 A azzurro; TRB-100 G grigio



STRUTTURA

- soft tubolare anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
- conformazione anatomica
- bordo anti-arricciamento
- tramatura differenziata sul cavo popliteo e rotula

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni che richiedono la compressione dei tessuti molli nell'area del ginocchio, ad es.:

- leggera instabilità dell'articolazione del ginocchio
- versamenti articolari e gonfiore
- artrosi e artriti

MISURE

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.601





STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- possibilità di versione ExtraWide per una maggiore vestibilità della coscia

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto/i ad azione compressiva locale intorno alla rotula, ad es.:

- modesta instabilità
- artrosi e artrite
- sindrome dolorosa femoro-rotulea

MISURE

Tg	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
I	37-40 cm	25-28 cm	—
II	40-43 cm	28-31 cm	—
III	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
V	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
VI	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm
VII	55-58 cm	43-46 cm	58-61 cm

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codice d'ordine: M.613



La tg I e II è utilizzabile anche da bambini



STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone con aggiunta di fibre di quarzo ed anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- possibilità di versione ExtraWide per una maggiore vestibilità della coscia

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto/i ad azione compressiva locale intorno alla rotula, ad es.:

- modesta instabilità
- artrosi e artrite
- sindrome dolorosa femoro-rotulea

MISURE

Tg	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
I	37-40 cm	25-28 cm	—
II	40-43 cm	28-31 cm	—
III	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
V	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
VI	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codice d'ordine: M.613E



La tg I e II è utilizzabile anche da bambini

GENUMEDI® PRO

GINOCCHIERA ELASTICA CON SNODO
POLICENTRICO IN TECNOPOLIMERO



STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- policentrico libero in tecnopolimero Easyglide

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
- removibile

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario assicurare un sostegno fisiologico dell'articolazione del ginocchio, ad es.:

- instabilità lievi e medie dell'articolazione del ginocchio
- gonartrosi
- lievi instabilità dei legamenti laterali

MISURE

Tg	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
I	37-40 cm	25-28 cm	-
II	40-43 cm	28-31 cm	-
III	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
V	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
VI	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm
VII	55-58 cm	43-46 cm	58-61 cm

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codice d'ordine: M.615



GENUMEDI® PSS

GINOCCHIERA ELASTICA
CON PRESSORE SOTTOROTULEO INTEGRATO



STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- cinghia a strappo sottorotulea che permette la regolazione della pressione sul tendine indipendentemente dalla regolazione posteriore

STABILIZZATORE ROTULEO

- stabilizzatore rotuleo e cuscinetto sottorotuleo in silicone 3D per massaggio

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- potrebbero esserci consegne miste
- zona in silicone "grip on" per una migliore presa durante la calzatura

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario incidere sulla sede di scorrimento della rotula, ad es.:

- infiammazione del tendine rotuleo (ginocchio del saltatore)
- sindrome di Osgood-Schlatter
- sindrome dolorosa patello-femorale

MISURE

Tg	Ø A	Ø B	Ø A ExtraWide
0	34-37 cm	22-25 cm	-
I	37-40 cm	25-28 cm	-
II	40-43 cm	28-31 cm	-
III	43-46 cm	31-34 cm	46-49 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm	49-52 cm
V	49-52 cm	37-40 cm	52-55 cm
VI	52-55 cm	40-43 cm	55-58 cm
VII	55-58 cm	43-46 cm	58-61 cm

Disponibile versione comfort nella zona coscia. Vedi ExtraWide (riferimento per misurazione Ø A ExtraWide e Ø B)

Altezza 30 cm | Codice d'ordine: M.616



La tg 0, I e II è utilizzabile anche da bambini

**GINOCCHIERA ELASTICA
CON SISTEMA DI STIMOLAZIONE MUSCOLARE
PER IL CONTROLLO DELLA ROTULA**



STRUTTURA

- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre d'eucalipto
- in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- senza cuciture
- dotata di silicone antiscivolo interno
- con foro rotuleo coperto

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- sistema di regolazione a strappo della spinta sul Trigger-point del vasto laterale

STABILIZZATORE ROTULEO

- anello in silicone 3D per il massaggio e la stimolazione muscolare

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessario incidere sulla sede di scorrimento della rotula, ad es.:

- sindrome dolorosa patello-femorale
- maltracking rotuleo
- lateralizzazione della rotula
- ipermobilità rotulea
- disallineamento della rotula

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø A	Ø B
I	37-40 cm	25-28 cm
II	40-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-55 cm	40-43 cm
VII	55-58 cm	43-46 cm

Altezza 30 cm

Codice d'ordine: M.614 DX/SX



La tg I e II
è utilizzabile
anche da
bambini

**LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA TUBOLARE IN NEOPRENE**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, senza foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 201



FILAMED® 301

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON SUPPORTO PATELLARE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con fascia patellare di rinforzo e foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	39–47 cm
M	47–53 cm
L	53–59 cm
XL	oltre 59 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 301



FILAMED® 411

**GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STABILIZZATORE
ROTULEO PERSONALIZZABILE**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene con rinforzo nella zona del ginocchio, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- tubetto in spugna ritagliabile e personalizzabile sulle necessità del paziente

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
0°	37–40 cm
1°	40–43 cm
2°	43–45 cm
3°	45–48 cm
4°	48–51 cm
5°	51–56 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 411



FILAMED® 401

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE ROTULEO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm



Codice d'ordine: FILAMED 401

FILAMED® 451

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STECCA
A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- stecca a spirale mediale e laterale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- nessuna

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni di ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm



Codice d'ordine: FILAMED 451

FILAMED® 501

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE LATERALE A "J"



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e fascia a Y per la trazione rotulea

SNODO/ASTE

- stecche a spirale mediali e laterali

STABILIZZATORE ROTULEO

- in gomma tubolare a forma di J posizionata lateralmente e tensionabile con due fasce a Y in neoprene a strappo

CHIUSURA

- nessuna

NOTA

- a richiesta la J potrà essere posizionata verso l'alto o il basso

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie
- borsite sovrarotulea
- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Disponibile su richiesta J superiore o J inferiore

Codice d'ordine: FILAMED 501 "J"



FILAMED® 601

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STECCHE A SPIRALE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni di ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 601



FILAMED® 701

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

INDICAZIONI

- instabilità post traumatica
- esiti distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi al ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701



FILAMED® 701 AR

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA CON SNODO
POLICENTRICO E INCROCIO SUL CAVO POPLITEO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo, fasce posteriori sul cavo popliteo che incrociano per limitare l'iperestensione del ginocchio

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

INDICAZIONI

- coadiuvante nelle sindromi da iperlassità legamentosa (Marfan, Ehlers-Danlos)
- esiti stabilizzati di lesioni al LCP
- lievi patologie rotulee
- lievi condropatie femoro-rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701 AR



FILAMED® 701 WRAP

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in neoprene, con foro rotuleo e popliteo, completamente apribile anteriormente

SNODO/ASTE

- policentrico libero
- totalmente coperto ed estraibile

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- nessuna

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- traumatismi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- gonartrosi lieve o moderata

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–37 cm
S	38–43 cm
M	44–49 cm
L	50–55 cm
XL	57–61 cm
XXL	oltre 62 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 701 WRAP



FILAMED® 801

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO **PHYSIOGLIDE®**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- esiti di distorsioni ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d'ordine: FILAMED 801



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA LUNGA
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- instabilità post traumatica

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA RIABILITATIVA POLICENTRICA
CON SISTEMA A MOLLE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino gruppante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico libero con sistema a molle
- sistema di blocco e sblocco rapido mediante leva
- aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento postoperatorio delle ricostruzioni isolate o associate del LCA con tendine rotuleo o tendini flessori
- trattamento postoperatorio di osteotomie varizzanti
- trattamento conservativo o postchirurgico, di fratture del piatto tibiale, delle spine tibiali e del femore distale
- lesioni capsulari complesse del ginocchio ad eccezione delle lesioni del legamento crociato posteriore

MISURE

Taglie Ø Coscia

XS	34-39 cm
S	40-45 cm
M	46-51 cm
L	52-57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

Codice d'ordine: FILAMED 851

MISURE

Universale

Altezza 40 cm

Codice d'ordine: REHA-100

GNT-601

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

MISURE

Universale

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

Codice d'ordine: GNT-601

GN-3PAN

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI ECONOMY



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con rete traspirante all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

INDICAZIONI

- post operatorio della rotula
- revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
- immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

MISURE

Universale

Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm

Codice d'ordine: GN-3PAN

LINEA POST OPERATORIA GINOCCHIERA CON SUPPORTO TIBIALE PER PCL



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna di cotone all'interno e vellutino grippante all'esterno
- cuscinetto tibiale anatomico in poliuretano rivestito in cotone

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post acuto rotture LCP
- post operatoria ricostruzione LCP
- trattamento conservativo di instabilità cronica del LCP

MISURE

Universale

Altezze 50 cm, 60 cm

Codice d'ordine: PTS

GNO-970 LEGGY®

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M.



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm
Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970

GNO-970 LEGGY® COOL

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. SCHELETRICA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm
Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970 COOL



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970 ECO

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970 ECO COOL

GNO-970 LEGGY® PLUS

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970P

GNO-970 LEGGY® PLUS ECO

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno
- valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio

CHIUSURA

- mediante sei fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio
- post chirurgico di revisione protesica

MISURE

Corta:
per arto <80 cm
Altezza 57 cm

Lunga:
per arto >80 cm;
Altezza 63 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.
0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-970 P ECO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino a strappo all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione
- aste in alluminio telescopiche

CHIUSURA

- mediante quattro fasce a strappo

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino a strappo all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- blocco/sblocco rapido a 0°/18°/30°/45°/60°
- aste in alluminio con sistema telescopico dotato di tacche di riferimento

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo
- regolazione telescopica singola della posizione dei passanti asolati

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie varizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE

Universale

Altezza telescopica
da 49 cm a 55 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex.

0°	0°
10°	10°
20°	20°
30°	30°
	45°
	60°
	75°
	90°
	105°
	120°

Codice d'ordine: GNO-960

MISURE

Universale

Altezze telescopica da 49 cm a 55 cm

REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°	60°	60°
75°	75°	75°
90°	90°	90°
	105°	
	120°	

NB: blocco/sblocco rapido da
0°/15°/30°/45°/60°

Codice d'ordine: GNO-975

M.4[®]s PCL DYNAMIC

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER PCL



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno
- sistema di spinta tibiale regolabile con sistema epicicloidale

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo numerate regolabili e sistema di tensionamento epicicloidale per il cuscinetto tibiale

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni del legamento crociato posteriore
- trattamento conservativo delle lesioni capsulo legamentose complesse
- trattamento post operatorio nella ricostruzione del legamento crociato posteriore

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 50 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S-PCL

M.4[®]s COMFORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE[®]



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S-COM bianco; M.4S-COM N nero

M.4[®]s COMFORT SHORT

LINEA FUNZIONALI

GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE[®]



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 34 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S SHORT

M.4[®]s X LOCK

LINEA FUNZIONALI

GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CON SNODO
PHYSIOGLIDE[®] E SISTEMA DI BLOCCO A 0°



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in materiale idrorepellente all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click
- leva rapida di blocco/sblocco snodo a 0°

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati
- trattamento post traumatico acuto di lesioni capsulo legamentose immediato post operatorio del ginocchio

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4 S X.LOCK

PROTECT 4 EVO

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grappante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Codice d'ordine: PRO4-EVO

PROTECT 4 SHORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grappante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 34 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

Codice d'ordine: PROTECT 4 SHORT

LINEA OA GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

LINEA OA GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO CORTA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.4S OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 34 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.4S OA SH Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

M.4[®]s OA COMFORT

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con sistema di personalizzazione
- giunti elastici delle arcate superiori e inferiori adattabili alle conformazioni
- giuntura in diagonale per garantire adattabilità
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottitura e cuscinetti in appoggio in tessuto accoppiato morbido e confortevole

SNODO/ASTE

- snodo policentrico regolabile con asta femorale anteposta e cappuccio Easy Click
- Sistema di regolazione spinta varo/valgo facile e chiara grazie alla nuova grafica

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a scatto numerate e regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Cod. ordine: M.4S OA COMF Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

PROTECT 4 OA

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grappante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°		
75°		
90°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: PRO4 OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- tubolare con parte superiore a Wrap
- tessuto Phyllo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
- cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
- silicone interno per una maggiore stabilità
- rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto

SNODO/ASTE

- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
- snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con asta superiore anteposta e valva di stabilizzazione

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- chiusura superiore wrap personalizzabile
- cinghie anteriori di tensionamento a strappo numerate e personalizzabili dotate di scala numerata per la giusta regolazione
- cinghie posteriori a strappo posizionate fuori dalla regione poplitea

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio o varo/valgo post traumatico
- varo/valgo artrosico lieve, moderato o costituzionale doloroso

MISURE (DX/SX)

Tg. Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	45°
45°	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

Codice d'ordine:

LIGHT OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- tubolare con parte superiore a Wrap
- tessuto Phyllo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
- cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
- silicone interno per una maggiore stabilità
- rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto

SNODO/ASTE

- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
- snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con anteposizione della parte femorale

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- 4 fasce a strappo numerate regolabili: 2 esterne sagomate e 2 interne con aggancio facilitato allo snodo

INDICAZIONI

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg. Ø Coscia

XS	31-37 cm
S	37-45 cm
M	45-51 cm
L	51-57 cm
XL	57-65 cm
XXL	65-74 cm

Altezza 43 cm



REGOLAZIONI

Ext. Flex. Imm.

-5°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	
	120°	

Codice d'ordine:

SOFT OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

M.3[®]s

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
MONOCOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico, dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide unilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

NOTE

- dotata di cuscino pneumatico gonfiabile secondo le necessità

INDICAZIONI

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	90°	

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.3 S Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

M.4[®] ANTIRECURVATUM

LINEA RECURVATUM
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER RECURVATUM



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite
- sistema ARBS di ammortizzamento progressivo mediante gommini a shore differenziati

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del genus recurvatum

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø A	Ø B
XS	31-37 cm	25-27 cm
S	37-45 cm	27-32 cm
M	45-51 cm	32-37 cm
L	51-57 cm	37-41 cm
XL	57-65 cm	41-47 cm
XXL	65-74 cm	47-50 cm

Altezza 40 cm



REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
	45°	
	60°	
	75°	
	90°	

Le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Consigliamo uso modulo prese misure per prodotto personalizzato, senza nessun costo aggiuntivo.

Codice d'ordine: M.4 ARBS

Kit di regolazione come accessorio su richiesta.

PROTEZIONI



- A. CAP 100**
PROTEZIONE ROTULEA PER GINOCCHIERE FUNZIONALI
Protezione della rotula negli sport a rischio (motocross, etc.)
MISURE: universale
- B. VAL 100**
VALVE DI PROTEZIONE
per GNO 970 LEGGY® e GNO 970 LEGGY® ECO

STABILIZZATORI ROTULEI



- A. STABILIZZATORE ROTULEO**
cuscinetto stabilizzante per rotula in plastazote
- B. STABILIZZATORE ROTULEO**
cuscinetto stabilizzante per rotula grippante in schiuma di polietilene
- C. STABILIZZATORE ROTULEO**
cuscinetto stabilizzante ad anello per rotula in silicone
MISURE: piccolo, grande

SNODI PER GINOCCHIERE



- A. SNODO POLICENTRICO**
non regolabile con blocco in estensione per
PHYLO® 74, PHYLO® 75
- B. SNODO POLICENTRICO PIATTO**
per STABIMED PRO PHYLOTEK® (colore nero), PHYLO® 76,
PHYLO® 76 A, FILAMED® 701, FILAMED® 701 WRAP
e FILAMED® 701 AR
- C. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE® PIATTO**
per FILAMED® 801
Versione lunga FILAMED® 851
- D. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®**
per STABIMED PHYLOTEK®
Nella versione con aste lunghe per COLLAMED PHYLOTEK®
- E. SNODO POLICENTRICO REGOLABILE**
per PHYLO® 72, PHYLO® 72 A
Nella versione con aste lunghe per ARTHROFIX PHYLO®

CVO-700 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M.



CVO-710

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- articolazione R.O.M. della dorso flessione da +20° a -40° e della pianta flessione da -20° a +40°, ogni 10°; immobilizzazione a 10° e 20°
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-700
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-710

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-700
S	32-38	41 cm
M	38-43	43 cm
L	43-48	46 cm



Altezza per CVO-710 BOOTY SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-700 normale; CVO-710 short

CVO-700 ECO

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M. ECONOMY



CVO-700P ECO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno ed all'esterno per CVO-700 ECO
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino e interno pneumatico gonfiabile con pompetta nella versione CVO-700P ECO

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- articolazione R.O.M. regolabile mediante pin
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- regolazione dell'articolazione R.O.M. della dorso flessione da 0° a 45° e della pianta flessione da 0° a 45° ogni 7.5° e possibilità di immobilizzazione a 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45°

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa
S	36-39
M	40-42
L	43-45
XL	Oltre 45



Altezza 40 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine:
CVO-700 ECO normale; CVO-700P ECO pneumatico



CVO-720

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
- aste disponibili in versione lunga e corta
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-750
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-720

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-750
S	32-38	39 cm
M	38-43	42 cm
L	43-48	44 cm



Altezza per CVO-720 BOOTY SHORT 35 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750 normale; CVO-720 short



CVO-750 ECO DELUX PNEUMATICO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno e all'esterno (versione SMART)
- imbottitura pneumatica in tessuto accoppiato con vellutino grappante all'interno e all'esterno (versione DELUX)
- plantare traspirante e lavabile in materiale shock-absorbing
- kit di imbottiture per aumentare il comfort o removibili per aumentare l'ampiezza mediale laterale

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- un unico pezzo composto da scafo e guscio in tecnopolimero ad alta resistenza con zone traspiranti
- suola antiscivolo con conformazione a barca
- pannello frontale flessibile e removibile
- protezione delle dita regolabile e removibile

CHIUSURA

- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio

INDICAZIONI

- distorsioni di caviglia I, II, III grado
- esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
- trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
- esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
- post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg.	Calzata scarpa
S	36-40
M	40-44
L	44-47



Altezza 38 cm

Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.

Codici d'ordine: CVO-750 ECO NP (SMART, non pneumatico); CVO-750 ECO N (DELUX, pneumatico)

**STRUTTURA**

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- disponibile in versione:
M.STEP® STANDARD dotata di valve lunghe in tecnopolimero
M.STEP® ATHLETIC dotata di valve slim in tecnopolimero

CHIUSURA

- mediante cinturini a strappo
- cinturino regolabile sottocalcanare

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della caviglia con limitazione della pronazione e supinazione, ad es.:

- in seguito a lesioni dei legamenti dell'articolazione tibio-tarsica (II e III grado) (trattamento post-traumatico / post-operatorio)
- in seguito a distorsioni della caviglia
- in caso di instabilità cronica dell'articolazione tibio-tarsica

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza

Standard 27 cm

Athletic 25 cm

Codici d'ordine: M.STEP STANDARD, M.STEP ATHLETIC



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- cuscinetto in materiale plastico gonfiabile con pompetta

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve in materiale plastico

CHIUSURA

- a strappo mediante cinturini
- cinturino regolabile sottocalcanare

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza 25 cm

Codice d'ordine: CVO-601



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- in neoprene

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
XS	24–26 cm
S	27–29 cm
M	30–32 cm
L	33–35 cm
XL	36–38 cm



Codice d'ordine: FILAMED 901



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata anteriormente
- ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
XS	24–26 cm
S	27–29 cm
M	30–32 cm
L	33–35 cm
XL	36–38 cm



Codice d'ordine: DT3-CVT

CVO-800 ANKLE STABIL

CAVIGLIERA STABILIZZANTE CON PLACCHE MALLEOLARI



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- in poliestere con tallone aperto

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- placche malleolari in materiale plastico estraibili

CHIUSURA

- a laccio

INDICAZIONI

- distorsioni di I, II, III grado
- esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
- instabilità laterale di caviglia
- prevenzione nella recidiva di distorsione
- coadiuvante nel recupero sportivo
- stabilizzazione di caviglia artrosica
- esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	37-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46



Codice d'ordine: CVO-800

8LIGHT

CAVIGLIERA CON BENDAGGIO AD 8



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata posteriormente

NOTE

- disponibile in colore nero e skin

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm



Codice d'ordine: CL8-100 nero; CL8-200 skin



CVO-400

TUTORE PER CAVIGLIA E PIEDE CIONDOLANTE



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO  coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- in polietilene flessibile con imbottitura sul polpaccio

CHIUSURA

- a strappo mediante cinturino

NOTA

- il materiale può essere ritagliato a misura e modellato

INDICAZIONI

- trattamento del piede ciondolante

MISURE (DX/SX)

Uomo - **Altezza** 34 cm

Donna - **Altezza** 31 cm

Codice d'ordine: CVO-400

LEVAMED® 508

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE



STRUTTURA

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio

CHIUSURA

- no

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto(i) imbottito(i) locale(i) sulla caviglia, ad es.:

- leggere instabilità
- distorsioni, ematomi
- gonfiore e versamenti articolari (artrosi / artrite)

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Caviglia

I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



La tg I e II è utilizzabile anche da bambini

Codice d'ordine: M.508



STRUTTURA

- in materiale bielastico con fibre merinos latex-free altamente traspirante e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone con fibre di quarzo retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio

CHIUSURA

- no

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto(i) imbottito(i) locale(i) sulla caviglia, ad es.:

- leggera instabilità dell'articolazione della caviglia
- slogamenti e distorsioni
- versamenti articolari e gonfiori dovuti ad artrite e artrosi



STRUTTURA

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture
- dotata di sistema di fasce a strappo per garantire la stabilità all'articolazione e controllare la supinazione

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati

CHIUSURA

- no

NOTE

- la cavigliera, se necessario, può essere indossata senza il sistema di fasce stabilizzanti

INDICAZIONI

Il suo uso è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscinetto(i) imbottito(i) locale(i) sulla caviglia e in cui viene limitata almeno una direzione di movimento con elementi funzionali supplementari, ad es.:

- distorsioni con iperestensione capsulare
- instabilità croniche dei legamenti con traumi da supinazione ricorrenti (lesioni da torsione)
- nella seconda fase di trattamento di rotture dei legamenti esterni
- trattamento conservativo di lesioni del legamento sindesmotic, nei casi in cui non sia necessario alcun intervento chirurgico

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Caviglia

I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm



La tg I e II
è utilizzabile
anche da
bambini

Codice d'ordine: M.508E

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Caviglia

I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm



Codice d'ordine: M.508ACTIVE DX/SX

**STRUTTURA**

- in materiale elastico latex-free con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone integrati

CHIUSURA

- no

NOTE

- dotata di una coppia di tallonette in silicone per ridurre le tensioni del tendine d'Achille

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli con cuscino(i) compressivo(i) locale(i) sul tendine d'Achille, ad es.:

- infiammazione acuta e cronica del tendine d'Achille
- tendinopatie Achillodinia
- borsite del tendine d'Achille

**STRUTTURA**

- anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
- conformazione anatomica
- tramatura differenziata sul tallone

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- no

CHIUSURA

- no

INDICAZIONI

Tutte le indicazioni in cui è necessaria una compressione dei tessuti molli sulla caviglia, ad es.:

- leggere instabilità
- distorsioni, contusioni
- gonfiori e versamenti articolari (artrosi / artriti)

MISURE (ambidestro)**Taglie** **Ø Caviglia**

I	17–20 cm
II	20–22 cm
III	22–24 cm
IV	24–26 cm
V	26–28 cm
VI	28–30 cm



Codice d'ordine: M.511

MISURE (ambidestro)**Taglie** **Ø Caviglia**

I	17–20 cm
II	20–22 cm
III	22–24 cm
IV	24–26 cm
V	26–28 cm
VI	28–30 cm



Codice d'ordine: M.501

CVO-730 KIT

SET DI 3 CUNEI DI PRONAZIONE
PER TUTORE WALKER



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- kit composto da 3 cunei di pronazione di 10° ciascuno utilizzabili anche in combinata
- realizzati in gomma sintetica

NOTE

- accessori per CVO 750, CVO 750 ECO N, CVO 720, CVO 750 ECO NP

INDICAZIONI

- coadiuvante nel trattamento riabilitativo del tendine di Achille


MISURE

S	32-38
M	38-43
L	43-48

Codice d'ordine: CVO-730 KIT

SWI-TWO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
BIPODALICA

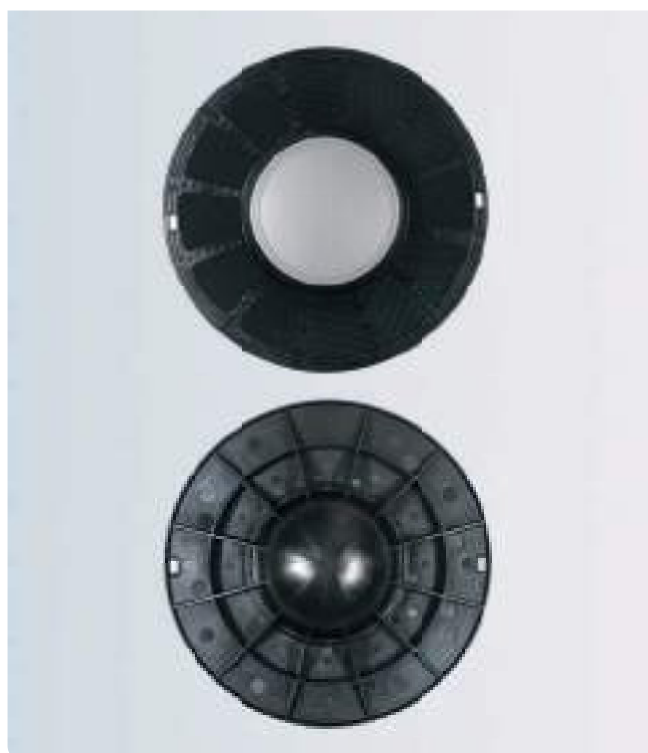

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone
- tavoletta a ufo bipodalica

INDICAZIONI

- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia

MISURE

Singola - unica
(diametro 36 cm)

Codice d'ordine: SWI-TWO



LINEA FULFIT



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

LINEA FULLFIT



GOMITIERA

GOMITIERA FULLFIT®



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®

PRESSORE

- in materiale ad alta densità posizionabile nella zona desiderata, con fascia di tensionamento a strappo

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

INDICAZIONI

- lievi epicondiliti o epitrocleiti
- trattamento conservativo della borsite olecranica
- esito rottura tendine distale del bicipite brachiale
- esito protesi capitello radiale
- esiti stabilizzati di fratture e lussazioni del gomito
- post operatorio nelle artroscopie di gomito

MISURE

Taglie Ø Avambraccio

XS	18–22 cm
S	22–26 cm
M	26–30 cm
L	30–35 cm

Altezza 24,5 cm



5 cm
dal gomito

Codice d'ordine: FFG-300

COSCIALE

**SUPPORTO PER COSCIA
FULLFIT®**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN antibatterico, in grado di mantenere il naturale equilibrio della pelle

INDICAZIONI

- trattamento delle contratture muscolari della coscia
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	40–45 cm
S	45–50 cm
M	50–56 cm
L	56–62 cm
XL	62–68 cm

Altezza anteriore 23 cm

Codice d'ordine: FFC-100



GINOCCHIERA

**GINOCCHIERA TUBOLARE SAGOMATA
FULLFIT®**



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO **MD** coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft tubolare in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica
- dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio antibatterico della pelle

INDICAZIONI

- lievi distorsioni di ginocchio
- idrartro o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–38 cm
S	38–45 cm
M	45–52 cm
L	52–59 cm
XL	59–66 cm
XXL	66–74 cm

Altezza 31,5 cm

Codice d'ordine: FFK-400





DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® anatomica

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

INDICAZIONI


- trattamento delle contratture muscolari del polpaccio
- coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
- esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

MISURE

Taglie Ø Polpaccio

S	32-36 cm
M	36-40 cm
L	40-44 cm
XL	44-48 cm

Altezza 29 cm

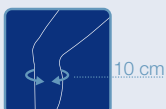

Codice d'ordine: FFP-200



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®

CHIUSURA

- no

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie Ø Caviglia

S	16-20 cm
M	20-24 cm
L	24-28 cm
XL	28-33 cm



Codice d'ordine: FFA-500






LINEA KIDZ



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

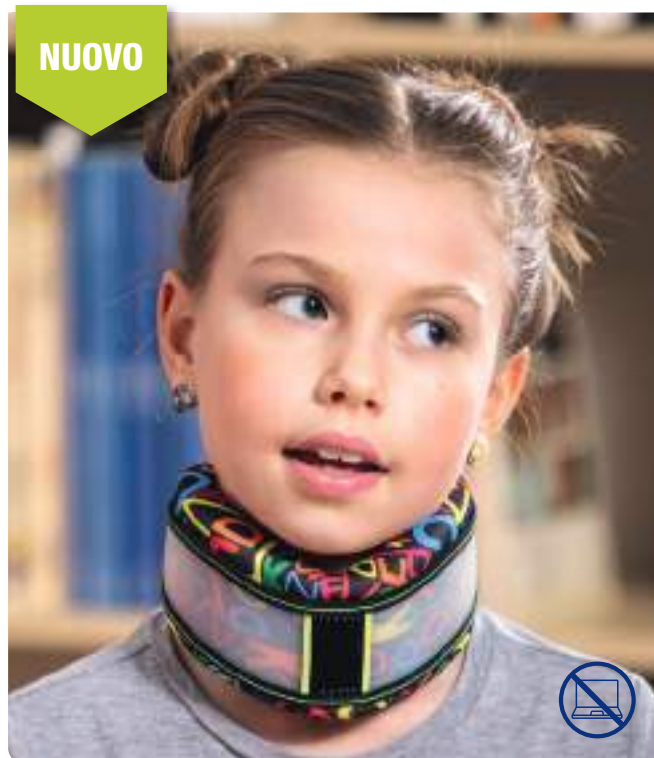

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MDI coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del rachide cervicale.

STRUTTURA

- gommapiuma ad alta densità rivestita con morbido tessuto e dotato di rinforzo in polietilene

MENTONIERA

- assente

FORO TRACHEALE

- assente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- cervicalgia
- traumi distorsivi del rachide cervicale
- cervico brachialgie con o senza vertigini
- coadiuvante nel trattamento del torcicollo miogeno

MISURE

Taglie	Ø Collo	Altezza
TG. 1°	22–28 cm	7 cm
TG. 2°	28–33 cm	8 cm



Codice d'ordine: KIDZ-CLM



STRUTTURA

- Bivalve in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno latex free

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- procedura decompressiva
- gestione della frattura
- mal di testa cervicogenico
- sindrome del disco cervicale
- stabilizzazione post chirurgica
- dolore muscolo-scheletrico
- trauma / colpo di frusta
- distorsioni / stiramenti
- radicolopatia
- tratto colonna interessato: C2-C7

MISURE

Taglie*	Peso	Altezza
PD1	5–13 Kg	53–84 cm
PD2	10–15 kg	74–94 cm
PD3	11–16 kg	84–102 cm
PD4	12–19 kg	89–114 cm
PD5	19–25 kg	94–122 cm

*identificare la taglia sulla base dei due parametri peso e altezza

Codice d'ordine: ASPEN KIDZ



STRUTTURA

- Bivalve in plastica rigida con imbottitura in tessuto accoppiato a celle aperte con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno latex free, asta toracica e dorsale in alluminio

MENTONIERA

- presente

FORO TRACHEALE

- presente

RADIOTRASPARENTE

- sì

CHIUSURA

- a strappo con fibbie

INDICAZIONI

- stabilizzazione post intervento
- instabilità cervico-toracica
- gestione della frattura

MISURE

Taglie*	Peso	Altezza
PD4	12-19 Kg	89-114 cm
PD5	19-25 kg	94-122 cm

Il collare contiene al suo interno il pannello frontale PD4 e PD5

*identificare la taglia sulla base del Collare Aspen Pediatric

Codice d'ordine: ASPEN CTO KIDZ



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile ed estraibile
- rinforzi laterali e mediali in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto con monospugna all'interno
- completamente apribile
- sagomatura anatomica

CHIUSURA

- mediante 3 fasce con chiusura a strappo
- la fascia centrale allungata che segue la circonferenza del polso garantisce una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

MISURE (AMBIDESTRO)

Taglie	Ø Polso
TG.1°	11-13 cm
TG.2°	13-15 cm
TG.3°	oltre 15 cm

Altezza: 17 cm

Codice d'ordine: KIDZ-P04



KIDZ-P06

POLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA PEDIATRICA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile ed estraibile
- rinforzi laterali e mediali in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto con monospugna all'interno
- completamente apribile
- sagomatura anatomica

CHIUSURA

- mediante 4 fasce con chiusura a strappo
- la fascia centrale allungata che segue la circonferenza del polso garantisce una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- esiti fratture legno verde
- esiti distacchi epifisari

MISURE (AMBIDESTRO)

Taglie	Ø Polso	Altezza
TG.1°	11-13 cm	22 cm
TG.2°	13-15 cm	23 cm
TG.3°	oltre 15 cm	24 cm



Codice d'ordine: KIDZ-P06

KIDZ-P06D

POLSIERA STECCATA LUNGA CON IMMOBILIZZAZIONE POLLICE PEDIATRICA



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile ed estraibile
- steccatura laterale con prolungamento sul pollice in alluminio modellabile ed estraibile
- rinforzi contro-laterale in polietilene

STRUTTURA

- morbido tessuto con monospugna all'interno
- completamente apribile
- morbido tessuto ad avvolgenza del pollice
- sagomatura anatomica

CHIUSURA

- mediante 4 fasce con chiusura a strappo
- la fascia centrale allungata che segue la circonferenza del polso garantisce una maggiore stabilità dell'articolazione

INDICAZIONI

- esiti frattura scafoide carpale
- trattamento lesioni di Stener
- fratture combinate di primo dito e polso stabili
- post operatorio del primo raggio
- traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
- esiti fratture legno verde

MISURE (DX-SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
TG.1°	11-13 cm	20,5 cm
TG.2°	13-15 cm	21,5 cm
TG.3°	oltre 15 cm	22,5 cm



Codice d'ordine: KIDZ-P06D



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA

- soft con sacca in morbido tessuto all'esterno e monospugna all'interno
- fascia spalla in morbido tessuto grippante e ritagliabile grazie alla pinzetta removibile
- dotato di imbottitura di protezione collo

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- post trauma spalla e gomito

MISURE (AMBIDESTRO)


Taglie **Lungh. avambraccio**

TG.1° fino a 25 cm

TG.2° 25-30 cm



Codice d'ordine: KIDZ-RGB

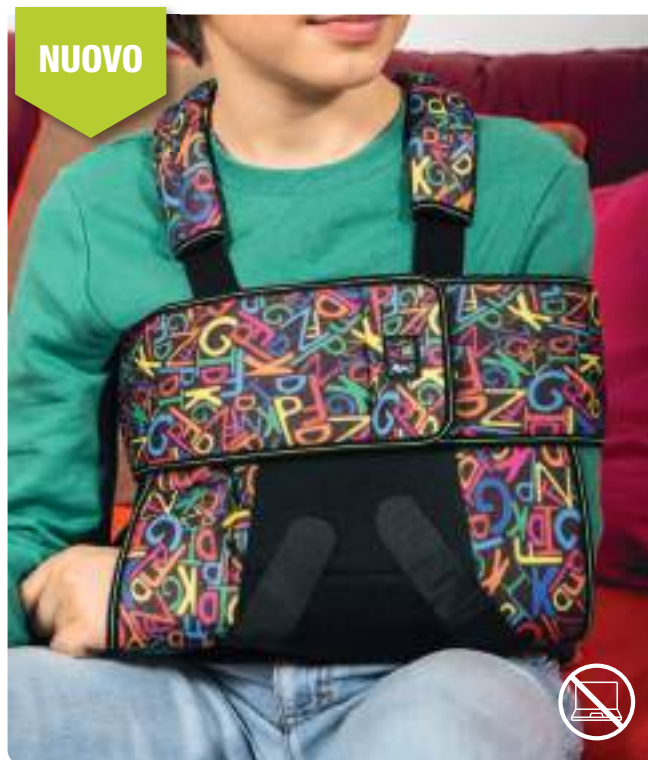

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e morbido tessuto all'esterno con ampia zona grippante
- la sacca lascia libero il gomito
- dotata di fascia di immobilizzazione con ampia zona grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con chiusura a strappo e ritagliabile a misura grazie alla pinzetta removibile
- dotata di doppia imbottitura a protezione del collo

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla
- trattamento distacchi epifisari composti della testa omerale
- fratture composte di clavicola

MISURE (AMBIDESTRO)

Taglie **Lungh. avambraccio**

TG.1° fino a 25 cm

TG.2° 25-30 cm



Codice d'ordine: KIDZ-IMB

KIDZ-RDS

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE
PEDIATRICO

NUOVO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto superiore.

STRUTTURA BASE

- pannello posteriore interscapolare in materiale traspirante a contatto pelle, dotato di imbottitura e pannello di irrigidimento in polietilene all'interno
- cinghiaggio spalla in morbido materiale con monospugna all'interno e parte terminale in materiale a strappo removibile e ritagliabile a misura grazie alle pinzette removibili

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- lussazioni acromion clavari

MISURE

Taglie	Ø Torace
TG.1°	58-70 cm
TG.2°	70-82 cm



Codice d'ordine: KIDZ-RDS

KIDZ-TEK

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON STABILIZZATORE
ROTULEO LINEA PHYLOTEK PEDIATRICA

NUOVO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

INDICAZIONI

- dolore femoro-rotuleo
- lievi tendinopatie del rotuleo
- esiti lussazioni rotulee
- strabismo rotuleo
- iperlassità di rotula
- morbo di Sinding-Larsen-Johansson
- iniziale Osgood-Schlatter

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
TG.S	20-25 cm	18 cm
TG.M	24-29 cm	21 cm
TG.L	28-33 cm	22 cm



Codice d'ordine: KIDZ-TEK



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort, con effetto massaggio
- parte esterna in vellutino grappante per la massima adattabilità

PRESSORE

- cuscinetto in silicone ricoperto in morbido tessuto

CHIUSURA

- a strappo con doppia fibbia
- dotato di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio


INDICAZIONI

- sindrome di Osgood Schlatter

MISURE (AMBIDESTRO)

Taglia unica

Codice d'ordine: KIDZ-TRB

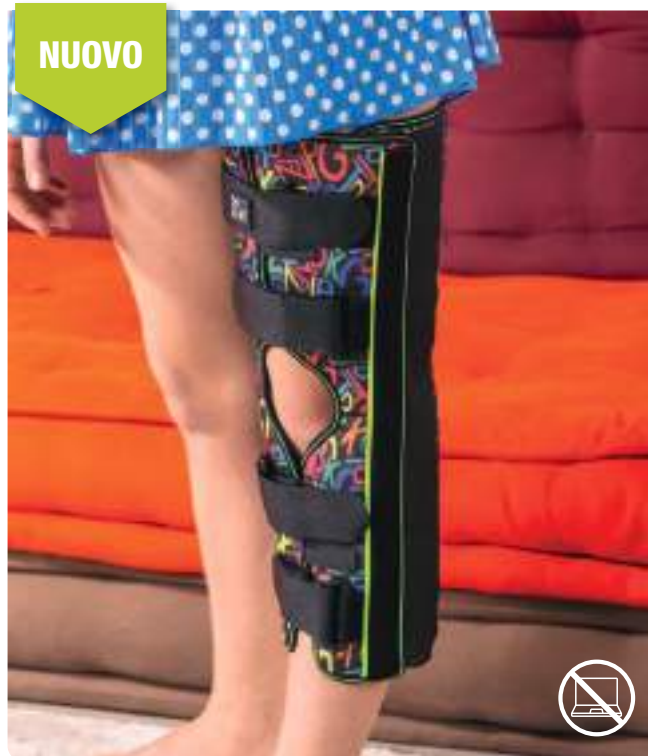

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grappante all'esterno

SNODO/ASTE

- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
Tutte le stecche sono estraibili

CHIUSURA

- mediante 4 fasce con chiusura a strappo

INDICAZIONI

- esiti fratture distacchi epifisari del ginocchio
- traumi distorsivi del ginocchio

MISURE (AMBIDESTRO)

Taglie	Altezza
TG.1°	26 cm
TG.2°	31 cm
TG.3°	40 cm

Codice d'ordine: KIDZ-601

KIDZ-990

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA R.O.M. PEDIATRICA

NUOVO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico con regolazione mediante pin e coperchio di sicurezza con vite montato su aste in alluminio modellabile

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo

INDICAZIONI

- traumi distorsivi medio-gravi del ginocchio
- esiti distacchi epifisari del ginocchio
- esito epifisiodesi
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Blount
- iperlaxità del ginocchio

MISURE (AMBIDESTRO)

Taglie	Altezza
corta	25 cm
lunga	35 cm

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
15°	15°	15°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
60°	60°	60°
	75°	
	90°	
	105°	

Codice d'ordine: KIDZ-990

KIDZ-750

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
FISSO A 0° PEDIATRICO

NUOVO



DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
- suola antiscivolo con conformazione a barca

CHIUSURA

- frontale dell'imbottitura a strappo e 4 fasce di fissaggio

INDICAZIONI

- malattia di Sever
- trattamento delle fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
- esiti di fratture distali di tibia e perone
- immobilizzazione post operatoria
- distorsioni di caviglia di III grado
- trattamento post operatorio dell'artrorisi (piede piatto)


MISURE (AMBIDESTRO)

Taglie	Calzata scarpa	Altezza
TG.M	23-25	20 cm
TG.L	26-28	23,5 cm
TG.XL	29-33	29,5 cm



Codice d'ordine: KIDZ-750

NUOVO

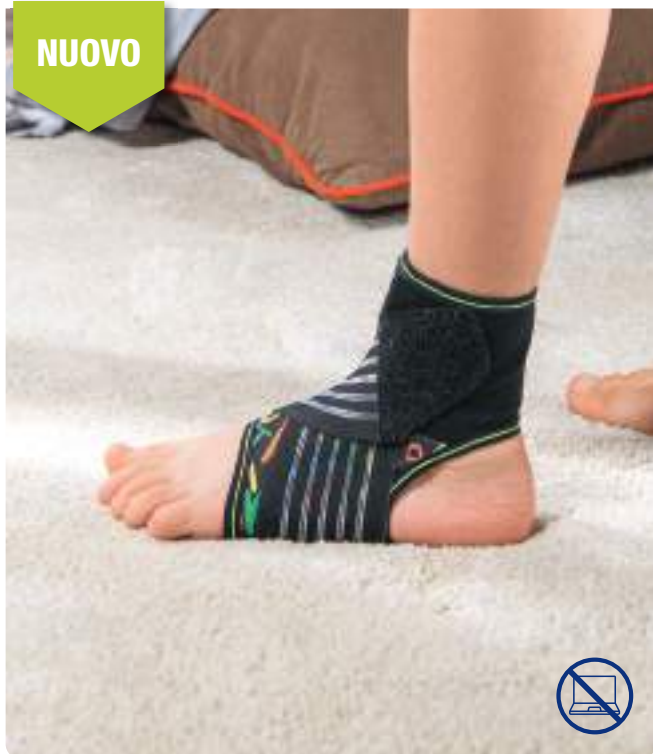

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

- tessuto morbido e sottile per garantire elasticità, leggerezza, traspirabilità e aderenza.
- Con zona superiore grippante

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico

CHIUSURA

- a strappo posizionata posteriormente

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità acute e croniche di caviglia
- recupero dell'attività sportiva
- post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Collo piede
TG.S	20-22 cm
TG.M	23-25 cm



Codice d'ordine: KIDZ-CL8



STRUTTURA

- cuscinetti anatomici in gel di polimero

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- dotata di valve corte in tecnopolimero

CHIUSURA

- mediante cinturini a strappo
- cinturino regolabile sottocalcanare

INDICAZIONI

Il suo utilizzo è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una stabilizzazione della caviglia con limitazione della pronazione e supinazione, ad es.:

- in seguito a lesioni dei legamenti dell'articolazione tibio-tarsica (II e III grado) (trattamento post-traumatico / post-operatorio);
- in seguito a distorsioni della caviglia;
- in caso di instabilità cronica dell'articolazione tibio-tarsica

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza 12 cm

Codice d'ordine: M.STEP KIDZ





LINEA PIEDE



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



PLANTARE PRT-S01

PLANTARE IN SILICONE CON COPERTURA IN TESSUTO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD:
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con fori per aerazione
- con scarico metatarsale e calcaneare
- copertura in tessuto

INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-45

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S01



PLANTARE PRT-S02

PLANTARE IN SILICONE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD:
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- fori per aerazione
- scarico metatarsale e calcaneare

INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36-37
M	38-39
L	40-41
XL	42-43
XXL	44-45

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S02



SOLETTA PRT-S04

MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE
CON SCARICO CALCANEARE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD:
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- mezza soletta

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S04



TALLONIERA PRT-S06

TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD:
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone zigrinato
- scarico ad oliva per la zona calcaneare

INDICAZIONI

- tallonite

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-37
M	38-40
L	41-44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S06

TALLONIERA PRT-S07

TALLONIERA IN SILICONE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

INDICAZIONI

- tallonite

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	30-34
M	35-39
L	40-44
XL	45-47

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S07

CUSCINETTO PRT-S09

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE ANTISCIVOLO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone zigrinato con conformazione anatomica

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali

MISURE (DX/SX)

Taglie

Unica

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S09

CUSCINETTO PRT-S10

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone con distanziatore da posizionare fra le dita per evitare spostamenti all'interno della calzatura

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S10

CUSCINETTO PRT-S11

CUSCINETTO IN SILICONE PER DITA A MARTELLO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone conformato anatomicamente per le dita del piede
- dotato di separatore per evitare la frizione con la calzatura

INDICAZIONI

- dito a martello doloroso

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35-39
II	40-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S11



SEPARATORE PRT-S12

SEPARATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD

coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con ridotto spessore

INDICAZIONI

- deviazione delle dita dei piedi
- sfregamenti interdigitali
- callosità interdigitali

MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S12



DIVARICATORE PRT-S13

DIVARICATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD

coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con conformazione anatomica per il corretto alloggiamento fra le dita

INDICAZIONI

- alluce valgo con secondo dito sovraddotto

MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S13



PROTEZIONE PRT-S20

PROTEZIONE TUBOLARE IN TESSUTO ED INTERNO IN SILICONE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD

coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- in silicone all'interno e tessuto elastico all'esterno
- ritagliabile

INDICAZIONI

- protezione per dito in griffe doloroso
- protezione per calli dolorosi

MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S20



PROTEZIONE PRT-S14

PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD

coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- silicone tubolare con anello di stabilizzazione

INDICAZIONI

- borsite dolorosa della metatarsofalangea dell'alluce

MISURE

Taglie Calzata scarpa

I	35-39
II	40-46

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S14

PRO_HALLUX PRT-S15 N

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	42-44
XL	oltre 44

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S15 N

HALLUX_MED PRT-S16

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tecnopolimero con sistema di fissaggio mediante 2 cinturini a strappo

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S16

PDN-ALV

PROGRAMMA NIGHT & DAY PER ALLUCE VALGO

PROGRAMMA ALLUCE VALGO
NIGHT&DAY
PRO_HALLUX+HALLUX_MED

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- il programma Night & Day è composto dal tutore HALLUX_MED e PRO_HALLUX

FASE DAY

- Prevede l'uso di PRO_HALLUX durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone all'interno e sistema di regolazione laterale a strappo, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio

FASE NIGHT

- Questa fase prevede l'uso di HALLUX_MED durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e anallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie	Calzata scarpa
S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Codice d'ordine: PDN-ALV



 PRO_HALLUX



 HALLUX_MED



FASCIA PRT-S21

FASCIA DI PROTEZIONE METATARSALE

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD:
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- fascia

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto metatarsale in silicone

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

MISURE

Taglie

Unica

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S21



PROTEZIONE PRT-S22

FASCIA DI PROTEZIONE CON CUSCINETTO ANATOMICO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD:
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- fascia

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone con scarico centrale per alluce

INDICAZIONI

- alluce valgo

MISURE

Taglie

Unica

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S22



PROTEZIONE PRT-S23

PROTEZIONE CON SILICONE PER ALLUCE VALGO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD:
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone per alluce

INDICAZIONI

- alluce valgo

MISURE

Taglie

Unica

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S23

UOMO

MEMOSTEP PRT-S50

SOLETTA COMFORT/WORK

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- soletta

STRUTTURA

- copertura in microfibra super assorbente
- imbottitura effetto memory nella zona metatarsale e calcaneare
- parte inferiore in feltro termoformato con carboni attivi per una sensazione di freschezza e di controllo degli odori

IDEALE PER

- scarpe da tutti i giorni
- scarpe da lavoro

MISURE - UOMO

Taglie	Calzata scarpa
S	39-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine:
PRT-S50M uomo

Non è un dispositivo medico.

DONNA

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

MISURE - DONNA

Taglie	Calzata scarpa
S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine:
PRT-S50W donna

Non è un dispositivo medico.

ACTIONSTEP PRT-S51

SOLETTA SPORTIVA

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD
coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

TIPOLOGIA

- soletta

STRUTTURA

- copertura in microfibra assorbente con texture sportiva
- scocca semirigida iniettata nella parte del retro piede
- base realizzata da EVA di diverse densità
- inserto in EVA anti shock a livello del tallone
- parte inferiore con scanalature che garantiscono una maggiore stabilità all'interno della calzatura
- pelota metatarsale termoformata

IDEALE PER

- uso sportivo come corsa, trekking, basket, calcio, ciclismo etc.

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42
XXL	43-44
XXXL	45-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S51

Non è un dispositivo medico.



Circonferenza collo



Circonferenza torace




Circonferenza vita



Circonferenza polso



Circonferenza bacino

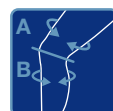

Circonferenza coscia.
A: misurare 15 cm al di sopra
del centro del ginocchio
B: misurare 5 cm al di sotto
del centro del ginocchio



Lunghezza mano.
Misurare dal polso alla punta
del dito medio



Circonferenza seno/vita



Circonferenza coscia.
Misurare 10/15 cm al di sopra
del centro del ginocchio



Misurare dalla mezzeria della linea ide-
ale che congiunge le estremità di ulna
e radio (individuabili alla palpazione)
all'inizio dell'ultima falange del pollice



Circonferenza torace/vita



Circonferenza gamba.
Misurare 10/15 cm al di sotto
del centro del ginocchio



Considerare la distanza tra i centri di
rotazione del polso e del 5° metacarpo



Circonferenza seno



Misura calzata scarpa



Lunghezza avambraccio.
Misurare dal gomito alla base
delle dita



Ampiezza spalle



Circonferenza caviglia



Circonferenza avambraccio.
Misurare 5 cm al di sotto
della punta del gomito




vertebra
C7/T1
L5/S1 ca.
Lunghezza colonna
vertebrale.
Misurare dalla zona
sacrale alla cervicale



Circonferenza collo del piede



Circonferenza avambraccio.
Misurare 5 cm dal gomito
Circonferenza bicipite.
Misurare 15 cm dal gomito

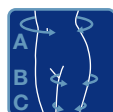


A: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale
C: circonferenza distale



Utilizzabile anche da bambini



Circonferenza bicipite

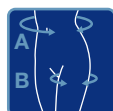

A: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale



La misura si riferisce alla
distanza tra il mento in posizione
neutrale e la parte prossimale
della spalla (richiedere misuratore)

**Vendita esclusiva diretta**

FGP prevede solo il canale distributivo fisico
per la vendita di questo prodotto.

L'eccellenza di FGP passa anche dalla scelta del canale di vendita. Per questo disponiamo che la vendita dei prodotti contrassegnati dal logo avvenga solo attraverso rivenditori selezionati e altamente professionali. Una scelta che tutela la nostra immagine, ma prima di tutto salvaguarda il benessere e la fiducia di chi si affida a noi. L'azienda prevede l'impiego del solo canale distributivo fisico per la vendita di tali prodotti.

L'azienda, in ragione dei continui studi che effettua al fine di migliorare l'efficacia dei prodotti offerti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso i dati ed i dettagli tecnici relativi ai propri articoli.

[illegible]

[illegible]



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016