

PHYLOTEK

Generato
dalla ricerca FGP
creato per nuove
performance.



L'evoluzione tecnologica della filosofia del benessere FGP.

Il top della **competenza tecnologica**,
il top delle **conoscenze medico-scientifiche**,
il top nella **progettazione e realizzazione dei prodotti**: sommando questi elementi FGP ha dato vita, oltre un decennio fa, al progetto Phylo, una nuova filosofia del benessere per una linea di ginocchiere innovative.

L'evoluzione di quella filosofia porta oggi FGP a presentare il **nuovo concetto PhyloEtek**: un'unica gamma che unisce gli elementi di eccellenza di Phylo e Phylotek e attraverso nuovi studi su materiali e tecnologie - condotti nei centri di ricerca FGP - porta a una nuova generazione di prodotti ulteriormente avanzati nel controllo della stabilità così come nella vestibilità, leggerezza e traspirabilità. 11 modelli ripensati per rispondere a qualsiasi esigenza riabilitativa del ginocchio, risultato di un processo di innovazione che non si ferma mai.

NUOVO
PHYLOEtek

Uno sviluppo concentrato su **tre elementi chiave**.

1 Linea di tutori 100% Made in FGP, realizzati con tessuti ben tollerati dalla pelle per la loro morbidezza e traspirabilità.

2 L'esclusiva tecnologia costruttiva WholeGarment che a partire da un unico filo porta a un comfort senza limiti e "senza cuciture".

3 Snodi evoluti e ad alta precisione, caratterizzati da un ingombro e un peso ridotto per esaltare la leggerezza complessiva della ginocchiera.



**Leggerezza, comfort,
design ergonomico:
un perfetto intreccio
di benefici.**

100%
MADE IN FGP

Una tecnologia alla base di



ELEVATA ELASTICITÀ, FRUTTO DELLA COSTANTE RICERCA FGP.

Una componente importante dell'evoluzione di PhyloEtek ha riguardato lo studio della struttura del filo e della tramatura per arrivare a realizzare un prodotto con prestazioni di elasticità superiori.

tessile all'avanguardia un comfort attivo.



STRUTTURA A NIDO D'APE: ANCHE LA PELLE RESPIRA.

Questa particolare lavorazione, caratterizzata da aree convesse profonde, è garanzia di traspirabilità e di un miglior scambio termico, fondamentale nel caso di un uso intensivo e/o prolungato nel tempo.

LO SPESSORE SI RIDUCE, AUMENTA L'UTILIZZABILITÀ DEL TUTORE.

La realizzazione di un tessuto a maglia piatta, riduce notevolmente gli spessori e rende le ginocchiere PhyloEtek utilizzabili in numerose situazioni grazie a una maggior leggerezza e a una miglior compliance del paziente.

Innovazione: il filo conduttore PhyloEtek.

Il know-how FGP ha permesso di **eliminare le cuciture** in favore di tecniche di confezionamento innovative come la termosaldatura, la saldatura ad alta frequenza che garantiscono **un'elasticità continua e quindi un comfort elevato.**



La ricerca più avanzata alla base delle performance PhyloEtek.

FILO CON PROPRIETÀ BATTERIOSTATICHE PERMANENTI.

Q-SKIN by Fulgar® è una fibra con ioni d'argento, inseriti durante il processo di filatura, che permettono di **regolare la proliferazione batterica** con un'efficacia duratura nel tempo.

TECNOLOGIA WHOLEGARMENT: QUALITÀ TUTTA D'UN PEZZO.

La base delle nuove ginocchiere PhyloEtek è interamente realizzata tramite i nostri telai, in **un unico pezzo**.

La tecnologia **WholeGarment** permette di **eliminare alla base ogni cucitura** evitando quindi possibili zone di sfregamento o zone di cedimento elastico che potrebbero limitare nel tempo le performance del tutore.

IL TRATTAMENTO SMART TEMP CHE RENDE ATTIVI I TESSUTI.

Smart Temp è un trattamento di **termoregolazione intelligente** che consente ai tessuti di reagire in maniera dinamica alle variazioni di temperatura, attivando un processo di raffreddamento per evaporazione che aumenta di velocità in rapporto all'aumento della temperatura.



100% MADE IN FGP.

Tutti i tutori sono **prodotti all'interno dei nostri stabilimenti** seguendo i più alti standard qualitativi.

A man with a beard and short dark hair is running on a grassy path. He is wearing a black long-sleeved athletic shirt with grey geometric patterns on the chest and dark grey shorts. On his right knee, he is wearing a dark blue knee brace with white straps and a circular cutout over the patella. He is also wearing black socks and black running shoes with green accents. The background is a blurred green landscape.

Pensato per adattarsi ad ogni esigenza di comfort

Grazie alla combinazione tra spessore ridotto e caratteristiche elastiche, le ginocchiere PhyloEtek si **adattano facilmente alle differenti conformazioni anatomiche**, garantendo stabilità e vestibilità durante l'uso.

La filosofia del comfort PhyloEtek cresce nella qualità e funzionalità, ma anche nell'insieme delle soluzioni offerte con **una linea completa che risponde a ogni necessità**, dalla più semplice alla più complessa.

**Una linea completa
per le diverse
problematiche
del ginocchio.**



**Nuovo design:
nuovo colore blu
e dettagli a contrasto.**



**Aste modellabili in
alluminio di derivazione
aeronautica, per
una conformazione
più precisa.**

**Nuovi snodi:
un punto di svolta
per una regolazione
di precisione.**

**Regolazione
del R.O.M.
(Range Of Motion)**
in flessione-estensione,
in ogni contesto,
senza l'ausilio
di alcun attrezzo.

**Snodi con geometrie
rivisitate per una
maggiore stabilità
in tutte le condizioni
di utilizzo.**



Le novità PhyloEtek: per filo e per segno.



VERSIONI CHIUSE

Presentano uno stabilizzatore rotuleo a mezzaluna ricoperto in morbido tessuto con aggancio a strap.



VERSIONI APERTE ANTERIORMENTE

La presenza di un bordo in poliuretano e di un rinforzo interno sulle patelle migliora la presa e facilita l'apertura e la chiusura per tutti i pazienti.



GRIP SILICONICO

Nella parte interna superiore di tutti i modelli sono presenti degli inserti grip a base siliconica per aumentarne la stabilità.



FASCE DI CHIUSURA SAGOMATE E TERMINALE A PINZETTA

La conformazione delle fasce migliora vestibilità e aderenza della ginocchiera, mentre il terminale a pinzetta permette di ritagliare la fascia alla dimensione necessaria: la numerazione presente sul terminale facilita la chiusura anche al paziente meno esperto.



FORO ROTULEO

Grazie all'elasticità della struttura di base, lo scarico rotuleo si adatta alle diverse conformazioni anatomiche.



ZONA POPLITEA: LA TRAMATURA DIFFERENZIATA CHE FA LA DIFFERENZA

Nella zona del popliteo, grazie a una diversa tramatura, si è ottenuto uno spessore ancora più ridotto che evita l'accumulo di tessuto in una zona molto delicata.



VERSIONE PHYLOETEK 40

Presenta una tasca interna, realizzata in macchina e non cucita, per alloggiare lo stabilizzatore rotuleo ad anello in silicone.

PHYLOETEK 20

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON FORO ROTULEO



CODICE D'ORDINE: PY-TK20

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

Nessuno

CHIUSURA

Nessuna

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lievi distorsioni di ginocchio
- idrarto o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	25 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	



PHYLOETEK 40

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON STABILIZZATORE ROTULEO AD ANELLO IN SILICONE



CODICE D'ORDINE: PY-TK40

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

In silicone ad anello

CHIUSURA

Nessuna

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

NOTE

Tasca per stabilizzatore realizzata direttamente dal telaio

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	25 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	



PHYLOETEK 41

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON STABILIZZATORE ROTULEO A MEZZALUNA



CODICE D'ORDINE: PY-TK41

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

Nessuna

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	34 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	



PHYLOETEK 60

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON STECCHE A SPIRALE



CODICE D'ORDINE: PY-TK60

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatia femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica


MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	34 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	



PHYLOETEK 61

GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA CON STECCHE A SPIRALE

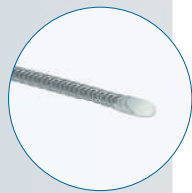

CODICE D'ORDINE: PY-TK61

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

Nessuno

CHIUSURA


Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI

- lieve instabilità post traumatica
- esito distorsione ginocchio
- esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
- gonartrosi lieve

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	34 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	

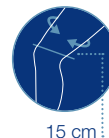

15 cm

PHYLOETEK STABIMED® PRO

GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO POLICENTRICO



CODICE D'ORDINE: PY-TKST PRO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

STABILIZZATORE ROTULEO

A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA


Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- traumi della rotula
- lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	34 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	

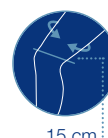

15 cm

PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN

GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



Oskin®
BY FULGAR®
HEIO
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

CODICE D'ORDINE: PY-TKST PRO OP

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

STABILIZZATORE ROTULEO

Nessuno

CHIUSURA

Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	34 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	



PHYLOETEK STABIMED®

GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



Oskin®
BY FULGAR®
HEIO
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

CODICE D'ORDINE: PY-TKSTAB

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

Nessuno

CHIUSURA

Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI


- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	34 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (flex free)	

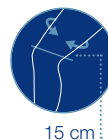

PHYLOETEK STABIMED® CLOSE

GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



Oskin®
BY FULGAR®
HEIO
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

CODICE D'ORDINE: PY-TKSTAB CL

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI

- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- esiti distorsione ginocchio
- instabilità post traumatica
- traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	34 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (flex free)	



15 cm

PHYLOETEK COLLAMED®

GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA APERTA
CON SNODO PHYSIOGLIDE®



Oskin®
BY FULGAR®
HEIO
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

CODICE D'ORDINE: PY-TKCO

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Policentrico Physioglide® lungo con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

Nessuno

CHIUSURA

Mediante quattro fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente

INDICAZIONI

- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	40 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (flex free)	



15 cm



CODICE D'ORDINE: PY-TKCO CL

DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO MD coadiuvante nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell'arto inferiore.

STRUTTURA

Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

Policentrico Physioglide® lungo con regolazione rapida mediante stop, coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO

A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

Mediante quattro fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente

INDICAZIONI


- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
- trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
- trattamento distorsioni di ginocchio
- gonartrosi lieve e moderata
- trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
- lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
- instabilità post traumatica
- traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
- lussazione rotulea cronica e non
- iperpressione rotulea grave

MISURE

Taglie	Ø Coscia	Altezza
XS	34-40 cm	40 cm
S	40-46 cm	
M	46-52 cm	
L	52-58 cm	
XL	58-65 cm	
XXL	65-72 cm	

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
-5°	0°	0°
0°	10°	10°
10°	20°	20°
20°	30°	30°
30°	45°	
	60°	
	75°	
	90°	
	140° (flex free)	

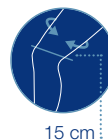




FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



Scarica l'App
FGPOrteSystem®

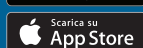

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016