

CATALOGO GENERALE

RACHIDE CERVICALE
TRONCO
POLSO-MANO
AVAMBRACCIO-SPALLA
GINOCCHIO
CAVIGLIA

2
18



**NELLE NOSTRE MANI,
L'INNOVAZIONE
PRENDE FORMA.**



FGP

Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment



IL TOCCO ARTIGIANALE DÀ VALORE ALLA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.

Crediamo nell'uomo, nelle sue capacità di intuire, sviluppare, evolvere proposte per migliorare la qualità della vita attraverso l'innovazione.

Crediamo nelle persone, nella loro capacità di confrontarsi e dialogare formando una rete di relazioni per capire i bisogni e proporre le soluzioni più adeguate. Crediamo nella sensibilità e nella cura manuale, insostituibili strumenti che incontrano e modellano l'innovazione.

In FGP, crediamo in una tecnologia all'avanguardia, valorizzata dal tocco artigianale, perché ogni nostro tutore ortopedico e riabilitativo sia il massimo della performance, del comfort, dell'innovazione.

Crediamo in tutto questo da **30 anni**, e il 2018 è un'occasione imperdibile per festeggiare insieme a tutti voi.




NOI DI FGP: PROFESSIONISTI, SPECIALISTI, PERSONE.

In qualunque ruolo, per qualsiasi mansione, ognuno di noi è un valore prezioso per portare avanti ogni giorno il nostro impegno: creare un benessere per tutti, in ogni occasione. La professionalità e la specializzazione ricoprono ogni reparto: dal commerciale, alla ricerca e sviluppo, fino alla produzione. Qui ci affidiamo all'occhio, alla mano, alla sensibilità dell'uomo per raggiungere ciò che la sola tecnologia non può oggi raggiungere: un'eccellenza sempre al top con prodotti modulati e rifiniti con sapienza artigianale. E in tutti i reparti ci consideriamo persone: rispettiamo la personalità di ognuno perché ognuno di noi costituisce la nostra identità aziendale.

RICERCA E SVILUPPO: I GRANDI MOTORI DELLA NOSTRA INNOVAZIONE.

Abbiamo voluto che ricerca e sviluppo fossero performanti, per trovare materiali più innovativi e soluzioni tecniche e tecnologiche più all'avanguardia. Li abbiamo voluti sempre in movimento, per anticipare il futuro ed essere sempre più avanti. E come ogni motore, li abbiamo voluti soprattutto interni, perché rispecchiassero i valori e l'impegno di FGP, e per agevolare il flusso di informazioni all'azienda. Dalla nostra ricerca e sviluppo nascono le soluzioni più evolute per raggiungere esperienze di benessere attraverso comfort e performance.

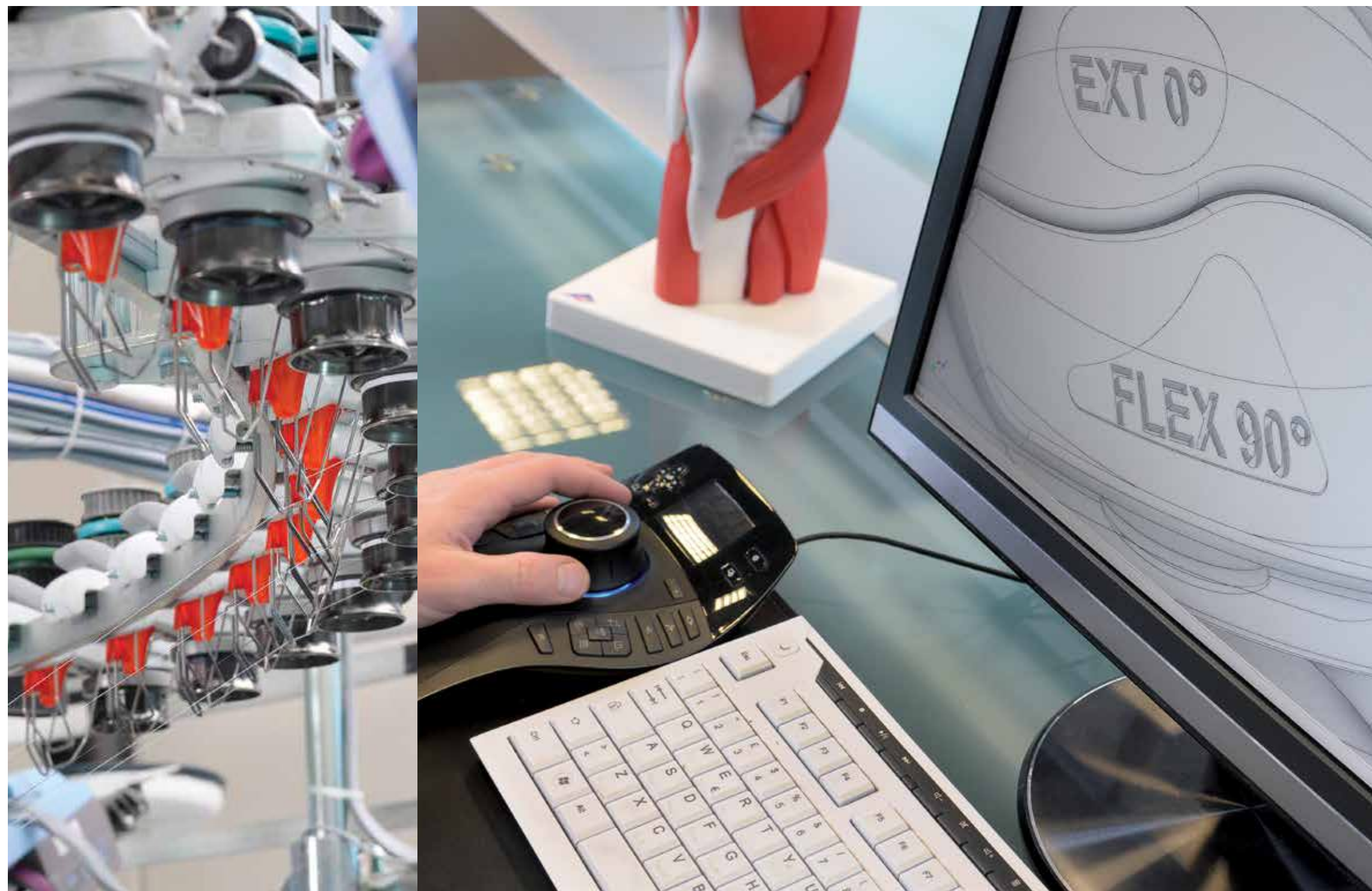

★ PERSONALIZZAZIONE.

Possibilità di memorizzare i prodotti o i settori che sono di maggior interesse.

👤 PROFILO.

Il sistema adatta automaticamente i filtri di ricerca alle professionalità e alle specializzazioni inserite al momento dell'iscrizione.

🏠 AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE.

Un catalogo sempre a portata di mano, dove trovare tutti i prodotti e le ultime novità del mondo FGP.

🔍 VELOCITÀ E PRECISIONE NELLA RICERCA.

Il sistema intelligente di filtri, facile da usare grazie alla grafica intuitiva, guida alla soluzione più adeguata in pochi passaggi.

ORTESYSTEM®: LA RISPOSTA INNOVATIVA PER ACCEDERE A OGNI RISPOSTA.

In qualsiasi luogo, in ogni momento, OrteSystem® è la nuova soluzione che accompagna medici e tecnici ortopedici nella loro professionalità. La nuova app permette di accedere al mondo FGP per trovare più rapidamente e facilmente risposte sempre adeguate a ogni casistica. Un sistema di filtri intuitivo, diviso per categorie, guida il professionista fino all'ortesi ritenuta più efficace.

Con OrteSystem®, l'innovazione diventa un supporto indispensabile per essere sempre connessi con le esigenze del paziente, grazie a un sistema di ricerca facile, veloce, personalizzabile.



CON LE SUE TRAME FGP FIRMA STORIE QUOTIDIANE DI BENESSERE.

L'innovazione di FGP parte da lontano: dallo studio interno del tessuto e la ricerca di materiali all'avanguardia, per far vivere un'esperienza di benessere completa attraverso soluzioni performanti e confortevoli. Un'innovazione che ha un fine, anzi un lieto fine: rispettare la libertà di movimento e migliorare giorno dopo giorno la qualità della vita.



TESSUTO FULLFIT®: PERFORMANCE, BENESSERE, COMFORT OVUNQUE.

FullFit® è l'innovativo tessuto double-layer che unisce efficacia e comodità in un'unica soluzione dedicata a chi vive sport e gesti quotidiani come momenti di benessere.

La struttura esterna liscia garantisce maggior durata, mentre l'azione compressiva protegge i fasci muscolari e ne agevola l'attività. La struttura interna morbida e a nido d'ape offre una piacevole sensazione al tatto e permette di veicolare il sudore all'esterno, mantenendo il calore corporeo e garantendo traspirabilità.

Le proprietà antibatteriche rispettano il naturale equilibrio della pelle mentre elasticità e leggerezza rendono il tessuto adattabile ad ogni anatomia.




PHYLO®



TESSUTO PHYLO®: IL COMFORT ATTIVO

Il tessuto Phylo® è un'esclusiva innovazione brevettata made in FGP, studiato per offrire il massimo del comfort. Phylo® segue differenti tecnologie di lavorazione e di trattamento per realizzare diversi modelli di tutori, il tutto all'interno di FGP, a ulteriore garanzia di qualità.


Le inedite trame tridimensionali con intreccio a molla sono studiate per svolgere un efficace massaggio favorendo il passaggio d'aria. I fili di nuova generazione sono più elastici e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a effetto memoria mantiene inalterate nel tempo traspirabilità e morbidezza.

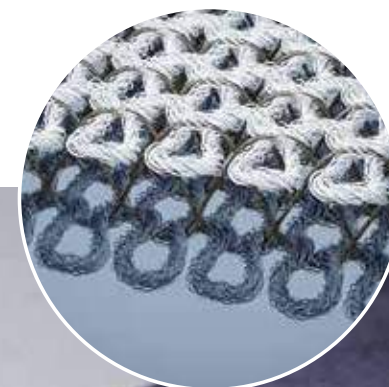

HEIQ
FRESH TECH
DURABLE ODOR CONTROL

TRATTAMENTO FRESH TECH BY HeiQ LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL'ARGENTO


Grazie al trattamento antibatterico Fresh Tech, Phylo® offre una prolungata ed efficace azione anti-odore. Le naturali proprietà della molecola d'argento svolgono un'efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale anche nell'uso continuativo.

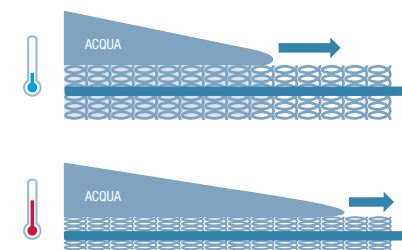

HEIQ
SMART TEMP
INTELLIGENT THERMOREGULATION

TERMOREGOLAZIONE SMART TEMP BY HeiQ IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO

Grazie al trattamento Smart Temp il tessuto Phylo® reagisce dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre, per "climatizzare" la pelle. L'esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolando a temperatura. Il tessuto Phylo® offre una vera barriera protettiva naturale.

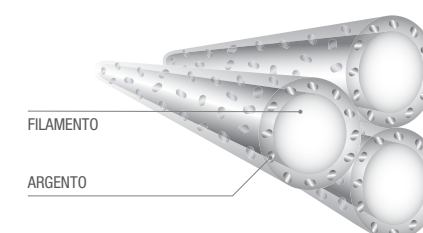

PHYLOTEK®
TECHNOLOGY.



LINEA PHYLOTEK® COMFORT, DESIGN, INNOVAZIONE AL TOP.

Phylotek® è l'esclusiva **tecnologia brevettata da FGP** che permette di realizzare ogni ginocchiera direttamente con i nostri macchinari, in un **unico pezzo, senza cuciture** e con spessore differenziato sul cavo popliteo.

Una **grande innovazione** in termini di vestibilità che rende ogni ginocchiera in grado di contenere, adattarsi alle conformazioni anatomiche e massaggiare esattamente dove serve.

Ogni zona della trama agisce con compressione, controllo e precisione differenziati, mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

RACHIDE CERVICALE

CLC-100	22
CLM-200	22
CLL-300	23
CLL-400	23
CLL-380	24
CLL-901	24
CLL-700	25
MCD-100	25

TRONCO

I-35 TOP	28
F35 POWER	29
F35-100	29
F35-100TR	30
G35-100	30
ACCESSORI PER IPERESTENSORI	31
SPINOMED® IV	32
SPINOMED® ACTIVE	32
DORSOSILVER	33
LOMBOSILVER	33
LOMBOCOP RELAX	34
LOMBOCOP	34
LOMBOFIXÒ® 4.0	35
LOMBOFIXÒ® 33-4.0	35
DORSOFIXÒ® 4.0	36
LOMBOFIXÒ®	37
DORSOFIXÒ®	37
IN-CROSS	38
IN-CROSS 33	38
PLURIVAL	39
GLAM	39
PRO ACTION	40
2 SKIN®	40
FLEXÒ	41
CRM 950	41
CRL 300	42
CRL 350	42
LUMBAMED BASIC	43
LUMBAMED PLUS	43
LUMBAMED PLUS E+ MOTION	44
THERMO PAD	44
LUMBAMED DISC	45
LUMBAMED SACRO	45
P+ FORCE	47
P+ TECH	48
P+ EFFECT	49
P+ PERFECT ZIP	50
P+ YOUNG UP	51
P+ DORSOLLIEVO	52
P+ PANTS	53

ARTO SUPERIORE

POLSO-MANO

STAX	56
FILAMED® 101 / FILAMED® 111	56
SCAPHOMED®	57
FINGER CAP	57
PDN-SCA	58
RHIZOMED® SOFT	58
PFO-100	59

D.T3-01	60
PHYLO® 12	60
DTX-04 MANUMED®	61
DTX-05 MANUMED® T	61
D.T3-02	62
D.T3-03	62
DTX-07 MANUMED®	63
DTX-08 MANUMED® MAX	63
PHYLO® 13	64
DTX-06 MANUMED® LONG	64
PLE-101 MANUMED® DISK	65
PLE-201 THUMBLOCK®	65
CTP-101 SUR.FING®	66

AVAMBRACCIO-SPALLA

PHYLO® FSP	66
EPIBRACE® PRO	67
D.T3-FSP	67
EPICOMED®	68
EPICOMED® E+ EMOTION	68
RGB-150	69
RGB-100	69
IMB-200 NEW	70
IMB-300	70
IMB-350G	71
IMB-400	71
IMB-600 S	72
IMB-700N	72
KIT SPALLA POST-OP	73
IMB-700	73
IMB-750N	74
IMB-750	74
IMB 800	75
SHOULDER ACTION	75
OMOMED®	76
RDS-100	76
RDS-200 CLAVIO®	77
HFB	77
ACROFIX	78
EPICO-REVO	78
EPICO-REVO PS	79
REVO KIT	79

ARTO INFERIORE

ANCA-GINOCCHIO

IMA-110 HipOne®	82
IMA-110 BR HipOne®	82
IMA-103	83
IMA-150	83
IMA-109	84
STABIMED PHYLOTEK®	86
STABIMED PRO PHYLOTEK®	86
COLLAMED PHYLOTEK®	87
PHYLO® 20	88
PHYLO® 40	88
PHYLO® 41	89
PHYLO® 60	89
PHYLO® 61	90
PHYLO® 72	90
PHYLO® 72 A	91
PHYLO® 74	91

PHYLO® 75	92
PHYLO® 76	92
PHYLO® 76 A	93
PHYLO® 90 PT-CONTROL	93
PHYLO® 90 A PT-CONTROL	94
D.T3-TTP	94
PHYLO® TTP	95
M 601	96
GENUMEDI®	96
GENUMEDI® E+ EMOTION	97
GENUMEDI® PRO	97
GENUMEDI® PSS	98
GENUMEDI® PT	98
FILAMED® 201	99
FILAMED® 301	99
FILAMED® 401	100
FILAMED® 451	100
FILAMED® 501	101
FILAMED® 601	101
FILAMED® 701	102
FILAMED® 701 AR	102
FILAMED® 701 WRAP	103
FILAMED® 801	103
FILAMED® 851	104
GNT-600	104
GNT-601	105
GN-3PAN	105
PTS	106
GNO-970 LEGGY®	106
GNO-970 LEGGY® ECO	107
GNO-970 LEGGY® COOL	107
GNO-970 LEGGY® ECO COOL	108
GNO-970 LEGGY® PLUS	108
GNO-970 LEGGY® PLUS ECO	109
GNO-960	109
FLEX-PRO	110
GNO-930	110
M.4®s PCL DYNAMIC	111
M.4®s COMFORT	111
M.4®s COMFORT SHORT	112
M.4®s X LOCK	112
PROTECT 4 EVO	113
PROTECT 4 SHORT	113
M.4®s OA	114
M.4®s OA SHORT	114
PROTECT 4 OA	115
M.3®s	115
LIGHT OA	116
SOFT OA	116
M.4®s OA COMFORT	117
M.4® ANTIRECURVATUM	117
ACCESSORI PER ORTESI DEL GINOCCHIO	118

CAVIGLIA

CVO-700 BOOTY®/CVO-710 BOOTY® SHORT	120
CVO-700 ECO/CVO-700 P ECO	120
CVO-750 BOOTY®/CVO-720 BOOTY® SHORT	121
CVO 750 ECO DELUX	121
M.STEP®	122
DUALSHELL II	122
CVO-601	123
FILAMED® 901	123

D.T3-CVT	124
8LIGHT	124
CVO-800 ANKLE STABIL	126
CVO-400	126
LEVAMED® 508	127
LEVAMED® E+ MOTION	127
LEVAMED® ACTIVE	128
ACHIMED® 511	128
M 501	129
CVO-730 KIT	130

RIABILITAZIONE/VARIO

SWI-BAS	130
SWI-TWO	131
SWI-PRO	131

LINEA FULLFIT®

GOMITIERA FullFit®	133
COSCIALE FullFit®	134
GINOCCHIERA FullFit®	134
POLPACCERA FullFit®	135
CAVIGLIERA FullFit®	135

LINEA KIDZ


CLC-100K	138
DTX-03K	138
DTX-04K	139
RGB-100K	139
IMB-200K	140
RDS-100K	140
EPICO-REVOK	141
IMA-KIDZ	141
TEK-40	142
TTP-100K	142
GNT-601K	143
GNO-990	143
CVO-750K	144
M.STEP® KIDZ	144

LINEA PIEDE

PLANTARE PRT-S01	148
PLANTARE PRT-S02	148
SOLETTA PRT-S04	148
TALLONIERA PRT-S06	148
TALLONIERA PRT-S07	149
CUSCINETTO PRT-S09	149
CUSCINETTO PRT-S10	149
CUSCINETTO PRT-S11	149
SEPARATORE PRT-S12	150
DIVARICATORE PRT-S13	150
PROTEZIONE PRT-S20	150
PROTEZIONE PRT-S14	150
PRO_HALLUX PRT-S15 N	151
HALLUX_MED PRT-S16	151
PDN-ALV	151
FASCIA PRT-S21	152
PROTEZIONE PRT-S22	152
PROTEZIONE PRT-S23	152
MEMOSTEP PRT-S50	153
ACTIONSTEP PRT-S51	153

GUIDA ALLE MISURAZIONI	154
------------------------	-----

LINEA SILVERFIXO®	
DORSOSILVER	33
LOMBOSILVER	33
LINEA POSTURALE	
P+ FORCE	47
P+ TECH	48
P+ EFFECT	49
P+ PERFECT ZIP	50
P+ YOUNG UP	51
P+ DORSOLLIEVO	52
P+ PANTS	53
LINEA D.T3	
D.T3-01	60
D.T3-02	62
D.T3-03	62
D.T3-FSP	67
D.T3-TTP	94
D.T3-CVT	124
LINEA PHYLO®	
PHYLO® 12	60
PHYLO® 13	64
PHYLO® FSP	66
STABIMED PHYLOTEK®	86
STABIMED PRO PHYLOTEK®	86
COLLAMED PHYLOTEK®	87
PHYLO® 20	88
PHYLO® 40	88
PHYLO® 41	89
PHYLO® 60	89
PHYLO® 61	90
PHYLO® 72	90
PHYLO® 72 A	91
PHYLO® 74	91
PHYLO® 75	92
PHYLO® 76	92
PHYLO® 76 A	93
PHYLO® 90 PT-CONTROL	93
PHYLO® 90 A PT-CONTROL	94
PHYLO® TTP	95
LINEA TESSUTO ELASTICO	
EPICOMED®	68
EPICOMED® E+ EMOTION	68
M 601	96
GENUMEDI®	96
GENUMEDI® E+ EMOTION	97
GENUMEDI® PRO	97
GENUMEDI® PSS	98
GENUMEDI® PT	98
LEVAMED® 508	127
LEVAMED® E+ MOTION	127
LEVAMED® ACTIVE	128
ACHIMED® 511	128
M 501	129
LINEA FILAMED®	
FILAMED® 101 / FILAMED® 111	56
FILAMED® 201	99
FILAMED® 301	99
FILAMED® 401	100
FILAMED® 451	100
FILAMED® 501	101
FILAMED® 601	101
FILAMED® 701	102
FILAMED® 701 AR	102
FILAMED® 701 WRAP	103
FILAMED® 801	103
FILAMED® 851	104
FILAMED® 901	123
LINEA FULLFIT®	
GOMITIERA FullFit®	133
COSCIALE FullFit®	134
GINOCCHIERA FullFit®	134
POLPACCERA FullFit®	135
CAVIGLIERA FullFit®	135
LINEA PROTECT	
PLANTARE PRT-S01	148
PLANTARE PRT-S02	148
SOLETTA PRT-S04	148
TALLONIERA PRT-S06	148
TALLONIERA PRT-S07	149
CUSCINETTO PRT-S09	149
CUSCINETTO PRT-S10	149
CUSCINETTO PRT-S11	149
SEPARATORE PRT-S12	150
DIVARICATORE PRT-S13	150
PROTEZIONE PRT-S20	150
PROTEZIONE PRT-S14	150
PRO_HALLUX PRT-S15 N	151
HALLUX_MED PRT-S16	151
PDN-ALV	151
FASCIA PRT-S21	152
PROTEZIONE PRT-S22	152
PROTEZIONE PRT-S23	152
MEMOSTEP PRT-S50	153
ACTIONSTEP PRT-S51	153
LINEA KIDZ	
CLC-100K	138
DTX-03K	138
DTX-04K	139
RGB-100K	139
IMB-200K	140
RDS-100K	140
EPICO-REVOK	141
IMA-KIDZ	141
TEK-40	142
TTP-100K	142
GNT-601K	143
GNO-990	143
CVO-750K	144
M.STEP® KIDZ	144

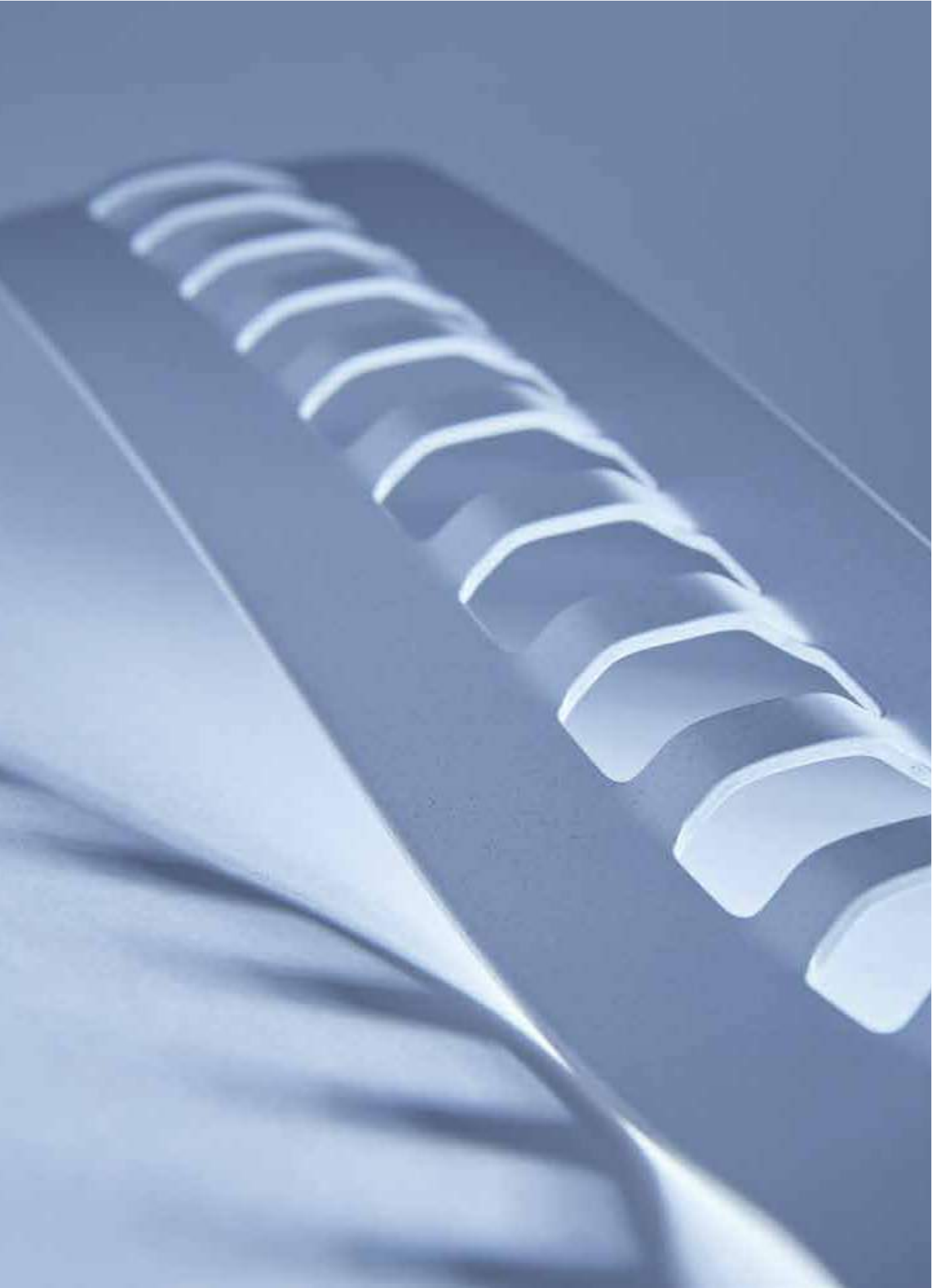

RACHIDE CERVICALE

CLC-100

COLLARE CERVICALE MORBIDO



-
- STRUTTURA**

 - gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone

MENTONIERA

 - assente

FORO TRACHEALE

 - assente

RADIOTRASPARENTE

 - sì

CHIUSURA

 - a strappo

NOTE

 - dotato di maglina di ricambio
-

- INDICAZIONI**
- cervicalgia
 - traumi distorsivi del rachide cervicale
 - cervico brachialgie con o senza vertigini

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32–38 cm
M	38–44 cm
L	44–50 cm

Altezze 6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm

Codice d'ordine: CLC-100

CLM-200

COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO



-
- STRUTTURA**

 - gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in cotone e rinforzo in polietilene

MENTONIERA

 - assente

FORO TRACHEALE

 - assente

RADIOTRASPARENTE

 - sì

CHIUSURA

 - a strappo

NOTE

 - dotato di maglina di ricambio
-

- INDICAZIONI**
- cervicalgia
 - traumi distorsivi del rachide cervicale
 - cervicalgia in quadro artrosico
 - cervico brachialgie con o senza vertigini

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34–39 cm
M	38–44 cm
L	42–48 cm

Altezza 10 cm

Codice d'ordine: CLM-200

CLL-300

COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ



-
- STRUTTURA**

 - polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

 - assente

FORO TRACHEALE

 - assente

RADIOTRASPARENTE

 - sì

CHIUSURA

 - a strappo
-

- INDICAZIONI**
- cervicalgia
 - discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
 - esiti dolorosi di fratture cervicali
 - torcicollo miogeno
 - traumi distorsivi del rachide cervicale

MISURE

Taglie	Ø Collo
XS	29–35 cm
S	34–39 cm
M	38–44 cm
L	42–48 cm
XL	47–55 cm

Altezza regolabile con sistema a strappo

Codice d'ordine: CLL-300

CLL-400

COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ
CON MENTONIERA



-
- STRUTTURA**

 - polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle

MENTONIERA

 - presente

FORO TRACHEALE

 - assente

RADIOTRASPARENTE

 - sì

CHIUSURA

 - a strappo
-

- INDICAZIONI**
- cervicalgia
 - discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
 - esiti dolorosi di fratture cervicali
 - traumi distorsivi del rachide cervicale
 - piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
 - dolore cervicale in artrite reumatoide iniziale
 - dolore cervicale in artrosi

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	34–39 cm
M	38–44 cm
L	42–48 cm
XL	47–55 cm

Altezza regolabile con sistema a strappo

Codice d'ordine: CLL-400

CLL-380

COLLARE CERVICALE RIGIDO SCHANZ
CON REGOLAZIONE IN METALLO



- STRUTTURA**
- polietilene forato con imbottitura in gommapiuma rivestita in similpelle
- MENTONIERA**
- assente
- FORO TRACHEALE**
- assente
- RADIOTRASPARENTE**
- sì (ad eccezioni delle parti in metallo)
- CHIUSURA**
- a strappo

- INDICAZIONI**
- cervicalgia
 - discopatie in quadro artrosico e/o post acute con o senza ernie discali
 - esiti dolorosi di fratture cervicali
 - traumi distorsivi del rachide cervicale

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	32–38 cm
M	38–44 cm
L	44–50 cm

Altezza regolabile con piastre in metallo

Codice d’ordine: CLL-380

CLL-901

COLLARE CERVICALE BIVALVE PHILADELPHIA



- STRUTTURA**
- bivalve in plastazote con placche rigide di rinforzo anteriore e posteriore
- MENTONIERA**
- presente
- FORO TRACHEALE**
- presente
- RADIOTRASPARENTE**
- sì
- CHIUSURA**
- a strappo
- NOTE**
- predisposizione per collegamento ad iperestensore modello F35, F35 POWER, I35 TOP

- INDICAZIONI**
- cervicalgia severa secondaria ad artrosi
 - artrite reumatoide
 - spondilite anchilosante
 - esiti di fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate)
 - esiti interventi chirurgici al rachide cervicale
 - trattamento continuativo in patologie croniche non operabili (neoplastiche e non)
 - piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
 - artrosi cervicale

MISURE

Taglie	Ø Collo
S	30–35 cm
M	35–40 cm
L	40–45 cm

Altezza	CLL-901/2 1/4	5 cm
	CLL-901/3 1/4	7,5 cm
	CLL-901/4 1/4	10 cm
	CLL-901/5 1/4	12 cm

Codice d’ordine: CLL-901

CLL-700

COLLARE CERVICALE BIVALVE MALIBÙ



- STRUTTURA**
- bivalve realizzata in polietilene espanso sostenuto da placche rigide in Kydex
- MENTONIERA**
- presente
- FORO TRACHEALE**
- presente
- RADIOTRASPARENTE**
- sì (ad eccezioni delle parti in metallo)
- CHIUSURA**
- con fibbie

- INDICAZIONI**
- cervicalgia severa secondaria ad artrosi
 - forme neoplastiche cervicali (primitive o secondarie)
 - fratture vertebre cervicali stabili (singole o combinate) amieliche o mieliche in acuto
 - esiti post chirurgici e non di fratture cervicali
 - post operatorio di stabilizzazione cervicali
 - instabilità cervicale per artrite reumatoide
 - piccoli distacchi ossei dei processi spinosi cervicali
 - artrosi cervicale

MISURE

Universale

Altezza regolabile con viti

Codice d’ordine: CLL-700

MCD-100

COLLARE CERVICALE BIVALVE MINERVA



- STRUTTURA**
- bivalve cervico-dorsale realizzata in polietilene espanso sostenuto da placche rigide in Kydex
- MENTONIERA**
- presente
- FORO TRACHEALE**
- presente
- RADIOTRASPARENTE**
- sì
- CHIUSURA**
- a strappo
- NOTE**
- modellabile a caldo

- INDICAZIONI**
- forme neoplastiche delle vertebre cervicali e delle prime dorsali (primitive o secondarie)
 - fratture delle vertebre cervicali e delle prime dorsali stabili (singole o combinate)
 - post chirurgia del tratto cervico-dorsale
 - instabilità croniche cervico-dorsali e/o non operabili (neoplastiche e non)

MISURE

Taglie	Ø Torace	Altezza
S	70–85 cm	40 cm
M	85–105 cm	45 cm
L	105–125 cm	50 cm

Codice d’ordine: MCD-100

T R O N C O



FGP Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

I-35 TOP

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE TELESOPICO



Sistema di regolazione telescopica

- BANDA PELVICA
- basculante
- SPINTA STERNALE
- fissa dotata di pelota snodabile di ridotte dimensioni
- STRUTTURA
- scatolata in alluminio ed imbottiture antiscivolo spessorate grippanti
 - regolazione telescopica dell'altezza e della larghezza
- PELOTA DORSALE
- agganciata mediante cintura a strappo
 - realizzata con imbottitura in materiale accoppiato con scarico vertebrale e ulteriori sistema di stecche in alluminio modellabile
 - disponibile in 3 taglie
- NOTE
- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia



Pelota sternale

- INDICAZIONI
- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
 - post operatorio regione lombare
 - fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
 - trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
 - instabilità dorso-lombare non operabile
 - tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	45–60 cm
S	60–80 cm
M	80–110 cm
L	110–130 cm

Altezza I35T-100 standard
I35T-090 short

Codici d'ordine: I35T-100; I35T-090

F35 POWER

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE CON BANDA PELVICA REGOLABILE



Pelota sternale elastica basculante

- BANDA PELVICA
- basculante con possibilità di blocco nel punto di massima estensione (30°)
- SPINTA STERNALE
- fissa dotata di pelota snodabile imbottita e rivestita in tessuto Sensitive® Fabric
- STRUTTURA
- in alluminio con regolazione telescopica dell'altezza
 - imbottiture rivestite in tessuto Sensitive® Fabric a contatto con le pelle, con imbottiture laterali fissate mediante viti in tecnopolimero
- PELOTA DORSALE
- agganciata mediante cintura a strappo
 - realizzata in tessuto Sensitive® Fabric con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
 - posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente
- NOTE
- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

- INDICAZIONI
- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
 - post operatorio regione lombare
 - fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
 - trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
 - instabilità dorso-lombare non operabile
 - tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza F35P-100 standard
F35P-090 short

Codici d'ordine: F35P-100; F35P-090

F35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI BASCULANTE



Pelota sternale elastica basculante

- BANDA PELVICA
- basculante
- SPINTA STERNALE
- fissa dotata di pelota in similpelle snodabile imbottita
- STRUTTURA
- in alluminio
 - imbottiture in similpelle e materiale espanso
- PELOTA DORSALE
- agganciata mediante cintura a strappo
 - realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
 - orientabile sia orizzontalmente che verticalmente
- NOTE
- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

- INDICAZIONI
- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
 - post operatorio regione lombare
 - fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
 - trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
 - instabilità dorso-lombare non operabile
 - tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza F35-100, F35-100T standard
F35-090, F35-090T short

Disponibile in versione light: F35-100T; F35-090T

Codici d'ordine: F35-100; F35-090

F35-100TR

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE CON REGOLAZIONE STERNALE



BANDA PELVICA

- basculante
- SPINTA STERNALE**
- regolabile dotata di pelota pneumatica snodabile di dimensioni ridotte

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso
- possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE

- predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza F35-100TR standard
F35-090TR bassa

Codici d'ordine: F35-100TR; F35-090TR

G35-100

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI FISSO



BANDA PELVICA

- fissa
- SPINTA STERNALE**
- fissa dotata di pelota in similpelle imbottita

STRUTTURA

- in alluminio
- imbottiture in similpelle e materiale espanso

PELOTA DORSALE

- agganciata mediante cintura a strappo
- realizzata in similpelle
- orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in osteoporosi
- post operatorio regione lombare
- fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
- trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
- instabilità dorso-lombare non operabile
- tratto colonna interessato: D10-L3

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–75 cm
M	76–90 cm
L	91–105 cm
XL	106–115 cm

Altezza G35-100 standard
G35-090 bassa

Codici d'ordine: G35-100; G35-090

ACCESSORI PER IPERESTENSORI

PELOTE STERNALI



- A. PELOTA STERNALE CLASSICA**
Posizionabile su **G35-100**
MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)
- B. ART. 42 PELOTA STERNALE ELASTICA**
Struttura in alluminio elastica con effetto a molla
Posizionabile su **G35-100**
MISURE: taglia unica
- C. ART. 41 PELOTA STERNALE ELASTICA PNEUMATICA**
Struttura in alluminio elastica con effetto a molla e imbottitura pneumatica. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)
MISURE: taglia unica
- D. ART. 43 PELOTA STERNALE**
Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)
MISURE: taglia unica
- E. ART. 45 PELOTA STERNALE**
Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)
MISURE: taglia unica
- F. ART. 44 PELOTA STERNALE**
Struttura in alluminio con effetto elastico e basculante. A richiesta posizionabile su tutti tranne G35-100 (il prezzo potrebbe cambiare)
MISURE: taglia unica

PELOTE DORSALI



- G. CF2-N CUSCINO LOMBOSACRALE**
Cuscino lombosacrale anatomico con asta in alluminio modellabile
MISURE: piccola (S-M); grande (L-XL)
- H. PELOTA DORSALE CLASSICA**
Posizionabile su **G35-100**
MISURE: piccola (S); media (M-L); grande (XL)
- I. ART. 44 PELOTA DORSALE**
Con imbottitura e scarichi vertebrali
Posizionabile su **F35P-100, F35-100, F35-100TR** e **G35-100**
MISURE: piccola (S); grande (M-L-XL)
COLORE: bianco o grigio (per F35P-100)
- L. PELOTE DORSALI**
Posizionabile su **I-35 TOP**
MISURE: piccola (XS)
media (S-M-L per I-35 TOP SHORT e S-M per I-35 TOP)
grande (L)

CHIUSURE



- M. CHIUSURA B. FAST**
Codice d'ordine: SP-TBF
In colore bianco o grigio
- N. CHIUSURA PGS**
Codice d'ordine: SP-TPGS
In colore bianco o grigio

SPINOMED® IV

TUTORE PER OSTEOPOROSI



STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in una tasca in morbido tessuto di vellutino accoppiato
- TIRANTI**
- 2 tiranti personalizzabili che si agganciano alle fibbie presenti sulla patella anteriore
 - il tirante ascellare è dotato di morbida imbottitura e stecca-guida per facilitare l'indosso e della spinta posteriore regolabile anti-assuefazione
 - ampio tirante lombare
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo
- NOTE**
- si indossa come uno zainetto

INDICAZIONI

- cedimenti somatici (traumatici e non)
- dorsalgie e lombalgie in quadro di artrosi
- morbo di Scheuermann (cifosi idiopatica giovanile)
- ipercifosi non strutturate con dolore cronico
- trattamento conservativo e non di neoplasie del tratto dorsale e lombare (singole o multiple)
- cedimenti su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D1-L5

MISURE


Taglie	H Tronco	Altezza
XS	fino a 43 cm	40 cm
S	44-49 cm	42 cm
M	50-55 cm	47 cm
L	56-61 cm	52 cm
XL	61-67 cm	56 cm

vertebra C7/T1
L5/S1 ca.

Codice d'ordine: M720

SPINOMED® ACTIVE

TUTORE PER OSTEOPOROSI

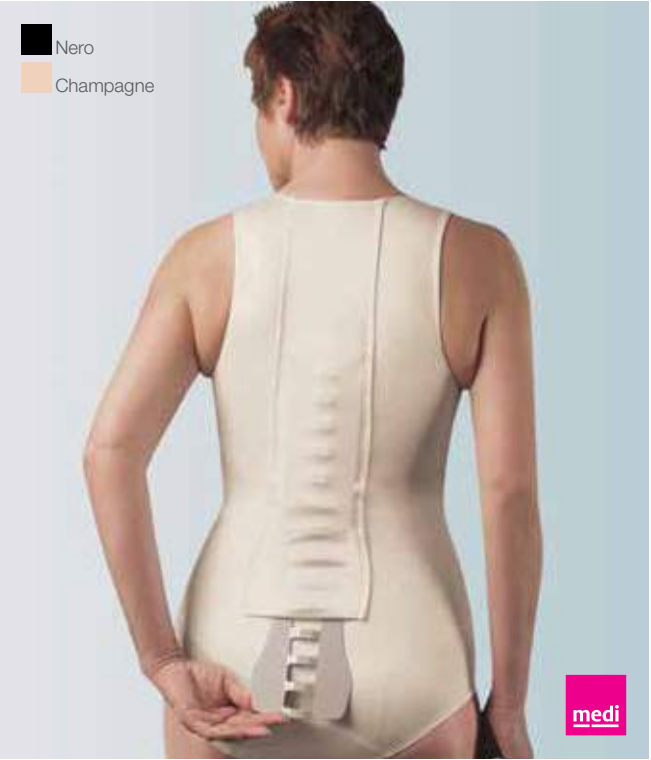

STRUTTURA

- barra posteriore brevettata in alluminio modellabile contenuta in un modellatore in materiale elastico realizzato su misura
- TIRANTI**
- nessuno
- CHIUSURA ANTERIORE**
- con cerniera
- NOTE**
- discreto sotto gli abiti e personalizzato

INDICAZIONI

- esiti dolorosi di cedimenti somatici (traumatici e non)
- dorsalgie e lombalgie in quadro di artrosi
- ipercifosi non strutturate con dolore cronico
- tratto colonna interessato: D1-L5

MISURE

Prodotto personalizzato
Richiedere la scheda per la corretta presa misure

Altezza su misura

Codice d'ordine: M700

DORSOSILVER

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI



STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive® Fabric altamente traspirante e sottile
 - tramatura interna in filo d'argento
 - sagomatura anatomica per un maggiore comfort
- TIRANTI**
- 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
 - sistema Double X con incrocio posteriore e spallacci imbottiti sagomati per un migliore comfort
- STECCATURA**
- 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 54 cm

Codice d'ordine: DSIL-100

LOMBOSILVER

CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO



STRUTTURA

- tessuto elastico Sensitive® Fabric altamente traspirante e sottile
 - tramatura interna in filo d'argento
 - sagomatura anatomica per un maggior comfort
- TIRANTI**
- 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo e antiarricciamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	70-80 cm
S	80-90 cm
M	90-100 cm
L	100-110 cm
XL	110-120 cm
XXL	120-130 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LSIL-100

LOMBOCOP RELAX

CORSETTO ELASTICO CON FILO DI RAME E DOPPIA PATELLA ANTERIORE



STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica e traspirante accoppiata a tessuto con tramatura in filo di rame a contatto con la pelle

TIRANTI

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- doppia patella di chiusura a strappo in grado di modulare l'altezza anteriore del corsetto

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LCOP-200

LOMBOCOP

CORSETTO ELASTICO CON FILO DI RAME



STRUTTURA

- tessuto in lycra elastica e traspirante accoppiata a tessuto con tramatura in filo di rame a contatto con la pelle

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, solamente le 2 stecche centrali sono removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 33 cm

Codice d'ordine: LCOP-100

LOMBOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO STOFFA E STECCHE



STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76–86 cm	71–81 cm
S	86–96 cm	81–91 cm
M	96–106 cm	91–101 cm
L	106–116 cm	101–111 cm
XL	116–126 cm	111–121 cm
XXL	126–136 cm	121–131 cm

Altezza LFU-600 36 cm
LFD-610 38 cm

Codici d'ordine: LFU-600 uomo; LFD-610 donna

LOMBOFIXÒ® 33-4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO STOFFA E STECCHE



STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente

TIRANTI

- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo e antiarricciamento

NOTE

- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76–86 cm	71–81 cm
S	86–96 cm	81–91 cm
M	96–106 cm	91–101 cm
L	106–116 cm	101–111 cm
XL	116–126 cm	111–121 cm
XXL	126–136 cm	121–131 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: LFU-500 uomo; LFD-510 donna

DORSOFIXÒ® 4.0

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI



STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante, conformato anatomicamente
- TIRANTI**
- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci sagomati e imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione della spinta che si agganciano anteriormente in un tirante
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo e antiarriciamento
- NOTE**
- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo
- dotato di appositi fermatiranti per facilitare il posizionamento



Patella anteriore

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-700 uomo; DFD-710 donna

LOMBOFIXÒ®

CORSETTO SEMIRIGIDO STOFFA E STECCHE



STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante
- TIRANTI**
- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- NOTE**
- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza LFU-100 36 cm
LFD-110 38 cm

Codici d'ordine: LFU-100 uomo; LFD-110 donna

DORSOFIXÒ®

CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI



STRUTTURA

- tessuto in cotone elastico altamente traspirante
- TIRANTI**
- cinque fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti
- spallacci imbottiti dotati di sistema modulare di regolazione che si agganciano anteriormente in un tirante
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con maniglia per paziente artrosico
- NOTE**
- in dotazione vengono fornite 4 stecche aggiuntive di rinforzo

INDICAZIONI

- dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
- esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
- dorso curvo
- post operatorio interventi discectomia
- esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
- cedimenti somatici su base osteoporotica
- tratto colonna interessato: D4-S1

MISURE BACINO

Taglie	Ø Donna	Ø Uomo
XS	76-86 cm	71-81 cm
S	86-96 cm	81-91 cm
M	96-106 cm	91-101 cm
L	106-116 cm	101-111 cm
XL	116-126 cm	111-121 cm
XXL	126-136 cm	121-131 cm

Altezza 55 cm

Codici d'ordine: DFU-200 uomo; DFD-210 donna

IN-CROSS

CORSETTO ELASTICO



STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- tre fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento
- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- artrosi lombare
- traumi lievi rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm

Altezza 28 cm

Codici d'ordine: INC-100 nero; INC-101 écru

IN-CROSS 33

CORSETTO ELASTICO



STRUTTURA

- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI

- quattro fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in due tiranti

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, morbida

NOTE

- dotato di fermatiranti a strappo per facilitare il posizionamento
- predisposto per PAD-100

INDICAZIONI

- lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
- esiti fratture e cedimenti somatici lombari
- spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
- post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
- lombocruralgia
- post decompressione posteriore
- artrosi vertebrale sintomatica lombare
- tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
XS	70–80 cm
S	80–90 cm
M	90–100 cm
L	100–110 cm
XL	110–120 cm
XXL	120–130 cm

Altezza 33 cm

Codici d'ordine: INC-200 nero; INC-201 écru

PLURIVAL

CORSETTO ELASTICO TRAFORATO



STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard

TIRANTI

- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta e sagomata

NOTE

- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PLU-100

GLAM

CORSETTO ELASTICO MODA



STRUTTURA

- tessuto semirigido traforato jaquard, sagomata anatomicamente

TIRANTI

- nessuno

STECCATURA

- 4 stecche posteriori in acciaio presagomate, non removibili

CHIUSURA ANTERIORE

- a strappo, con patella ridotta

NOTE

- particolarmente adatto alla silhouette femminile

INDICAZIONI

- lombalgia
- lombosciatalgia
- discartrosi
- discopatie
- post operatorio di ernia discale
- contratture muscolari lombari
- traumi lievi del rachide lombare
- tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Vita
XS	60–70 cm
S	70–80 cm
M	80–90 cm
L	90–100 cm
XL	100–110 cm
XXL	110–120 cm

Altezza 25 cm

Codici d'ordine: GLA-100 nero/nero; GLA-200 nero/skin

PRO ACTION

CORSETTO SEMIRIGIDO



- STRUTTURA**
- tessuto semirigido con particolare trama areata altamente traspirante
- TIRANTI**
- due fasce anelastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano creando un effetto a carrucola e si agganciano anteriormente in un unico tirante
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in polietilene flessibile non removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con pelota addominale in polietilene rigida removibile
- NOTE**
- particolarmente adatto nella prevenzione e nelle attività quotidiane

- INDICAZIONI**
- lombalgia
 - lombosciatalgia
 - discartrosi
 - discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - traumi lievi del rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	68–85 cm
M	80–100 cm
L	95–120 cm
XL	115–135 cm

Altezza 20 cm

Codice d'ordine: PRT-T1

2 SKIN®

CORSETTO ELASTICO DOUBLE SKIN CON TIRANTI REMOVIBILI



- STRUTTURA**
- tessuto in lycra elastica traspirante e antibatterico accoppiato con membrana idrofilica, realizzato senza cuciture
- TIRANTI**
- due fasce elastiche saldate alla pelota posteriore totalmente removibile si agganciano anteriormente in un unico tirante
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo
- NOTE**
- la patella anteriore è dotata di maniglia interna per facilitare la chiusura, il tirante removibile permette di modulare il tutore in base al percorso terapeutico del paziente

- INDICAZIONI**
- lombalgia
 - lombosciatalgia
 - discartrosi
 - discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - traumi lievi del rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	65–79 cm
M	80–94 cm
L	95–109 cm
XL	110–124 cm
XXL	125–140 cm

Altezza 2S-200, 2S-201 27 cm
2S-250, 2S-251 24 cm

Codici d'ordine:
2S-200 skin; 2S-250 skin; 2S-201 grigio; 2S-251 grigio

FLEXÒ

CORSETTO SEMIRIGIDO MILLERIGHE



- STRUTTURA**
- tessuto elastico millerighe semirigido con sistema di trazione lombare a diamante
- TIRANTI**
- nessuno
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo

- INDICAZIONI**
- lombalgia
 - lombosciatalgia
 - discartrosi
 - discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - traumi lievi del rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–74 cm
M	75–89 cm
L	90–104 cm
XL	105–119 cm
XXL	120–135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-900

CRM 950

CORSETTO SEMIRIGIDO MILLERIGHE CON TIRANTI



- STRUTTURA**
- tessuto elastico millerighe semirigido traspirante
- TIRANTI**
- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo
- NOTE**
- predisposto per PAD-100

- INDICAZIONI**
- lombalgia
 - lombosciatalgia
 - discartrosi
 - discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - artrosi lombare
 - traumi lievi rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	60–74 cm
M	75–89 cm
L	90–104 cm
XL	105–119 cm
XXL	120–135 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: CRM-950

CRL 300

CORSETTO ELASTICO IN LYCRA



- STRUTTURA**
- tessuto elastico in lycra
- TIRANTI**
- nessuno
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo
- NOTE**
- incrocio posteriore coadiuvante nell’efficacia della distrazione vertebrale

- INDICAZIONI**
- lombalgia e lombosciatalgia
 - discartrosi
 - discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - artrosi lombare
 - traumi lievi rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE		
Taglie	Ø Bacino	
S	70–85 cm	
M	80–95 cm	
L	90–105 cm	
XL	100–115 cm	
XXL	oltre 116 cm	
Altezza 27 cm		
Codici d’ordine: CRL-300 nero; CRL-301 écru		

CRL 350

CORSETTO ELASTICO IN LYCRA CON TIRANTI



- STRUTTURA**
- tessuto in lycra
- TIRANTI**
- due fasce elastiche che dalla steccatura posteriore si incrociano e si agganciano anteriormente in un unico tirante
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio automodellante non removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo
- NOTE**
- predisposto per PAD-100

- INDICAZIONI**
- lombalgia e lombosciatalgia
 - discartrosi
 - discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - artrosi lombare
 - traumi lievi rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE		
Taglie	Ø Bacino	
S	70–85 cm	
M	80–95 cm	
L	90–105 cm	
XL	100–115 cm	
XXL	oltre 116 cm	
Altezza 27 cm		
Codici d’ordine: CRL-350 nero; CRL-351 écru		

LUMBAMED® BASIC

CORSETTO LOMBARE CON STECCHE DI STABILIZZAZIONE



- STRUTTURA**
- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all’interno con fibre di eucalipto
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- TIRANTI**
- nessuno
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio da modellare e removibili
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con maniglia per paziente artrosico
 - bordo superiore e inferiore della patella pieghevole
- NOTE**
- predisposto per PAD-100

- INDICAZIONI**
- lombalgia e lombosciatalgia
 - discartrosi
 - discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - artrosi lombare
 - traumi lievi rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE			
Taglie	Ø Bacino Donna 663	Ø Vita Uomo 664	
I	76–86 cm	66–76 cm	
II	87–98 cm	77–88 cm	
III	99–111 cm	89–101 cm	
IV	112–125 cm	102–115 cm	
V	126–140 cm	116–130 cm	
Altezza M.663 27 cm M.664 26 cm			
Codici d’ordine: M.663 donna; M.664 uomo			

LUMBAMED® PLUS

CORSETTO LOMBARE CON PELOTA MASSAGGIANTE



- STRUTTURA**
- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all’interno con fibre di eucalipto
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - pelota posteriore in silicone con superficie massaggiante in 3D dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile
- TIRANTI**
- nessuno
- STECCATURA**
- 2 stecche posteriori a spirale
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con maniglia per paziente artrosico
 - bordo superiore e inferiore della patella pieghevole
- NOTE**
- predisposto per PAD-100

- INDICAZIONI**
- lombalgia e lombosciatalgia
 - discartrosi; discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari
 - artrosi lombare; stati infiammatori dell’articolazione illo-sacrale
 - traumi lievi rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE			
Taglie	Ø Bacino Donna 669	Ø Vita Uomo 666	
I	76–86 cm	66–76 cm	
II	87–98 cm	77–88 cm	
III	99–111 cm	89–101 cm	
IV	112–125 cm	102–115 cm	
V	126–140 cm	116–130 cm	
Altezza M.669 24 cm M.666 23 cm			
Codici d’ordine: M.669 donna; M.666 uomo			

LUMBAMED® E+ MOTION

CORSETTO LOMBARE
CON PELOTA MASSAGGIANTE EMOTION



- STRUTTURA**
- materiale latex-free, traspirante ed elastico con fibre di lana Merinos
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - pelota posteriore di silicone integrato con fibre di quarzo per un'azione massaggiante dotata di copertura in morbido tessuto traspirante, removibile
- TIRANTI**
- nessuno
- STECCATURA**
- 2 stecche a spirale posteriori
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con maniglia per paziente artrosico
 - bordo superiore e inferiore della patella pieghevole
- NOTE**
- predisposto per PAD-100

- INDICAZIONI**
- lombalgia e lombosciatalgia
 - discartrosi e discopatie
 - post operatorio di ernia discale
 - contratture muscolari lombari e artrosi lombare
 - stati infiammatori dell'articolazione illo-sacrale
 - traumi lievi rachide lombare
 - tratto colonna interessato: L1-S1

MISURE			Donna
Taglie	Ø Bacino	Ø Vita	
I	76-86 cm	66-76 cm	
II	87-98 cm	77-88 cm	
III	99-111 cm	89-101 cm	
IV	112-125 cm	102-115 cm	
V	126-140 cm	116-130 cm	
Altezza 24 cm			Uomo
Codici d'ordine: M.670E			

THERMO PAD



- CARATTERISTICHE**
- sfrutta gli effetti benefici del calore alleviando il dolore in modo immediato e specifico agendo esclusivamente sulla parte interessata
- COME AGISCE**
- si attiva piegando la placchetta all'interno
 - dopo 30 secondi raggiunge la temperatura di 50°/55° e la mantiene per 20 minuti, raffreddandosi gradualmente
 - si applica nell'apposita protezione in tessuto e si posiziona all'interno del corsetto
- APPLICABILE SU**
- LUMBAMED® BASIC
 - LUMBAMED® PLUS
 - CRL 350-351
 - CRM 950
 - INC 200-201
 - INC 100-101

- INDICAZIONI**
- Tensione muscolare
 - Dolori muscolari, ossei cronici o da trauma
 - Lombosciatalgie acute
 - Artrite reumatoide

		Codice d'ordine: PAD-100
--	--	--------------------------

LUMBAMED® DISC

CORSETTO IN MATERIALE BIELASTICO
CON SISTEMA A PONTE CON FUNZIONE
DI MOBILIZZAZIONE PROGRESSIVA



- STRUTTURA**
- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- TIRANTI**
- 2 fasce elastiche agganciate al sistema a ponte che si fissano anteriormente in un unico tirante
- STECCATURA**
- 4 stecche posteriori in acciaio armonico da modellare
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con maniglia per paziente artrosico
 - bordo superiore e inferiore della patella pieghevole
- NOTE**
- sistema modulare per incrementare la mobilità

- INDICAZIONI**
- lombalgia; lombosciatalgia; discartrosi; discopatie; post operatorio di ernia discale; contratture muscolari lombari; artrosi lombare; stati irritativi piccole articolazioni; spondilolisi; spondilolistesi (grado 1 di Meyerding); traumi lievi del rachide lombare; tratto colonna interessato: D12-S1

MISURE			Donna
Taglie	Ø Bacino Donna 667	Ø Vita Uomo 668	
I	76-86 cm	66-76 cm	
II	87-98 cm	77-88 cm	
III	99-111 cm	89-101 cm	
IV	112-125 cm	102-115 cm	
V	126-140 cm	116-130 cm	
Altezza M.667 35 cm M.668 37 cm			Uomo
Codici d'ordine: M.667 donna; M.668 uomo			

LUMBAMED® SACRO

CORSETTO PER L'ARTICOLAZIONE
SACRO-ILIACA



- STRUTTURA**
- materiale latex-free, traspirante, elastico e morbido all'interno con fibre di eucalipto
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - design modulabile
 - 2 cuscinetti massaggianti posteriori riposizionabili e removibili
- TIRANTI**
- 2 fasce elastiche per garantire migliore elasticità e aderenza
- STECCATURA**
- nessuna
- CHIUSURA ANTERIORE**
- a strappo con maniglia

- INDICAZIONI**
- patologia sacro-iliaca (syndrome SIJ); artrite e instabilità dell'articolazione sacro-iliaca; mialgie e tendinopatie della regione pelvica; instabilità della cintura pelvica; problematiche strutturali dopo spondilolistesi del tratto lombare della colonna (LWS); blocco ricorrente dell'articolazione sacro-iliaca; miotendinopatie ricorrenti (retto dell'addome, piriforme); diastasi e allentamento della sinfisi pubica

MISURE		Donna
Taglie	Ø Bacino	
I	70-85 cm	
II	85-100 cm	
III	100-115 cm	
IV	115-130 cm	
V	130-145 cm	
		Uomo
		Codici d'ordine: K.280



STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric associato a fasce di tensionamento toraco-dorsali in materiale anelastico
- rete traspirante nella zona sottoascellare
- rifinita con silicone sul bordo inferiore e strisce a livello scapolare

CHIUSURA

- con zip

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari



MISURE DONNA

Tg.	Ø Seno	Ø Vita
XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



MISURE UOMO

Tg.	Ø Torace	Ø Vita
S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, scegliere sempre la tg. più grande.

Codici d'ordine:

colore nero - PXT-SHIRT W donna; PXT-SHIRT M uomo / colore bianco - PXT-SHIRT B W donna; PXT-SHIRT B M uomo



STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia del “capo integrale” ovvero una assenza totale di cuciture per un comfort e vestibilità ottimali; il filato usato “Nilit Breeze” garantisce la sensazione di freschezza sulla pelle
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- zona pettorale e sottoascellare a rete



INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
XS	80–88 cm
S	88–96 cm
M	96–104 cm
L	104–112 cm
XL	112–122 cm



Codici d’ordine: PPS-TECH B bianca; PPS-TECH N nera



STRUTTURA

- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
- filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
- trattamento antibatterico e traspirante
- particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
- struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
- tramatura a rete nella zona sottoascellare
- scollatura per un maggior comfort



INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
- coadiuvante nella correzione di vizi posturali

MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80–95 cm
2°	95–110 cm
3°	110–125 cm



Codici d’ordine: PPS-EFFECT B bianca; PPS-EFFECT N nera

P+ PERFECT ZIP

MAGLIA POSTURALE



- STRUTTURA**
- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
 - filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
 - trattamento antibatterico e traspirante
 - particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
 - struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
 - tramatura a rete nella zona sottoascellare
 - scollatura per un maggior comfort

- INDICAZIONI**
- dorso curvo non strutturato
 - patologie spalla con compenso scapolare
 - cervicobrachialgie
 - ipotonotrofia della muscolatura del tronco
 - contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
 - coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
 - coadiuvante nella correzione di vizi posturali



MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Seno/Torace
1°	80–95 cm
2°	95–110 cm
3°	110–125 cm



Codici d'ordine: PPS-PZIP B bianca; PPS-PZIP N nera

P+ YOUNG UP

MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA



- STRUTTURA**
- realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
 - filato in microfibra per un maggiore comfort, morbidezza e traspirabilità
 - trattamento antibatterico e traspirante
 - particolare tramatura a richiamo elastico nella zona scapolare e del bicipite
 - struttura tridimensionale a livello lombare per portare esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
 - tramatura a rete nella zona sottoascellare
 - scollatura per un maggior comfort

- INDICAZIONI**
- dorso curvo non strutturato
 - patologie spalla con compenso scapolare
 - cervicobrachialgie
 - ipotonotrofia della muscolatura del tronco
 - contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
 - coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
 - coadiuvante nella correzione di vizi posturali



MISURE (UNISEX)

Tg.	Ø Torace
1°	60–67 cm
2°	67–74 cm
3°	74–80 cm



Codici d'ordine: PPS-YOUNG UP B bianca; PPS-YOUNG UP N nera; PPS-YOUNG UP G grigia

P+ DORSOLLIEVO

TUTORE POSTURALE



Sistema modulare di trazione



Barre di rinforzo in alluminio

STRUTTURA

- la parte a contatto con il dorso è realizzata in materiale 3D traspirante, privo di cuciture
 - le fasce di trazione ascellare ed addominale sono realizzate in materiale ad alto coefficiente elastico con sistema modulare di tensionamento
 - dotato di barre di rinforzo in alluminio modellabile
- CHIUSURA**
- a strappo

INDICAZIONI

- dorso curvo non strutturato
- iperlordosi non strutturata
- patologie spalla con compenso scapolare
- cervicobrachialgie
- ipotonotrofia della muscolatura del tronco
- contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
- coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann e nella correzione di vizi posturali
- coadiuvante nel dolore da dorso curvo strutturato
- esiti fratture clavicolari



MISURE


Tg.	Ø Vita
XS	56-64 cm
S	64-72 cm
M	72-80 cm
L	80-90 cm
XL	90-100 cm



Codici d'ordine: PPS-DSO G grigio; PPS-DSO S skin

P+ PANTS

PANTALONE POSTURALE

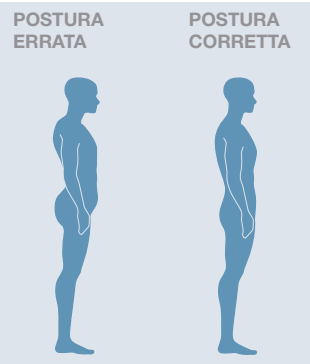

Riallineamento del bacino

STRUTTURA

- combinazione di tessuto elastico di base in Sensitive® Fabric a fasce di spinta del cingolo sacrale rinforzate in materiale anelastico
- CHIUSURA**
- a strappo a livello addominale

INDICAZIONI

- coadiuvante nella correzione delle patologie correlate all'antiversione del bacino
- correzione atteggiamento iperlordotico
- coadiuvante nel trattamento delle stenosi lombari
- patologie della sacroiliaca



MISURE DONNA

Tg.	Ø Bacino
XS	88-93 cm
S	94-99 cm
M	100-105 cm
L	106-111 cm
XL	112-117 cm



Codici d'ordine: PXT-PANTS W donna; PXT-PANTS M uomo

MISURE UOMO

Tg.	Ø Vita
S	82-87 cm
M	88-93 cm
L	94-99 cm
XL	100-105 cm
XXL	106-111 cm



A R T O S U P E R I O R E



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

STAX

STABILIZZATORI PER DITA MANO

FILAMED® 101

POLSINO SEMPLICE

SCAPHOMED®

TUTORE RIGIDO PER POLLICE

FINGER CAP

TUTORE MORBIDO PER POLLICE

ARTO SUPERIORE



- STECCATURA**
- data dalla struttura stessa in ABS
- STRUTTURA**
- in ABS trasparente con fori per l'aerazione
- NOTE**
- disponibile anche in scatola completa di 30 pezzi nelle varie misure

- INDICAZIONI**
- fratture falangi distali
 - distorsioni
 - contusioni
 - lesioni di Segond
 - esito di intervento di Ishiguro

MISURE	
Taglie	La confezione (30 pz.) contiene:
1°	3 pz. mis. 1°
2°	4 pz. mis. 2°
3°	4 pz. mis. 3°
4°	4 pz. mis. 4°
5°	4 pz. mis. 5°
5° 1/2	4 pz. mis. 5°-1/2
6°	4 pz. mis. 6°
7°	3 pz. mis. 7°
Codici d'ordine: STX-001 per singolo pezzo; STX-030 per confezione	



- STECCATURA**
- nessuna
- STRUTTURA**
- in neoprene leggero
- PRESA POLLICE**
- FILAMED® 101: no
 - FILAMED® 111: si
- CHIUSURA**
- a strappo sul polso

- INDICAZIONI FILAMED® 101**
- distorsioni lievi del polso
 - lievi artralgie del polso
 - polso SNAC iniziale
 - polso SLAC iniziale
 - lievi instabilità radio-carpiche
- INDICAZIONI FILAMED® 111**
- distorsioni di polso e primo dito
 - iniziale morbo di De Quervain
 - iniziale primo dito a scatto doloroso
 - esiti lesioni di Stener (pollice dello sciatore)

MISURE
Taglia unica ambidestra

Codici d'ordine: FILAMED 101; FILAMED 111 con dito



- STECCATURA**
- mediante guscio anatomico in tecnopolimero con bordi arrotondati e materiale più rigido in corrispondenza dello scafoide
- STRUTTURA**
- cuffia interna di protezione in tessuto elastico senza cuciture
- PRESA POLLICE**
- si
- CHIUSURA**
- mediante sistema a strappo elastico sul polso

- INDICAZIONI**
- rizoartrosi moderata o grave
 - tendinopatie del pollice
 - distorsioni metacarpofalangee
 - esiti frattura di Bennett
 - lesione di Stener
 - morbo di De Quervain
 - post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
 - fratture base falange prossimale del primo dito

MISURE (DX/SX)	
Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm



Codice d'ordine: SCA-101



- STECCATURA**
- nessuna
- STRUTTURA**
- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con silicone interno
- PRESA POLLICE**
- si
- CHIUSURA**
- a strappo sul polso

- INDICAZIONI**
- rizoartrosi
 - tendinopatie del pollice
 - distorsioni metacarpofalangee

MISURE (DX/SX)	
Taglie	Ø Polso
S	13-17 cm
M	17-19 cm
L	19-23 cm
XL	23-28 cm




Codice d'ordine: FIN-101

ARTO SUPERIORE

PDN-SCA

PROGRAMMA NIGHT & DAY
PER RIZOARTROSI

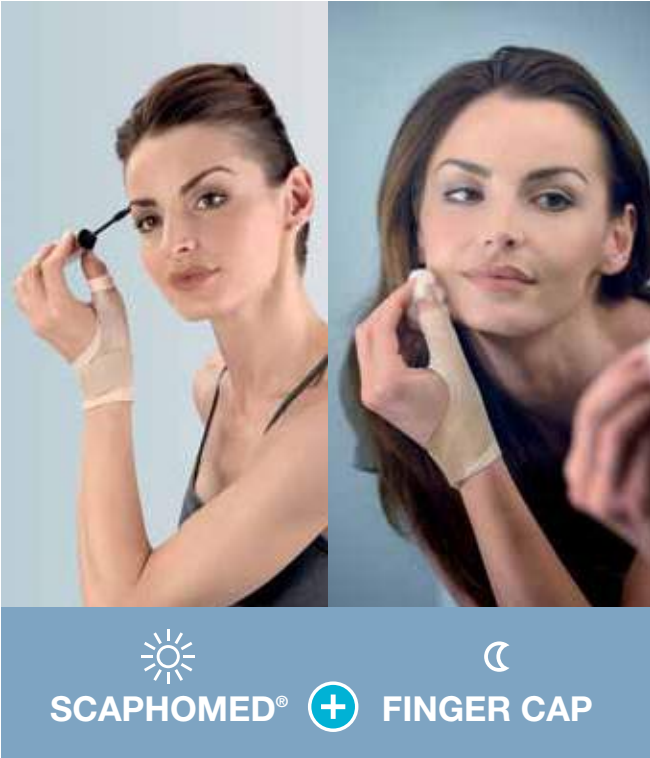

SCAPHOMED® + FINGER CAP

- STRUTTURA**
- il programma Night & Day è composto dal tutore SCAPHOMED® e FINGER CAP
- FASE DAY**
- prevede l'uso di SCAPHOMED® nelle ore diurne, per garantire il normale svolgimento delle attività quotidiane mantenendo in posizione disciplinata lo scafoide grazie all'apposito tutore rigido
- FASE NIGHT**
- prevede l'uso di FINGER CAP durante la notte, per favorire il processo anti-infiammatorio a riposo, mantenendo il controllo dello scafoide grazie all'innovativo tessuto elastico e contenitivo

- INDICAZIONI**
- rizoartrosi moderata o grave
 - tendinopatie del pollice
 - distorsioni metacarpofalangee
 - esiti frattura di Bennett
 - lesione di Stener
 - morbo di De Quervain
 - post operatorio di artroplastica o emiartroplastica per rizoartrosi
 - fratture base falange prossimale del primo dito

MISURE (DX/SX)	
Taglie	Ø Polso
S	13–17 cm
M	17–19 cm
L	19–23 cm
XL	23–28 cm



Codice d'ordine: PDN-SCA

RHIZOMED® SOFT

IMMOBILIZZATORE PRIMO DITO



- STECCATURA**
- elemento distanziale tra pollice e indice in tecnopolimero
- STRUTTURA BASE**
- in cotone all'interno e con ampie zone grippanti esternamente
- PRESA POLLICE**
- si con zona a soffietto modulabile alle varie conformazioni anatomiche del pollice
- CHIUSURA**
- a strappo sia a livello del polso che del pollice
- NOTE**
- il dispositivo non impedisce la presa pollice-indice

- INDICAZIONI**
- rizoartrosi lieve o moderata
 - artriti del carpo e metacarpo
 - infortuni al legamento (es. pollice dello sciatore)
 - infiammazioni all'articolazione del pollice

MISURE (Ambidestro)	
Taglie	Ø Polso
I	13–17 cm
II	18–23 cm

Altezza 8 cm



Codice d'ordine: RHI-100

PFO-100

TUTORE PER IL 4° E 5° RAGGIO DELLA MANO




- STECCATURA**
- mediante la struttura in alluminio posta lateralmente
- STRUTTURA**
- in alluminio modellabile
 - possibilità di regolazione del ROM dell'articolazione del polso e metacarpo falangea
 - imbottitura termoformata in morbido vellutino grippante
- CHIUSURA**
- mediante 4 fasce a strappo regolabili
- NOTE**
- il tutore è un brevetto esclusivo FGP

- INDICAZIONI**
- fratture di IV e o V metacarpo conservative o chirurgiche
 - fratture prima falange di IV o V dito conservative o chirurgiche
 - lussazione volare della metacarpo falangea IV e o V raggio
 - lesione tendine superficiale e o profondo del IV-V raggio post operatorio
 - morbo di Dupuytren IV e o V raggio
 - lesioni tendini estensori (comune di IV e o V raggio e o proprio del V raggio) post operatorio
 - lussazione dorsale della metacarpofalangea del IV e o V raggio
 - dinamizzazione precoce o tardiva di IV e o V raggio (trattamento conservativo o post operatorio)

MISURE (DX/SX)	
Taglie	Altezza
S	5,5–6,5 cm
M	6,5–8,0 cm
L	8,0–9,5 cm

Nel prendere le misure va considerata la distanza tra i centri di rotazione del polso e del V metacarpo.

Codice d'ordine: PFO-100

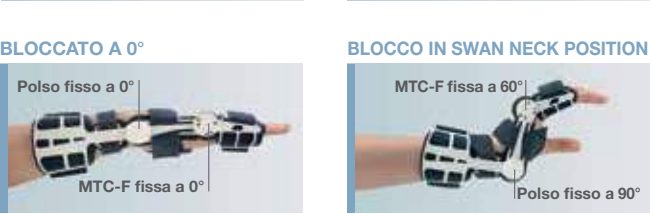

MISURE (DX/SX)	
Taglie	Altezza
S	5,5–6,5 cm
M	6,5–8,0 cm
L	8,0–9,5 cm



Codice d'ordine: PFO-100

D.T3-01

IMMOBILIZZATORE STECCATO PRIMO DITO



- STECCATURA**
 - laterale in alluminio modellabile
- STRUTTURA**
 - in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- PRESA POLLICE**
 - si
- CHIUSURA**
 - a strappo sul polso e sul pollice regolabile a misura tagliando il materiale in eccesso
- NOTE**
 - il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
 - rizoartrosi lieve o moderata
 - traumi distorsivi del primo dito
 - esiti intervento di artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi
 - esiti lesione di Stener (conservativo o post operatorio)
 - esiti fratture primo metacarpo, dolorosi fratture di scafoide

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	fino a 15 cm
M	15–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 14,5 cm

Codice d’ordine: DT3-01

PHYLO® 12

POLSIERA STECCATA



- STECCATURA**
 - palmare in alluminio modellabile
 - passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare
- STRUTTURA**
 - parte interna in tessuto Phyllo® traspirante, antibatterico e termoregolatore
- CHIUSURA**
 - mediante 3 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e facilitata grazie al passante multiplo superiore

- INDICAZIONI**
 - traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	14–18 cm
2°	19–23 cm
3°	24–28 cm

Altezza 21 cm

Codice d’ordine: PHY-12

DTX-04 MANUMED®

POLSIERA STECCATA



- STECCATURA**
 - palmare in alluminio modellabile
- STRUTTURA**
 - in tessuto traspirante
- CHIUSURA**
 - mediante 3 fasce a strappo
 - ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

- INDICAZIONI**
 - traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10–14 cm
1°	14–18 cm
2°	19–23 cm
3°	24–28 cm

Altezza 20 cm

Codice d’ordine: DTX-04

DTX-05 MANUMED® T

POLSIERA STECCATA
CON IMMOBILIZZATORE POLLICE



- STECCATURA**
 - palmare in alluminio modellabile
 - stecca di supporto per pollice in alluminio modellabile
- STRUTTURA**
 - in tessuto traspirante
- PRESA POLLICE**
 - si
- CHIUSURA**
 - mediante 3 fasce a strappo
 - ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

- INDICAZIONI**
 - esiti frattura scafoide carpale
 - trattamento lesioni di Stener
 - fratture combinate di primo dito e polso stabili
 - post operatorio del primo raggio
 - traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
 - esiti artroplastica ed emiartroplatrica per rizoartrosi

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
0°	10–14 cm
1°	14–18 cm
2°	19–23 cm
3°	24–28 cm

Altezza 20 cm

Codice d’ordine: DTX-05

ARTO SUPERIORE

ARTO SUPERIORE

D.T3-02

POLSIERA STECCATA



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
- STRUTTURA**
- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- CHIUSURA**
- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
 - ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-02

D.T3-03

POLSIERA STECCATA LIGHT



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
- STRUTTURA**
- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
 - apribile completamente
- CHIUSURA**
- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm

Altezza 19 cm

Codice d'ordine: DT3-03

DTX-07 MANUMED³

POLSIERA STECCATA AMBIDESTRA



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
 - passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare
- STRUTTURA**
- in tessuto traspirante
 - totalmente privo di cuciture
 - apribile completamente
- CHIUSURA**
- mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica

MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14–18 cm
M	19–23 cm
L	24–28 cm

Altezza 21 cm

Codice d'ordine: DTX-07

DTX-08 MANUMED³ MAX

POLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
 - passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare
- STRUTTURA**
- in tessuto traspirante
 - totalmente privo di cuciture
 - apribile completamente
- CHIUSURA**
- mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza per impedire l'uscita dal passante multiplo

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica
 - post interventi alle filiere del carpo

MISURE

Taglie	Ø Polso
S	14–18 cm
M	19–23 cm
L	24–28 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DTX-08

PHYLO® 13

POLSIERA STECCATA LUNGA



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
 - passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare
- STRUTTURA**
- parte interna in tessuto Phylo® traspirante, antibatterico e termoregolatore
- CHIUSURA**
- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e facilitata grazie al passante multiplo superiore

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica
 - post interventi alle filiere del carpo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
1°	14–18 cm
2°	19–23 cm
3°	24–28 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: PHY-13

DTX-06 MANUMED® LONG

POLSIERA STECCATA LUNGA



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
 - rinforzi laterali in polietilene
- STRUTTURA**
- in tessuto traspirante
 - apribile completamente
- CHIUSURA**
- mediante 3 fasce a strappo
 - la fascia polso è amovibile e riposizionabile per la personalizzazione del tutore e per una maggiore stabilità dell'articolazione

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica
 - post interventi alle filiere del carpo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 14 cm
S	15–17 cm
M	18–20 cm
L	21–23 cm
XL	oltre 23 cm

Altezza 27 cm

Codice d'ordine: DTX-06

PLE-101 MANUMED® DISK

TUTORE RIGIDO PER POLSO



- STECCATURA**
- mediante struttura interna in alluminio modellabile
- STRUTTURA**
- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
 - apribile completamente
 - cuciture solo sui tiranti
- CHIUSURA**
- mediante 3 cinturini a strappo regolabili

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - artralgie in malattia reumatica

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso	Altezza
1°	14,5–19,5 cm	22 cm
2°	19,5–23,5 cm	24 cm

Codice d'ordine: PLE-101

PLE-201 THUMBLOCK®

TUTORE RIGIDO PER POLSO E POLLICE



- STECCATURA**
- mediante struttura interna in alluminio modellabile con supporto per pollice
- STRUTTURA**
- doppia imbottitura elettrosaldata con monospugna a contatto con la pelle
 - apribile completamente
 - cuciture solo sui tiranti
- PRESA POLLICE**
- sì
- CHIUSURA**
- mediante 3 cinturini regolabili a strappo e cinturino di fissaggio del pollice

- INDICAZIONI**
- esiti frattura scafoide carpale
 - trattamento lesioni di Stener
 - fratture combinate di primo dito e polso stabili
 - post operatorio del primo raggio
 - traumi distorsivi moderati e severi di polso e primo dito
 - esiti artroplastica ed emiartroplastica per rizoartrosi

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Polso
S	14–18 cm
M	19–23 cm
L	24–28 cm

Altezza 22 cm

Codice d'ordine: PLE-201

CTP-101 SUR.FING®

TUTORE PER TUNNEL CARPALE



- STECCATURA**
- mediante struttura interna in alluminio modellabile con prolungamento sulle dita della mano
- STRUTTURA**
- doppia imbottitura elettrosaldada con monospugna a contatto con la pelle
 - apribile completamente
 - cuciture solo sui tiranti
- CHIUSURA**
- mediante 4 cinturini a strappo regolabili

- INDICAZIONI**
- lesioni nervo radiale
 - esiti fratture combinate di mano e polso
 - post operatorio di lesioni a tendini flessori ed estensori dal II al IV raggio

MISURE (DX/SX)

Taglie	Lungh. mano
S	15-17,5 cm
M	17,5-19,5 cm
L	19,5-22 cm

Altezza 29 cm

Codice d'ordine: CTP-101

PHYLO® FSP

TUTORE PER EPICONDILITE ED EPITROCLEITE



- STRUTTURA**
- soft con parte esterna in poliuretano e rivestimento interno in vellutino traspirante privo di cuciture
- PRESSORE**
- doppio cuscinetto pressore in materiale ad alta densità posizionabile nella zona desiderata con elemento elastico per adattarsi alle variazioni del volume muscolare
 - sistema di regolazione telescopico del tutore
- CHIUSURA**
- a strappo

- INDICAZIONI**
- epicondiliti
 - epitrocleiti

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: PHY-FSP



Sistema di regolazione telescopico e doppio cuscinetto

EPIBRACE PRO

TUTORE PER EPICONDILITE ED EPITROCLEITE



- STRUTTURA**
- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
 - particolare effetto 3D interno per un'azione massaggiante
 - parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità
- PRESSORE**
- cuscinetto pressore orientabile in silicone ricoperto in morbido tessuto, agganciato con sistema grippante
- CHIUSURA**
- a strappo con sistema di tensionamento facilitato grazie alle tacche numerate di riferimento
 - presenza di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio
- NOTE**
- disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

- INDICAZIONI**
- epicondiliti
 - epitrocleiti

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine:
EPI-200 F fucsia; EPI-200 L lime;
EPI-200 A azzurro; EPI-200 G grigio



Disponibile in 4 colori

D.T3-FSP

TUTORE PER EPICONDILITE ED EPITROCLEITE



- STRUTTURA**
- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- PRESSORE**
- pneumatico posizionabile nella zona desiderata
- CHIUSURA**
- a strappo

- INDICAZIONI**
- epicondiliti
 - epitrocleiti

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: DT3-FSP

EPICOMED®

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO
CON PRESSORE IN SILICONE



- STRUTTURA**
- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - bordo superiore morbido e confortevole
- PRESSORE**
- in silicone integrato lateralmente con scarico trocleare e superficie massaggiante
 - dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

- INDICAZIONI**
- epicondiliti
 - epitrocleiti
 - esiti lussazione del gomito
 - borsite olecranica
 - versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o artrosi o malattie reumatiche

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio
I	17–20 cm
II	20–23 cm
III	23–26 cm
IV	26–29 cm
V	29–32 cm
VI	32–35 cm

Codice d'ordine: M.822

EPICOMED® E+ MOTION

GOMITIERA IN TESSUTO ELASTICO
CON PRESSORE IN SILICONE EMOTION



- STRUTTURA**
- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - bordo superiore morbido e confortevole
- PRESSORE**
- in silicone con fibre di quarzo con scarico trocleare e superficie massaggiante
 - dotato di cinturino a strappo di tensionamento regolabile e staccabile

- INDICAZIONI**
- epicondiliti
 - epitrocleiti
 - esiti lussazione del gomito
 - borsite olecranica
 - versamenti e/o tumefazioni articolari da artrite o artrosi o malattie reumatiche

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Avambraccio
II	20–23 cm
III	23–26 cm
IV	26–29 cm
V	29–32 cm
VI	32–35 cm

Codice d'ordine: M.822E

RGB-150

REGGIBRACCIO SEMPLICE
CON REGOLAZIONE A STRAPPO



- STRUTTURA**
- soft con sacca in cotone e cintura spalla in vellutino regolabile con sistema a strappo
- CHIUSURA**
- a strappo

- INDICAZIONI**
- post trauma spalla e gomito
 - entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
 - rottura atraumatica del capolungo del bicipite
 - fase acuta di artrosi glenomerale e o acromion claveare
 - trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

MISURE

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33–40 cm
L	oltre 40 cm

Codice d'ordine: RGB-150

RGB-100

REGGIBRACCIO SEMPLICE



- STRUTTURA**
- soft con sacca in cotone e cintura spalla regolabile mediante fibbia dotata di tubolare di protezione collo
- CHIUSURA**
- mediante fibbia

- INDICAZIONI**
- post trauma spalla e gomito
 - entesopatia calcifica della spalla in fase acuta
 - rottura atraumatica del capolungo del bicipite
 - fase acuta di artrosi glenomerale e o acromion claveare
 - trattamento del braccio pendulo (lesioni del plesso brachiale)

MISURE

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 32 cm
M	33–40 cm
L	oltre 40 cm

Codice d'ordine: RGB-100

IMB-200 NEW

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON ACCESSORIO PER CONTENIMENTO GOMITO



STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito libero
- cuffia in tessuto traspirante tridimensionale con bordatura in cotone per la stabilizzazione del gomito con sistema a strappo
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- cinghie nella zona delle spalle in vellutino grippante con doppio manicotto imbottito a protezione del collo

NOTE

- le dimensioni ampie e il design sagomato rendono il dispositivo maggiormente confortevole e permettono di avvolgere e contenere più efficacemente la zona interessata

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-200N

IMB-300

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO



STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con contenimento del gomito
 - dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante
- STRUTTURA CINGHIAGGIO
- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-300

IMB-350G

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
CON GOMITO CHIUSO



STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito chiuso
 - dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino grippante
- STRUTTURA CINGHIAGGIO
- in vellutino con doppio manicotto imbottito di protezione collo

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio intervento di Latarjet
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- esiti di intervento di riparazione del tendine distale del bicipite
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-350 OG

IMB-400

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 30° A 70°



GRADO ABDUZIONE

- da 30° a 70°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito e pallina riabilitativa di supporto mano

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce a strappo in vellutino imbottito grippante
- dotato di fascia addominale a strappo

NOTE

- dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-400

IMB-600 S

CUSCINO ABDUTTORE SPALLA
FINO A 70° PNEUMATICO



GRADO ABDUZIONE

- da 30° a 70°

STRUTTURA BASE

- cuscino pneumatico dotato di camera d'aria interna in PVC con copertura in vellutino

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- fissaggio mediante 2 anelli realizzati in vellutino imbottito e pallina riabilitativa di supporto mano

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale a strappo regolabile

NOTE

- dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-600 S

IMB-700N

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino grigliante con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura; dotata di cintura addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: IMB-700N

KIT POST OP. SPALLA

KIT RIABILITAZIONE SPALLA CON CUSCINO
IMB-700N + 2 FASCE ELASTICHE A RESISTENZA
VARIABILE + 1 LIBRETTO DI ESERCIZI



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e fibbia a scatto di chiusura
- dotata di cintura addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- il kit comprende oltre al tutore IMB-700N 2 fasce elastiche a resistenza variabile e un libretto di esercizi per la riabilitazione

INDICAZIONI

- coadiuvante riabilitazione patologie della spalla

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 34 cm
M	35-39 cm
L	oltre 39 cm



Codice d'ordine: KIT-SPALLA

IMB-700

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 20°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 20°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità con copertura in vellutino grigliante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in cotone con fettuccia di rinforzo sulla base

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo, manicotto imbottito di protezione collo
- dotato di fascia addominale regolabile

NOTE

- a richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-700

IMB-750N

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 30°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 30°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino all'esterno e struttura alveolare traspirante a contatto con il corpo

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto con struttura alveolare traspirante a contatto con la pelle ed inserti esterni in vellutino grippante con cinturino di sostegno del pollice

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con spillina ascellare di sostegno in grado di ridistribuire il peso e fibbia a scatto di chiusura
- dotato di fascia addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna. A richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (ambidestro)

Taglie	Lungh. avambraccio
S	fino a 34 cm
M	35–39 cm
L	oltre 39 cm

Codice d'ordine: IMB-750N

IMB-750

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA DA 10° A 30°



GRADO ABDUZIONE

- da 10° a 30°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico con copertura in vellutino grippante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna. A richiesta pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE

Taglia unica ambidestra

Codice d'ordine: IMB-750

IMB-800 MULTISAS®

CUSCINO ABDUTTORE PER SPALLA A 15°
CON SISTEMA INTRA-EXTRA ROTAZIONE
FINO A 20°



GRADO ABDUZIONE

- a 15°

STRUTTURA BASE

- cuscino in gommapiuma ad alta densità anatomico ed avvolgente con copertura in vellutino e morbida lycra nella zona di appoggio dell'avambraccio
- cuneo di regolazione intra-extra rotazione fino a 20° con copertura in vellutino grippante

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- rete di contenimento avambraccio in morbido tessuto traspirante agganciata con sistema a strappo sulla struttura del cuscino
- dotato di pallina riabilitativa

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- con fasce in vellutino a strappo con manicotto imbottito di protezione collo con fibbia a scatto di chiusura e cinghia sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- dotato di fascia addominale regolabile con fibbia a scatto

NOTE

- la conformazione avvolgente del cuscino è in grado di assicurare la stabilità dell'arto anche nella fase notturna, inoltre l'alloggiamento dell'avambraccio inglobato nel cuscino stesso permette di distribuire in modo migliore il peso e ridurre lo stress muscolare, dotato di pallina riabilitativa

INDICAZIONI

- post operatorio nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- fratture del trochite omerale
- iniziale trattamento in protesi spalla
- trattamento conservativo di fratture della glena stabili
- lesioni di Bankart
- lussazioni e sub-lussazioni (stabili o instabili)

MISURE (DX/SX)

Taglia unica

Codice d'ordine: IMB-800

SHOULDER ACTION

SUPPORTO PER SPALLA



STRUTTURA BASE

- tessuto elastico traspirante con particolare gommatura in grado di aderire alla cute e creare la giusta tensionatura del tutore
- dotata di particolare cuffia spalla con regolazione a strappo per controllare il movimento della spalla

INDICAZIONI

- instabilità articolazione glenomerale
- prevenzione lussazioni glenomerali
- esiti pregresse lussazioni glenomerali
- coadiuvante nel recupero dello stupor del nervo ascellare
- lussazione glenomerale recidivante
- esiti di intervento di Latarjet e artroscopia di spalla
- esiti lussazioni acromion clavari di I o II grado secondo Rockwood

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Torace
S	75–85 cm
M	82–100 cm
L	97–110 cm
XL	107–120 cm

Codice d'ordine: ACT-100

ARTO SUPERIORE



STRUTTURA BASE

- tessuto in materiale bielastico latex-free altamente traspirante ed elastico
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- bordo superiore morbido e confortevole
- dotato di cinghiaggio spalla elastico con doppia fibbia di regolazione per il controllo del movimento
- 2 anelli di trazione permettono di modulare il range di movimento
- cintura vita in materiale elastico

INDICAZIONI

- trattamento conservativo dell'artrosi dolorosa della spalla
- trattamento postoperatorio nelle protesi di spalla
- trattamento conservativo nella lussazione di spalla cronica o acuta
- esiti dolorosi post ricostruzione della cuffia dei rotatori

MISURE (DX/SX)	
Taglie	Ø Bicipite
0	inferiore 26 cm
I	26-29 cm
II	29-33 cm
III	33-36 cm
IV	36-39 cm



Codice d'ordine: M.808



STRUTTURA BASE

- sistema ad 8 con fasce di tensionamento ampie dotate di imbottitura morbida e sagomate anatomicamente
 - design studiato per garantire miglior vestibilità sotto gli abiti
 - inserto interno in silicone per maggiore stabilità
- STRUTTURA CINGHIAGGIO**
- fasce adattabili e ritagliabili, con fissaggio tramite linguette a strappo

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)

MISURE	
Taglie	Ø Torace
XS	60-75 cm
S	75-90 cm
M	90-105 cm
L	105-115 cm
XL	115-125 cm



Codice d'ordine: RDS-100



STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore termosaldada realizzata in materiale traspirante alveolare a contatto con la pelle e vellutino nella parte esterna
- i cinghiaggi delle spalle sono realizzati in monospugna all'interno e vellutino all'esterno con tubolari di protezione e aggancianti con fibbie alla struttura posteriore

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- trattamento conservativo lussazioni acromion clavari

MISURE	
Taglie	Ø Torace
S	65-75 cm
M	76-90 cm
L	91-105 cm
XL	106-120 cm



Codice d'ordine: RDS-200



STRUTTURA BASE

- tessuto imbottito in poliammide e elastomero
- manicotto predisposto per l'inserimento di barre in alluminio laterali estraibili e modellabili

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- polsino reggibraccio removibile
- STRUTTURA CINGHIAGGIO**
- sistema di cinghie a strappo regolabili e ritagliabili
 - dotato di fascia di immobilizzazione braccio removibile

NOTE

- copertura di protezione del manicotto per una maggiore discrezione e comfort

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle fratture dell'omero prossimale
- trattamento conservativo delle fratture dell'omero non operabili
- trattamento post operatorio delle fratture di omero, scapola clavicola (Floating Shoulder)
- trattamento delle fratture del trochite omerale non chirurgiche

MISURE (DX/SX)	
Taglie	Ø Braccio
S	21-28 cm
M	26-34 cm
L	31-40 cm



Codice d'ordine: HFB-100

ARTO SUPERIORE

ACROFIX

TUTORE PER LUSSAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE



STRUTTURA BASE

- spallina principale in vellutino imbottita e modellata dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta con cinghie regolabili e fibbie autoadattanti
- fascia regolabile sottoascellare per la ridistribuzione del peso
- cintura addominale a strappo con chiusura regolabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in tessuto tridimensionale dalla struttura alveolare leggero e traspirante, con zona grippante nella regione del gomito
- fascia di rinforzo alla base
- anello d'ancoraggio per il pollice
- cinghia di sostegno del polso

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- fasce in vellutino ritagliabili con fissaggio tramite linguette a strappo con pinzetta numerata
- sistema di fissaggio ad anello

NOTE

- la numerazione delle fasce a strappo di chiusura facilitano la prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico

INDICAZIONI

- trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni acromion clavari
- trattamento post operatorio delle fratture dell'estremo laterale di clavicola

MISURE (DX/SX)		
Taglie	Lungh. avambraccio	
S	fino a 32 cm	
M	33–40 cm	
L	41–46 cm	
Codice d'ordine: ACRO-100		

EPICO-REVO

TUTORE PER GOMITO ROM



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post op. o conservativo di fratture di gomito
- trattamento fratture distali dell'omero

MISURE (DX/SX)	REGOLAZIONI		
	Ext.	Flex.	Imm.
Taglia unica	0°	0°	0°
A richiesta versione Short	10°	10°	10°
	20°	20°	20°
	30°	30°	30°
	40°	40°	40°
	50°	50°	50°
	60°	60°	60°
	70°	70°	70°
	80°	80°	80°
	90°	90°	90°
	100°	100°	100°
	110°	110°	110°
	120°	120°	120°
Codice d'ordine: EPICO-REVO			

EPICO-REVO PS

TUTORE PER GOMITO ROM CON DISPOSITIVO DI PRONO SUPINAZIONE DEL POLSO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in MTP accoppiato a vellutino con particolari scanalature per stimolare i recettori muscolari e prevenirne le tensioni muscolari
- dispositivo palmare che consente la prono-supinazione del polso
- cintura spalla con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo ROM di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con reg. ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- post operatorio di fratture, lussazioni, protesi del gomito
- lussazione del gomito e trattamento fratture distali dell'omero
- iniziale trattamento nel post operatorio di protesi di capitello radiale
- riabilitazione nel trattamento post operatorio o conservativo di fratture di gomito

MISURE (DX/SX)	REGOLAZIONI		
	Ext.	Flex.	Imm.
Taglia unica	0°	0°	0°
A richiesta versione Short	10°	10°	10°
	20°	20°	20°
	30°	30°	30°
	40°	40°	40°
	50°	50°	50°
	60°	60°	60°
	70°	70°	70°
	80°	80°	80°
	90°	90°	90°
	100°	100°	100°
	110°	110°	110°
	120°	120°	120°
Codice d'ordine: EPICO-REVO PS			

REVO-KIT

ACCESSORIO PER PRONO SUPINAZIONE POLSO



STRUTTURA

- dispositivo palmare in tecnopolimero che consente la prono-supinazione del polso mediante l'asta in acciaio

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- regolabile

CHIUSURA

- si aggancia ad incastro sulla struttura grazie alla particolare conformazione

NOTA

- accessorio applicabile su versione per adulto del tutore EPICO-REVO

Codice d'ordine: REVO KIT			
---------------------------	--	--	--

A R T O I N F E R I O R E



Orthopedic
& Rehabilitation
Equipment

IMA-110 HipOne®

TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA
COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO



- STRUTTURA**
- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
 - imbottiture in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO**
- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
 - disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
 - disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120)
- CHIUSURA**
- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
 - della presa coscia a strappo

- INDICAZIONI**
- coxartrosi non operabile
 - lussazione d'anca
 - lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
 - fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
 - post operatorio emibacino, acetabolo
 - esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine:
IMA-110 asta normale; IMA-120 asta corta

IMA-110 BR HipOne®

TUTORE FUNZIONALE R.O.M.
PER ANCA CON BRACCETTO DISTANZIALE



- STRUTTURA**
- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
 - imbottiture in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO**
- controlla l'abduzione fisiologica del paziente grazie a 3 settaggi regolabili mediante camma interna
 - dotato di braccetto distanziale per permettere l'allineamento della parte inferiore del tutore alla direzione del femore
 - disponibili 7 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
 - disponibile versione con asta dello snodo corta (IMA-120 BR)
- CHIUSURA**
- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
 - della presa coscia a strappo

- INDICAZIONI**
- coxartrosi non operabile
 - lussazione d'anca
 - lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
 - fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
 - post operatorio emibacino, acetabolo
 - esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Flex. 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

Imm. 0° 15° 30°

Codici d'ordine: IMA-110 BR asta normale; IMA-120 BR asta corta; SP-HBR braccetto distanziale

IMA-103

TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA



- STRUTTURA**
- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in materiale plastico
 - imbottitura in morbida monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO**
- vite di allineamento asta femorale
 - disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- CHIUSURA**
- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
 - della presa coscia a strappo

- INDICAZIONI**
- coxartrosi non operabile
 - lussazione d'anca
 - lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
 - fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
 - post operatorio emibacino, acetabolo
 - esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)

Tg.	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)	Ø Distale (C)
S	70-80 cm	38-46 cm	35-40 cm
M	81-100 cm	47-56 cm	41-47 cm
L	101-115 cm	57-66 cm	48-54 cm
XL	116-135 cm	67-76 cm	55-62 cm

TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

Flex. 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Imm. 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

Codice d'ordine: IMA-103

IMA-150

TUTORE FUNZIONALE R.O.M. PER ANCA
AMBIDESTRO



- STRUTTURA**
- rigida con valve anatomiche di presa bacino e coscia in alluminio modellabile
 - imbottitura in vellutino grippante
- SNODO**
- vite di allineamento asta femorale
 - disponibili 13 settaggi per la regolazione in flessione, estensione e immobilizzazione
- CHIUSURA**
- della presa bacino con fibbia e regolazione a strappo
 - della presa coscia a strappo

- INDICAZIONI**
- coxartrosi non operabile
 - lussazione d'anca
 - lussazione articolare protesi totale ed endoprotesi
 - fratture composte del cotile, prossimali del femore, periprotetiche del terzo prossimale del femore
 - post operatorio emibacino, acetabolo
 - esiti ri protesizzazioni anca

MISURE

Taglie	Ø Vita (A)	Ø Pross. (B)
S	70-90 cm	38-50 cm
M	90-110 cm	50-62 cm
L	110-135 cm	62-76 cm

TABELLA REGOLAZIONI

Ext. 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

Flex. 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Imm. 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°

Codice d'ordine: IMA-150



- STRUTTURA**
- soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico
 - dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile mediante cerniere di apertura
- SNODO**
- set di stecche a spirale
- CHIUSURA**
- del bacino e della coscia a strappo

- INDICAZIONI**
- FAI (femural acetabular Impingment) pre-post operatorio
 - esiti lussazioni d'anca
 - coxartrosi non operabile
 - esiti ri protesizzazioni anca

MISURE (DX/SX)		
Taglie	Ø Vita	Altezza stecche
S	60-72 cm	43 cm
M	73-85 cm	47 cm
L	86-98 cm	51 cm
XL	99-110 cm	55 cm



Codice d'ordine: IMA-109



STABIMED PHYLOTEK®

LINEA PHYLOTEK®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO
PHYSIOGLIDE®



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico Physioglide con regolazione rapida mediante stop
 - coprisnodo in poliuretano
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - gonartrosi lieve e moderata
 - esiti distorsione ginocchio
 - instabilità post traumatica

MISURE			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm		0°	0°	0°
S	37-45 cm		10°	10°	10°
M	45-51 cm		20°	20°	20°
L	51-57 cm		30°	30°	30°
XL	57-65 cm			45°	
XXL	65-74 cm			60°	
Altezza 34 cm				75°	
				90°	
				140° (Flex free)	
Codice d'ordine: TEK-ST					

STABIMED PRO PHYLOTEK®

LINEA PHYLOTEK®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON SNODO
POLICENTRICO



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero
 - totalmente coperto ed estraibile
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna a strappo orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - gonartrosi lieve e moderata
 - traumatismi della rotula
 - lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non; iperpressione rotulea grave
 - esiti distorsione ginocchio
 - instabilità post traumatica

MISURE			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm				
S	37-45 cm				
M	45-51 cm				
L	51-57 cm				
XL	57-65 cm				
XXL	65-74 cm				
Altezza 34 cm					
Codice d'ordine: TEK-ST PRO					

COLLAMED PHYLOTEK®

LINEA PHYLOTEK®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA CON SNODO PHYSIOGLIDE®



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, completamente apribile anteriormente, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico Physioglide con regolazione rapida mediante stop
 - coprisnodo in poliuretano
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

- INDICAZIONI**
- grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - gonartrosi lieve e moderata
 - trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
 - lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
 - instabilità post traumatica

MISURE			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm		0°	0°	0°
S	37-45 cm		10°	10°	10°
M	45-51 cm		20°	20°	20°
L	51-57 cm		30°	30°	30°
XL	57-65 cm			45°	
XXL	65-74 cm			60°	
Altezza 40 cm				75°	
				90°	
				140° (Flex free)	
Codice d'ordine: TEK-CO					



Spessori ridotti nella parte posteriore per un maggiore comfort

PHYLO® 20

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON FORO ROTULEO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- lievi condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lievi distorsioni di ginocchio
- idrarto o emartro moderato
- cisti di Baker dolorosa
- lievi gonalgie

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm

Altezza 25 cm

Codice d’ordine: PHY-20



PHYLO® 40

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON
STABILIZZATORE ROTULEO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in silicone ad anello

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI


- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm

Altezza 25 cm

Codice d’ordine: PHY-40



PHYLO® 41

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON
STABILIZZATORE ROTULEO



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO

- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360° con tasca

CHIUSURA

- nessuna

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatie femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm

Altezza 34 cm

Codice d’ordine: PHY-41



PHYLO® 60

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
CON STECCHE A SPIRALE



STRUTTURA

- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE

- doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO

- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna orientabile a 360° con sistema a strappo

CHIUSURA

- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

INDICAZIONI

- moderata o grave condropatia femoro-rotulee
- lievi tendinopatie del rotuleo
- lieve artrosi femoro-rotulea
- esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
- lieve instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–37 cm
S	37–45 cm
M	45–51 cm
L	51–57 cm
XL	57–65 cm
XXL	65–74 cm

Altezza 34 cm

Codice d’ordine: PHY-60




PHYLO® 61

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON STECCHE A SPIRALE



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- doppie stecche a spirale laterale e mediale
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- lieve instabilità post traumatica
 - esito distorsione ginocchio
 - esiti stabilizzati di traumi del ginocchio

MISURE		
Taglie	Ø Coscia	
XS	31–37 cm	
S	37–45 cm	
M	45–51 cm	
L	51–57 cm	
XL	57–65 cm	
XXL	65–74 cm	
Altezza 34 cm		
Codice d'ordine: PHY-61		

PHYLO® 72

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna, orientabile a 360° con sistema a strappo
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento ed esiti distorsioni di ginocchio
 - traumatismi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave
 - instabilità post traumatica

MISURE			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm		0°	0°	0°
S	37–45 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm		45°	45°	
XXL	65–74 cm			60°	
Altezza 34 cm				75°	
				90°	
Codice d'ordine: PHY-72					


PHYLO® 72 A

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - gonartrosi lieve e moderata
 - instabilità post traumatica
 - esiti distorsione ginocchio

MISURE			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm		0°	0°	0°
S	37–45 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm		45°	45°	
XXL	65–74 cm			60°	
Altezza 34 cm				75°	
				90°	
Codice d'ordine: PHY-72A					

PHYLO® 74

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- coprisnodo in poliuretano
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - gonartrosi lieve e moderata
 - esiti distorsione ginocchio
 - instabilità post traumatica

MISURE		
Taglie	Ø Coscia	
XS	31–37 cm	
S	37–45 cm	
M	45–51 cm	
L	51–57 cm	
XL	57–65 cm	
XXL	65–74 cm	
Altezza 34 cm		
Codice d'ordine: PHY-74		

PHYLO® 75

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero
 - coprisnodo in poliuretano
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna, orientabile a 360° con sistema a strappo
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - traumi della rotula
 - lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave
 - esiti distorsione ginocchio e instabilità post traumatica

MISURE		
Taglie	Ø Coscia	
XS	31–37 cm	
S	37–45 cm	
M	45–51 cm	
L	51–57 cm	
XL	57–65 cm	
XXL	65–74 cm	
Altezza 34 cm		
Codice d'ordine: PHY-75		

PHYLO® 76

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero ultrapiatto
 - totalmente coperto ed estraibile
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in schiuma di polietilene a forma di mezzaluna orientabile a 360° con sistema a strappo
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- lieve instabilità post traumatica
 - esito distorsione ginocchio
 - esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
 - traumi della rotula
 - lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave

MISURE		
Taglie	Ø Coscia	
XS	31–37 cm	
S	37–45 cm	
M	45–51 cm	
L	51–57 cm	
XL	57–65 cm	
XXL	65–74 cm	
Altezza 34 cm		
Codice d'ordine: PHY-76		

PHYLO® 76 A

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO COPERTO



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore completamente apribile, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero ultrapiatto
 - totalmente coperto ed estraibile
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- lieve instabilità post traumatica
 - esito distorsione ginocchio
 - esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
 - traumi della rotula, lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave
 - gonartrosi lieve o moderata

MISURE		
Taglie	Ø Coscia	
XS	31–37 cm	
S	37–45 cm	
M	45–51 cm	
L	51–57 cm	
XL	57–65 cm	
XXL	65–74 cm	
Altezza 34 cm		
Codice d'ordine: PHY-76 A		

PHYLO® 90 PT-CONTROL

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, tubolare, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
 - regolazione mediante stop
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- traumi della rotula
 - grave artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave
 - esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm		0°	0°	0°
S	37–45 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm		45°	45°	45°
XXL	65–74 cm			60°	
Altezza 36 cm				75°	
Codice d'ordine: PHY-90				90°	
				120°	

PHYLO® 90 A PT-CONTROL

LINEA PHYLO®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA DINAMICA
PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylo® traspirante, con rete posteriore, completamente apribile, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- policentrico Physioglide con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
 - regolazione mediante stop
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- con sistema dinamico ad avanzamento fisiologico integrato allo snodo
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili con sistema a pinzetta
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- traumatismi della rotula
 - grave artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave
 - esiti di interventi chirurgici sulla rotula, di lateral release rotuleo, di riparazione tendine quadricipitale

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm		0°	0°	0°
S	37–45 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm		45°	45°	45°
XXL	65–74 cm			60°	
				75°	
				90°	
				120°	
Altezza 36 cm					
Codice d’ordine: PHY-90A					

D.T3-TTP

CINTURINO SOTTOROTULEO



- STRUTTURA**
- soft in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
 - con pressore pneumatico anatomico
- CHIUSURA**
- a strappo
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- sindrome di Osgood Schlatter
 - sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
 - tendinopatia del rotuleo
 - esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

MISURE
Taglia unica ambidestra
Codice d'ordine: DT3-TTP

PHYLO® TTP

LINEA PHYLO®
CINTURINO SOTTOROTULEO



- STRUTTURA**
- esterna in poliuretano con imbottitura in morbido materiale traspirante
 - pressore in silicone rivestito in lycra
- CHIUSURA**
- a strappo con sistema di sgancio rapido

- INDICAZIONI**
- sindrome di Osgood Schlatter
 - sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
 - tendinopatia del rotuleo
 - esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo

MISURE
Taglia unica ambidestra
Codice d'ordine: PHY-TTP


M 601

GINOCCHIERA SEMPLICE POLIESTENSIVA



- STRUTTURA**
- soft tubolare anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
 - conformazione anatomica
 - bordo anti-arricciamento
 - tramatura differenziata sul cavo popliteo e rotula
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- lievi distorsioni di ginocchio
 - idrarto o emarto moderato
 - cisti di Baker dolorosa
 - lievi gonalgie
 - lievi condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE			
Taglie	Ø A	Ø B	
I	37-41 cm	25-28 cm	
II	41-43 cm	28-31 cm	
III	43-46 cm	31-34 cm	
IV	46-49 cm	34-37 cm	
V	49-52 cm	37-40 cm	
VI	52-56 cm	40-43 cm	
VII	56-58 cm	43-46 cm	
Altezza 30 cm			
Codice d'ordine: M.601			

GENUMEDI®

GINOCCHIERA ELASTICA
CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE



- STRUTTURA**
- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
 - in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - senza cuciture
 - dotata di silicone antiscivolo interno
 - con foro rotuleo coperto
- SNODO/ASTE**
- stecca a spirale mediale e laterale
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
 - removibile
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo
 - lieve artrosi femoro-rotulea
 - esiti lussazioni rotulee

MISURE			
Taglie	Ø A	Ø B	
I	37-41 cm	25-28 cm	
II	41-43 cm	28-31 cm	
III	43-46 cm	31-34 cm	
IV	46-49 cm	34-37 cm	
V	49-52 cm	37-40 cm	
VI	52-56 cm	40-43 cm	
VII	56-58 cm	43-46 cm	
A richiesta disponibile la taglia VII in versione Extra Wide			
Altezza 30 cm			
Codice d'ordine: M.613			


GENUMEDI® E+ MOTION

GINOCCHIERA ELASTICA
CON ANELLO ROTULEO IN SILICONE



- STRUTTURA**
- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante
 - in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - senza cuciture
 - dotata di silicone antiscivolo interno
 - con foro rotuleo coperto
- SNODO/ASTE**
- stecca a spirale mediale e laterale
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in silicone con aggiunta di fibre di quarzo ed anello con profilo 3D per massaggio
 - removibile
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo
 - lieve artrosi femoro-rotulea
 - esiti lussazioni rotulee

MISURE			
Taglie	Ø A	Ø B	
II	41-43 cm	28-31 cm	
III	43-46 cm	31-34 cm	
IV	46-49 cm	34-37 cm	
V	49-52 cm	37-40 cm	
VI	52-56 cm	40-43 cm	
Altezza 30 cm			
Codice d'ordine: M.613E			


GENUMEDI® PRO

GINOCCHIERA ELASTICA CON SNODO
POLICENTRICO IN TECNOPOLIMERO



- STRUTTURA**
- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre di eucalipto
 - in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - senza cuciture
 - dotata di silicone antiscivolo interno
 - con foro rotuleo coperto
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero in tecnopolimero Easyglide
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in silicone ad anello con profilo 3D per massaggio
 - removibile
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo regolabili

- INDICAZIONI**
- instabilità da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio
 - artrosi
 - moderate lesioni del menisco
 - lieve instabilità dei legamenti collaterali
 - per la stabilizzazione e la compressione post operatoria, ad esempio dopo la parziale meniscectomia o la levigatura della cartilagine

MISURE			
Taglie	Ø A	Ø B	
I	37-41 cm	25-28 cm	
II	41-43 cm	28-31 cm	
III	43-46 cm	31-34 cm	
IV	46-49 cm	34-37 cm	
V	49-52 cm	37-40 cm	
VI	52-56 cm	40-43 cm	
VII	56-58 cm	43-46 cm	
Altezza 30 cm			
Codice d'ordine: M.615			

GENUMEDI® PSS

GINOCCHIERA ELASTICA
CON PRESSORE SOTTOROTULEO INTEGRATO



- STRUTTURA**
- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante
 - in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - senza cuciture
 - dotata di silicone antiscivolo interno
 - con foro rotuleo coperto
- SNODO/ASTE**
- stecca a spirale mediale e laterale
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- cinghia a strappo sottorotulea che permette la regolazione della pressione sul tendine indipendentemente dalla regolazione posteriore
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- stabilizzatore rotuleo e cuscinetto sottorotuleo in silicone 3D per massaggio
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- infiammazione del tendine rotuleo (Ginocchio del saltatore)
 - sindrome di Osgood-Schlatter
 - sindrome da dolore femoro-rotuleo
 - condropatia e condromalacia rotulea
 - lesioni al tendine del rotuleo
 - artrosi retrorotulea
 - malformazione di rotula
 - sindrome della plica

MISURE		
Taglie	Ø A	Ø B
0	34-37 cm	22-25 cm
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm
Altezza 30 cm		
Codice d'ordine: M.616		

GENUMEDI® PT

GINOCCHIERA ELASTICA
CON SISTEMA DI STIMOLAZIONE MUSCOLARE
PER IL CONTROLLO DELLA ROTULA



- STRUTTURA**
- soft tubolare in materiale elastico latex-free altamente traspirante con fibre d'eucalipto
 - in tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - senza cuciture
 - dotata di silicone antiscivolo interno
 - con foro rotuleo coperto
- SNODO/ASTE**
- stecca a spirale mediale e laterale
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- sistema di regolazione a strappo della spinta sul Trigger-point del vasto laterale
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- anello in silicone 3D per il massaggio e la stimolazione muscolare
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- sindrome del dolore femoro-rotuleo dovuta a squilibrio muscolare
 - cattivo allineamento rotuleo
 - lateralizzazione rotulea
 - rotula ipermobile
 - trattamento post operatorio (stabilizzazione della rotula)

MISURE		
Taglie	Ø A	Ø B
I	37-41 cm	25-28 cm
II	41-43 cm	28-31 cm
III	43-46 cm	31-34 cm
IV	46-49 cm	34-37 cm
V	49-52 cm	37-40 cm
VI	52-56 cm	40-43 cm
VII	56-58 cm	43-46 cm
Altezza 30 cm		
Codice d'ordine: M.614 DX/SX		

FILAMED® 201

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA TUBOLARE IN NEOPRENE



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, senza foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- nessuno
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- lievi distorsioni di ginocchio
 - idrartro o emartro moderato
 - cisti di Baker dolorosa
 - lievi gonalgie
 - borsite sovrarotulea
 - lievi condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE	
Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm
Altezza 32 cm	
Codice d'ordine: FILAMED 201	

FILAMED® 301

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON SUPPORTO PATELLARE



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con fascia patellare di rinforzo e foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- nessuno
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- lievi condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE	
Taglie	Ø Coscia
XS	34-39 cm
S	39-47 cm
M	47-53 cm
L	53-59 cm
XL	oltre 59 cm
Altezza 32 cm	
Codice d'ordine: FILAMED 301	

FILAMED® 401

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE ROTULEO



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- nessuno
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- lievi condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 401

FILAMED® 451

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE CON STECCA
A SPIRALE E STABILIZZATORE ROTULEO



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- stecca a spirale mediale e laterale
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- nessuna

- INDICAZIONI**
- lievi condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 451

FILAMED® 501

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STABILIZZATORE LATERALE A “J”



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e fascia a Y per la trazione rotulea
- SNODO/ASTE**
- stecche a spirale mediali e laterali
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in gomma tubolare a forma di J posizionata lateralmente e tensionabile con due fasce a Y in neoprene a strappo
- CHIUSURA**
- nessuna
- NOTA**
- a richiesta la J potrà essere posizionata verso l'alto o il basso

- INDICAZIONI**
- lievi condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo

MISURE (DX/SX)

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 501 “J”

FILAMED® 601

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE
CON STECCHE A SPIRALE



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo
- SNODO/ASTE**
- doppie stecche a spirale laterale e mediale
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- condropatie femoro-rotulee
 - lievi tendinopatie del rotuleo
 - lieve artrosi femoro-rotulea
 - lieve instabilità post traumatica
 - esiti distorsione ginocchio

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 601

ARTO INFERIORE

ARTO INFERIORE

FILAMED® 701

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero
 - totalmente coperto ed estraibile
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- instabilità post traumatica
 - esiti distorsione ginocchio
 - esiti stabilizzati di traumi al ginocchio
 - traumatismi della rotula
 - lieve o moderata artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 701

FILAMED® 701 AR

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA CON SNODO
POLICENTRICO E INCROCIO SUL CAVO POPLITEO



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo, fasce posteriori sul cavo popliteo che incrociano per limitare l’iperestensione del ginocchio
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero
 - totalmente coperto ed estraibile
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in plastazote a forma di mezzaluna orientabile a 360°
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- coadiuvante nelle sindromi da iperlassità legamentosa (Marfan, Ehlers-Danlos)
 - esiti stabilizzati di lesioni al LCP
 - lievi patologie rotulee
 - lievi condropatie femoro-rotulee

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 701 AR

FILAMED® 701 WRAP

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA APERTA
CON SNODO POLICENTRICO



- STRUTTURA**
- soft in neoprene, con foro rotuleo e popliteo, completamente apribile anteriormente
- SNODO/ASTE**
- policentrico libero
 - totalmente coperto ed estraibile
- TIPOLOGIA REGOLAZIONE**
- nessuna
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- lieve instabilità post traumatica
 - esito distorsione ginocchio
 - esiti stabilizzati di traumi del ginocchio
 - traumatismi della rotula
 - lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
 - lussazione rotulea cronica e non
 - iperpressione rotulea grave
 - gonartrosi lieve o moderata

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–37 cm
S	38–43 cm
M	44–49 cm
L	50–55 cm
XL	57–61 cm
XXL	oltre 62 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 701 WRAP

FILAMED® 801

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante due fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - esiti di distorsioni ginocchio
 - instabilità post traumatica

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	34–39 cm
S	40–45 cm
M	46–51 cm
L	52–57 cm
XL	oltre 58 cm

Altezza 32 cm

Codice d’ordine: FILAMED 801

REGOLAZIONI

Ext.	Flex.	Imm.
0°	0°	0°
10°	10°	10°
20°	20°	20°
30°	30°	30°
45°	45°	45°
	60°	
	75°	
	120°	

FILAMED® 851

LINEA FILAMED®
GINOCCHIERA IN NEOPRENE ARMATA LUNGA
CON SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®



- STRUTTURA**
- soft tubolare in neoprene, con foro rotuleo e popliteo
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio
 - gonartrosi lieve e moderata
 - lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
 - trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
 - instabilità post traumatica

MISURE			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	34–39 cm		0°	0°	0°
S	40–45 cm		10°	10°	10°
M	46–51 cm		20°	20°	20°
L	52–57 cm		30°	30°	30°
XL	oltre 58 cm		45°	45°	45°
Altezza 40 cm				60°	
				75°	
				120°	
Codice d'ordine: FILAMED 851					

GNT-600

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE A 0°



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino a strappo all'esterno
- SNODO/ASTE**
- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- post operatorio della rotula
 - revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
 - immobilizzazione pre/post operatoria del ginocchio

MISURE		
Taglie	Ø Coscia	
S	40–49 cm	
M	48–55 cm	
L	53–68 cm	
Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm		
Codice d'ordine: GNT-600		

GNT-601

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI



- STRUTTURA**
- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
 - imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- post operatorio della rotula
 - revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
 - immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

MISURE	
Universale	
Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm	
Codice d'ordine: GNT-601	

GN-3PAN

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA IMMOBILIZZATRICE 0°
A 3 PANNELLI ECONOMY



- STRUTTURA**
- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
 - imbottitura in tessuto accoppiato con rete traspirante all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- post operatorio della rotula
 - revisione in due tempi protesi ginocchio mobilizzata
 - immobilizzazione pre/post operatoria e post traumatica del ginocchio

MISURE	
Universale	
Altezze 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm	
Codice d'ordine: GN-3PAN	

PTS

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA CON SUPPORTO TIBIALE
PER PCL



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna di cotone all'interno e vellutino grippante all'esterno
 - cuscinetto tibiale anatomico in poliuretano rivestito in cotone
- SNODO/ASTE**
- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post acuto rotture LCP
 - post operatoria ricostruzione LCP
 - trattamento conservativo di instabilità cronica del LCP

MISURE
Universale
Altezze 50 cm, 60 cm
Codice d'ordine: PTS

GNO-970 LEGGY®

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M.



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post operatorio del LCA
 - post operatorio di osteotomie devarizzanti
 - esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
 - lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI	
Corta: per arto <80 cm Altezza 57 cm	Ext.	Flex.
	0°	0°
	10°	10°
Lunga: per arto >80 cm; Altezza 63 cm	20°	20°
	30°	30°
		45°
		60°
		75°
		90°
		105°
		120°
Codice d'ordine: GNO-970		

GNO-970 LEGGY® ECO

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M.



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post operatorio del LCA
 - post operatorio di osteotomie devarizzanti
 - esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
 - lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI	
Corta: per arto <80 cm Altezza 57 cm	Ext.	Flex.
	0°	0°
	10°	10°
Lunga: per arto >80 cm; Altezza 63 cm	20°	20°
	30°	30°
		45°
		60°
		75°
		90°
		105°
		120°
Codice d'ordine: GNO-970 ECO		

GNO-970 LEGGY® COOL

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. SCHELETRICA



- STRUTTURA**
- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post operatorio del LCA
 - post operatorio di osteotomie devarizzanti
 - esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
 - lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI	
Corta: per arto <80 cm Altezza 57 cm	Ext.	Flex.
	0°	0°
	10°	10°
Lunga: per arto >80 cm; Altezza 63 cm	20°	20°
	30°	30°
		45°
		60°
		75°
		90°
		105°
		120°
Codice d'ordine: GNO-970 COOL		

GNO-970 LEGGY® ECO COOL

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. SCHELETRICA



- STRUTTURA**
- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post operatorio del LCA
 - post operatorio di osteotomie devarizzanti
 - esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
 - lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI	
	Ext.	Flex.
Corta: per arto <80 cm	0°	0°
Altezza 57 cm	10°	10°
Lunga: per arto >80 cm;	20°	20°
Altezza 63 cm	30°	30°
	45°	45°
	60°	60°
	75°	75°
	90°	90°
	105°	105°
	120°	120°
Codice d'ordine: GNO-970 ECO COOL		

GNO-970 LEGGY® PLUS

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
 - valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale
- SNODO/ASTE**
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post operatorio del LCA
 - post operatorio di osteotomie devarizzanti
 - esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
 - lesioni capsulari complesse del ginocchio
 - post chirurgico di revisione protesica

MISURE	REGOLAZIONI	
	Ext.	Flex.
Corta: per arto <80 cm	0°	0°
Altezza 57 cm	10°	10°
Lunga: per arto >80 cm;	20°	20°
Altezza 63 cm	30°	30°
	45°	45°
	60°	60°
	75°	75°
	90°	90°
	105°	105°
	120°	120°
Codice d'ordine: GNO-970P		

GNO-970 LEGGY® PLUS ECO

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA LEGGY® R.O.M. CON VALVE



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino grippante all'esterno
 - valve di irrigidimento in polietilene sia laterale che mediale
- SNODO/ASTE**
- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante sei fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post operatorio del LCA
 - post operatorio di osteotomie devarizzanti
 - esiti fratture piatto tibiale, fratture femore distale, ricostruzioni spine tibiali
 - lesioni capsulari complesse del ginocchio
 - post chirurgico di revisione protesica

MISURE	REGOLAZIONI	
	Ext.	Flex.
Corta: per arto <80 cm	0°	0°
Altezza 57 cm	10°	10°
Lunga: per arto >80 cm;	20°	20°
Altezza 63 cm	30°	30°
	45°	45°
	60°	60°
	75°	75°
	90°	90°
	105°	105°
	120°	120°
Codice d'ordine: GNO-970 P ECO		

GNO-960

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA R.O.M. TELESCOPICA



- STRUTTURA**
- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con MTP all'interno e vellutino a strappo all'esterno
- SNODO/ASTE**
- monocentrico con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione con sicura
 - aste in alluminio telescopiche
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo

- INDICAZIONI**
- trattamento post operatorio del LCA
 - post operatorio di osteotomie devarizzanti
 - esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
 - lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI	
	Ext.	Flex.
Universale	0°	0°
Altezza telescopica da 49 cm a 55 cm	10°	10°
	20°	20°
	30°	30°
	45°	45°
	60°	60°
	75°	75°
	90°	90°
	105°	105°
	120°	120°
Codice d'ordine: GNO-960		

FLEX-PRO

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA R.O.M. TELESCOPICA



STRUTTURA

- imbottitura a fasce in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- monocentrico dotato di sicura con regolazione veloce grazie ai pulsanti di selezione, aste in alluminio
- blocco/sblocco rapido a 0°/18°/30°/45°/60°
- aste in alluminio con sistema telescopico dotato di tacche di riferimento

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo
- regolazione telescopica singola della posizione dei passanti asolati

INDICAZIONI

- trattamento post operatorio del LCA
- post operatorio di osteotomie devarizzanti
- esiti fratture piatto tibiale, del femore distale, di ricostruzioni spine tibiali
- lesioni capsulari complesse del ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI		
	Ext.	Flex.	Imm.
Universale			
Altezze telescopica da 49 cm a 55 cm	0°	0°	0°
	10°	10°	20°
	20°	20°	30°
	30°	30°	45°
	45°	45°	60°
	60°	60°	
	75°	75°	
	90°	90°	
		105°	
		120°	

Codice d'ordine: GNO-975

GNO-930

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA POST ARTROSCOPIA



STRUTTURA

- soft, completamente apribile, in tessuto con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- sacca removibile porta ghiaccio agganciata a strappo

SNODO/ASTE

- nessuno

CHIUSURA

- mediante tre bande con sistema a strappo

INDICAZIONI

- post artroscopia di ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI		
	Ext.	Flex.	Imm.
Universale			
Altezza 40 cm			

Codice d'ordine: GNO-930

M.4®s PCL DYNAMIC

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER PCL



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno
- sistema di spinta tibiale regolabile con sistema epicicloidale

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo numerate regolabili e sistema di tensionamento epicicloidale per il cuscinetto tibiale

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni del legamento crociato posteriore
- trattamento conservativo delle lesioni capsulo legamentose complesse
- trattamento post operatorio nella ricostruzione del legamento crociato posteriore

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	0°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°		
Altezza 50 cm			75°		
			90°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S-PCL

M.4®s COMFORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE®



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
- coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
- coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B	Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm	-5°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm	10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm	20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm	30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm	45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm	60°		
Altezza 40 cm			75°		
			90°		
			120°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S-COM bianco; M.4S-COM N nero



M.4®s COMFORT SHORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO PHYSIOGLIDE®



- STRUTTURA**
- rigida short in alluminio modellabile
 - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
 - imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
 - cappuccio di protezione Easy Click
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

- INDICAZIONI**
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
 - coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
 - coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

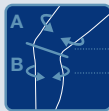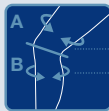MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31-37 cm	25-27 cm		-5°	0°	0°
S	37-45 cm	27-32 cm		10°	10°	10°
M	45-51 cm	32-37 cm		20°	20°	20°
L	51-57 cm	37-41 cm		30°	30°	30°
XL	57-65 cm	41-47 cm		45°	45°	45°
XXL	65-74 cm	47-50 cm		60°		
Altezza 34 cm				75°		
				90°		
				120°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4S SHORT



M.4®s X LOCK

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CON
SNODO PHYSIOGLIDE® E SISTEMA DI BLOCCO A 0°



- STRUTTURA**
- rigida in alluminio modellabile
 - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
 - imbottiture e cuscinetti di appoggio in materiale idrorepellente all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- policentrico Physioglide con regolazione mediante stop senza viti di fissaggio
 - cappuccio di protezione Easy Click
 - leva rapida di blocco/sblocco snodo a 0°
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

- INDICAZIONI**
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
 - coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
 - coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati
 - trattamento post traumatico acuto di lesioni capsulo legamentose immediato post operatorio del ginocchio

MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI			
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.	
XS	31–37 cm	25–27 cm		0°	0°	0°	
S	37–45 cm	27–32 cm		10°	10°	10°	
M	45–51 cm	32–37 cm		20°	20°	20°	
L	51–57 cm	37–41 cm		30°	30°	30°	
XL	57–65 cm	41–47 cm		45°	45°	45°	
XXL	65–74 cm	47–50 cm			60°		
Altezza 40 cm					75°		
					90°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine: M.4 S X.LOCK

PROTECT 4 EVO

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



- STRUTTURA**
- rigida in alluminio modellabile
 - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
 - imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
 - cappuccio di protezione con chiusura a vite
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

- INDICAZIONI**
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
 - coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
 - coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI			
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.	
XS	31-37 cm		0°	0°	0°	
S	37-45 cm		10°	10°	10°	
M	45-51 cm		20°	20°	20°	
L	51-57 cm		30°	30°	30°	
XL	57-65 cm		45°	45°	45°	
XXL	65-74 cm		60°			
Altezza 40 cm			75°			
			90°			

Codice d'ordine: PRO4-EVO

PROTECT 4 SHORT

LINEA FUNZIONALI
GINOCCHIERA FUNZIONALE A 4 PUNTI CORTA
PER ACL PCL CI CON SNODO POLICENTRICO



- STRUTTURA**
- rigida short in alluminio modellabile
 - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
 - imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
 - cappuccio di protezione con chiusura a vite
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

- INDICAZIONI**
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse
 - coadiuvante nell'attività sportiva nel post operatorio del ginocchio
 - coadiuvante dell'attività sportiva per lesioni non operate, prevenzione nella lesione parziale dei crociati

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Taglie	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm		0°	0°	0°
S	37–45 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm		45°	45°	45°
XXL	65–74 cm		60°		
Altezza 34 cm			75°		
			90°		

Codice d'ordine: PROTECT 4 S

M.4®s OA

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



Chiave a brugola
inclusa per regolazioni
personalizzabili

STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO



- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

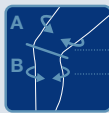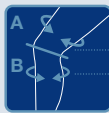MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI			
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.	
XS	31–37 cm	25–27 cm		0°	0°	0°	
S	37–45 cm	27–32 cm		10°	10°	10°	
M	45–51 cm	32–37 cm		20°	20°	20°	
L	51–57 cm	37–41 cm		30°	30°	30°	
XL	57–65 cm	41–47 cm		45°	45°	45°	
XXL	65–74 cm	47–50 cm		60°			
Altezza 40 cm				75°			
				90°			

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.4S OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

M.4®s OA SHORT

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO CORTA



STRUTTURA

- rigida short in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide bilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- con cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO


- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm	25–27 cm	0°	0°	0°	
S	37–45 cm	27–32 cm	10°	10°	10°	
M	45–51 cm	32–37 cm	20°	20°	20°	
L	51–57 cm	37–41 cm	30°	30°	30°	
XL	57–65 cm	41–47 cm	45°	45°	45°	
XXL	65–74 cm	47–50 cm		60°		
Altezza 34 cm				75°		
				90°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.4S OA SH Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

PROTECT 4 OA

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- fibbie di fissaggio fasce a strappo in acciaio
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in morbido vellutino grippante

SNODO/ASTE

- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
- cappuccio di protezione con chiusura a vite

STABILIZZATORE ROTULEO


- nessuno

CHIUSURA

- mediante 6 fasce a strappo regolabili

INDICAZIONI

- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- varo/valgo costituzionale doloroso
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

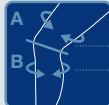MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm	25–27 cm	0°	0°	0°	
S	37–45 cm	27–32 cm	10°	10°	10°	
M	45–51 cm	32–37 cm	20°	20°	20°	
L	51–57 cm	37–41 cm	30°	30°	30°	
XL	57–65 cm	41–47 cm	45°	45°	45°	
XXL	65–74 cm	47–50 cm		60°		
Altezza 40 cm				75°		
				90°		

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

PRO4 OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

M.3®s

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
MONOCOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile con inserti in acciaio armonico, dotata di spinta laterale con regolazione personalizzabile
- fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
- imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno

SNODO/ASTE

- policentrico Physioglide unilaterale e regolazione con stop fissati a vite
- cappuccio di protezione Easy Click

STABILIZZATORE ROTULEO

- nessuno

CHIUSURA



- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

NOTE

- dotata di cuscino pneumatico gonfiabile secondo le necessità

INDICAZIONI

- varo/valgo costituzionale doloroso
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
- trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
- gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
- trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI			
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.	
XS	31–37 cm	25–27 cm		0°	0°	0°	
S	37–45 cm	27–32 cm		10°	10°	10°	
M	45–51 cm	32–37 cm		20°	20°	20°	
L	51–57 cm	37–41 cm		30°	30°	30°	
XL	57–65 cm	41–47 cm		45°	45°	45°	
XXL	65–74 cm	47–50 cm		60°			
Altezza 40 cm				75°			
				90°			

NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.

Codice d'ordine:

M.3 S Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX

LIGHT OA

LINEA OA
GINOCCHIERA PER OSTEOARTROSI



- STRUTTURA**
- tubolare con parte superiore a Wrap
 - tessuto Phylo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
 - cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
 - silicone interno per una maggiore stabilità
 - rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto
- SNODO/ASTE**
- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
 - snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con asta superiore anteposta e valva di stabilizzazione
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- chiusura superiore wrap personalizzabile
 - cinghie anteriori di tensionamento a strappo numerate e personalizzabili dotate di scala numerata per la giusta regolazione
 - cinghie posteriori a strappo posizionate fuori dalla regione poplitea

- INDICAZIONI**
- modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
 - trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
 - trattamento distorsioni di ginocchio o varo/valgo post traumatico
 - varo/valgo artrosico lieve, moderato o costituzionale doloroso

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm		0°	45°	45°
S	37–45 cm		10°	60°	
M	45–51 cm		20°	75°	
L	51–57 cm		30°	90°	
XL	57–65 cm		45°		
XXL	65–74 cm				
Altezza 40 cm					
Codice d'ordine: LIGHT OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX					

SOFT OA

LINEA OA
GINOCCHIERA PER OSTEOARTROSI



- STRUTTURA**
- tubolare con parte superiore a Wrap
 - tessuto Phylo-Touch in nanofibra traspirante con effetto 3D Made in FGP
 - cuciture piatte e cucitura anteriore/laterale non tibiale
 - silicone interno per una maggiore stabilità
 - rete posteriore sul cavo popliteo con copertura interna in morbido tessuto
- SNODO/ASTE**
- snodo dinamico brevettato in tecnopolimero che si attiva solo nel momento di piena estensione del ginocchio
 - snodo controlaterale policentrico regolabile in alluminio con anteposizione della parte femorale
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- 4 fasce a strappo numerate regolabili: 2 esterne sagomate e 2 interne con aggancio facilitato allo snodo

- INDICAZIONI**
- varo/valgo costituzionale doloroso
 - controllo del varo/valgo artrosico non operabile
 - trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
 - gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
 - trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)			REGOLAZIONI		
Tg.	Ø Coscia		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm		-5°	0°	0°
S	37–45 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm		45°	45°	45°
XXL	65–74 cm		60°		
Altezza 43 cm			75°		
			90°		
			120°		
Codice d'ordine: SOFT OA Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX					

M.4®s OA COMFORT

LINEA OA
GINOCCHIERA AD AGGIUSTAMENTO CALIBRATO
BICOMPARTIMENTALE PER VARO-VALGO



- STRUTTURA**
- rigida in alluminio modellabile con sistema di personalizzazione
 - giunti elastici delle arcate superiori e inferiori adattabili alle conformazioni
 - giuntura in diagonale per garantire adattabilità
 - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo flessibili in tecnopolimero
 - imbottitura e cuscinetti in appoggio in tessuto accoppiato morbido e confortevole
- SNODO/ASTE**
- snodo policentrico regolabile con asta femorale anteposta e cappuccio Easy Click
 - Sistema di regolazione spinta varo/valgo facile e chiara grazie alla nuova grafica
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante 6 fasce a scatto numerate e regolabili

- INDICAZIONI**
- controllo del varo/valgo artrosico non operabile
 - trattamento conservativo di deformità acquisite post traumatiche
 - gonartrosi (pre operatorio o post operatorio)
 - varo/valgo costituzionale doloroso
 - trattamento conservativo delle lesioni dei legamenti crociati e/o delle lesioni capsulo legamentose complesse

MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm	25–27 cm		0°	0°	0°
S	37–45 cm	27–32 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm	32–37 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm	37–41 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm	41–47 cm		45°	45°	45°
XXL	65–74 cm	47–50 cm		60°		
Altezza 40 cm				75°		
				90°		
NB: le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Pertanto ordinazioni relative a misurazioni diverse (es.: Ø superiore L, Ø inferiore M), verranno considerate PERSONALIZZAZIONI, con un costo aggiuntivo sul prezzo del listino.						
Cod. ordine: M.4S OA COMF Varo DX/Valgo SX/Varo SX/Valgo DX						

M.4® ANTIRECURVATUM

LINEA RECURVATUM
GINOCCHIERA FUNZIONALE PER RECURVATUM



- STRUTTURA**
- rigida in alluminio modellabile
 - fibbie di fissaggio delle fasce a strappo in acciaio
 - imbottiture e cuscinetti di appoggio in tessuto accoppiato con spalmatura antiscivolo all'interno e morbido vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- policentrico con regolazione mediante stop con viti di fissaggio
 - cappuccio di protezione con chiusura a vite
 - sistema ARBS di ammortizzamento progressivo mediante gommini a shore differenziati
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- mediante 6 fasce a strappo numerate regolabili

- INDICAZIONI**
- controllo del genus recurvatum

MISURE (DX/SX)				REGOLAZIONI		
Tg.	Ø A	Ø B		Ext.	Flex.	Imm.
XS	31–37 cm	25–27 cm		0°	0°	0°
S	37–45 cm	27–32 cm		10°	10°	10°
M	45–51 cm	32–37 cm		20°	20°	20°
L	51–57 cm	37–41 cm		30°	30°	30°
XL	57–65 cm	41–47 cm		45°		
XXL	65–74 cm	47–50 cm		60°		
Altezza 40 cm				75°		
				90°		
Le taglie si riferiscono a misurazioni standard. Consigliamo uso modulo prese misure per prodotto personalizzato, senza nessun costo aggiuntivo.						
Codice d'ordine: M.4 ARBS				Kit di regolazione come accessorio su richiesta.		

PROTEZIONI



A. CAP 100
PROTEZIONE ROTULEA PER GINOCCHIERE FUNZIONALI
Protezione della rotula negli sport a rischio (motocross, etc.)
MISURE: universale



B. VAL 100
VALVE DI PROTEZIONE
per **GNO 970 LEGGY®** e **GNO 970 LEGGY® ECO**

STABILIZZATORI ROTULEI



A. STABILIZZATORE ROTULEO
cuscinetto stabilizzante per rotula in plastazote



B. STABILIZZATORE ROTULEO
cuscinetto stabilizzante per rotula grippante in schiuma di polietilene



C. STABILIZZATORE ROTULEO
cuscinetto stabilizzante ad anello per rotula in silicone
MISURE: piccolo, grande

SNODI PER GINOCCHIERE



A. SNODO POLICENTRICO
non regolabile con blocco in estensione per
PHYLO® 74, PHYLO® 75



B. SNODO POLICENTRICO PIATTO
per **STABIMED PRO PHYLOTEK®** (colore nero), **PHYLO® 76**,
PHYLO® 76 A, **FILAMED® 701**, **FILAMED® 701 WRAP**
e **FILAMED® 701 AR**



C. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE® PIATTO
per **FILAMED® 801**
Versione lunga **FILAMED® 851**



D. SNODO POLICENTRICO PHYSIOGLIDE®
per **STABIMED PHYLOTEK®**
Nella versione con aste lunghe per **COLLAMED PHYLOTEK®**



E. SNODO POLICENTRICO REGOLABILE
per **PHYLO® 72, PHYLO® 72 A**
Nella versione con aste lunghe per **ARTHROFIX PHYLO®**



CVO-700 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M.



CVO 710

- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
 - articolazione R.O.M. della dorso flessione da +20° a -40° e della pianta flessione da -20° a +40°, ogni 10°; immobilizzazione a 10° e 20°
 - aste disponibili in versione lunga e corta
 - suola antiscivolo con conformazione a barca
- CHIUSURA**
- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-700
 - frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-710

- INDICAZIONI**
- distorsioni di caviglia I, II, III grado
 - esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
 - trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
 - esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
 - post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)			
Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-700	
S	32-38	41 cm	
M	38-43	43 cm	
L	43-48	46 cm	
Altezza per CVO-710 BOOTY SHORT 35 cm			
Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.			
Codici d'ordine: CVO-700 normale; CVO-710 short			

CVO-700 ECO

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
REGOLABILE R.O.M. ECONOMY



CVO 700P ECO

- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino grippante all'interno ed all'esterno per CVO-700 ECO
 - imbottitura in tessuto accoppiato con vellutino e interno pneumatico gonfiabile con pompa nella versione CVO-700P ECO
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
 - articolazione R.O.M. regolabile mediante pin
 - suola antiscivolo con conformazione a barca
 - regolazione dell'articolazione R.O.M. della dorso flessione da 0° a 45° e della pianta flessione da 0° a 45°ogni 7.5 e possibilità di immobilizzazione a 0°-7.5°-15°-22.5°-30°-37.5°-45°
- CHIUSURA**
- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio

- INDICAZIONI**
- distorsioni di caviglia I, II, III grado
 - esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
 - trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
 - esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
 - post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)			
Tg.	Calzata scarpa		
S	36-39		
M	40-42		
L	43-45		
XL	Oltre 45		
Altezza 40 cm			
Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.			
Codici d'ordine: CVO-700 ECO normale; CVO-700P ECO pneumatico			

CVO-750 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA FISSO A 0°



CVO 720

- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- scafo esterno in alluminio leggero ad alta resistenza
 - aste disponibili in versione lunga e corta
 - suola antiscivolo con conformazione a barca
- CHIUSURA**
- frontale a strappo dell'imbottitura e 5 fasce di fissaggio per CVO-750
 - frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio per CVO-720

- INDICAZIONI**
- distorsioni di caviglia I, II, III grado
 - esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
 - trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
 - esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
 - post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)			
Tg.	Calzata scarpa	Altezza CVO-750	
S	32-38	39 cm	
M	38-43	42 cm	
L	43-48	44 cm	
Altezza per CVO-720 BOOTY SHORT 35 cm			
Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.			
Codici d'ordine: CVO-750 normale; CVO-720 short			

CVO 750 ECO DELUX

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA
ECONOMY



NUOVO

- STRUTTURA**
- imbottitura pneumatica in tessuto accoppiato con vellutino grippante all'interno e all'esterno
 - plantare traspirante e lavabile in materiale shock-absorbing
 - kit di imbottiture per aumentare il comfort o removibili per aumentare l'ampiezza medialelaterale
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- un unico pezzo composto da scafo e guscio in tecnopolimero ad alta resistenza con zone traspiranti
 - suola antiscivolo con conformazione a barca
 - pannello frontale flessibile e removibile
 - protezione delle dita regolabile e removibile
- CHIUSURA**
- frontale a strappo dell'imbottitura e 4 fasce di fissaggio

- INDICAZIONI**
- distorsioni di caviglia I, II, III grado
 - esiti trattamento conservativo frattura del perone, fratture di astragalo, di calcagno, della base V metatarso
 - trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
 - esiti stabilizzati lussazione articolazione di Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
 - post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)			
Tg.	Calzata scarpa		
S	36-40		
M	40-44		
L	44-47		
Altezza 38 cm			
Il dispositivo non è indicato per pazienti con peso superiore ai 110 kg.			
Codici d'ordine: CVO-750 ECO N			

D.T3-CVT

CAVIGLIERA TRASPIRANTE CON BENDAGGIO AD 8 STABILIZZANTE



- STRUTTURA**
- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8 realizzato in materiale elastico
- CHIUSURA**
- a strappo posizionata anteriormente
 - ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH

- INDICAZIONI**
- caviglia dolorosa
 - versamento intrarticolare tibio tarsico
 - instabilità acute e croniche di caviglia
 - esito protesi caviglia
 - recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
 - tendinopatie

MISURE	
Taglie	Ø Collo piede
XS	24-26 cm
S	27-29 cm
M	30-32 cm
L	33-35 cm
XL	36-38 cm



Codice d'ordine: DT3-CVT

8LIGHT

CAVIGLIERA CON BENDAGGIO AD 8




- STRUTTURA**
- tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità, leggerezza, traspirabilità ed aderenza
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- bendaggio ad 8 realizzato in materiale altamente elastico
- CHIUSURA**
- a strappo posizionata posteriormente
- NOTE**
- disponibile in colore nero e skin

- INDICAZIONI**
- caviglia dolorosa
 - versamento intrarticolare tibio tarsico
 - instabilità acute e croniche di caviglia
 - esito protesi caviglia
 - recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
 - tendinopatie

MISURE	
Taglie	Ø Collo piede
S	24-28 cm
M	28-33 cm
L	33-38 cm



Codice d'ordine: CL8-100 nero; CL8-200 skin

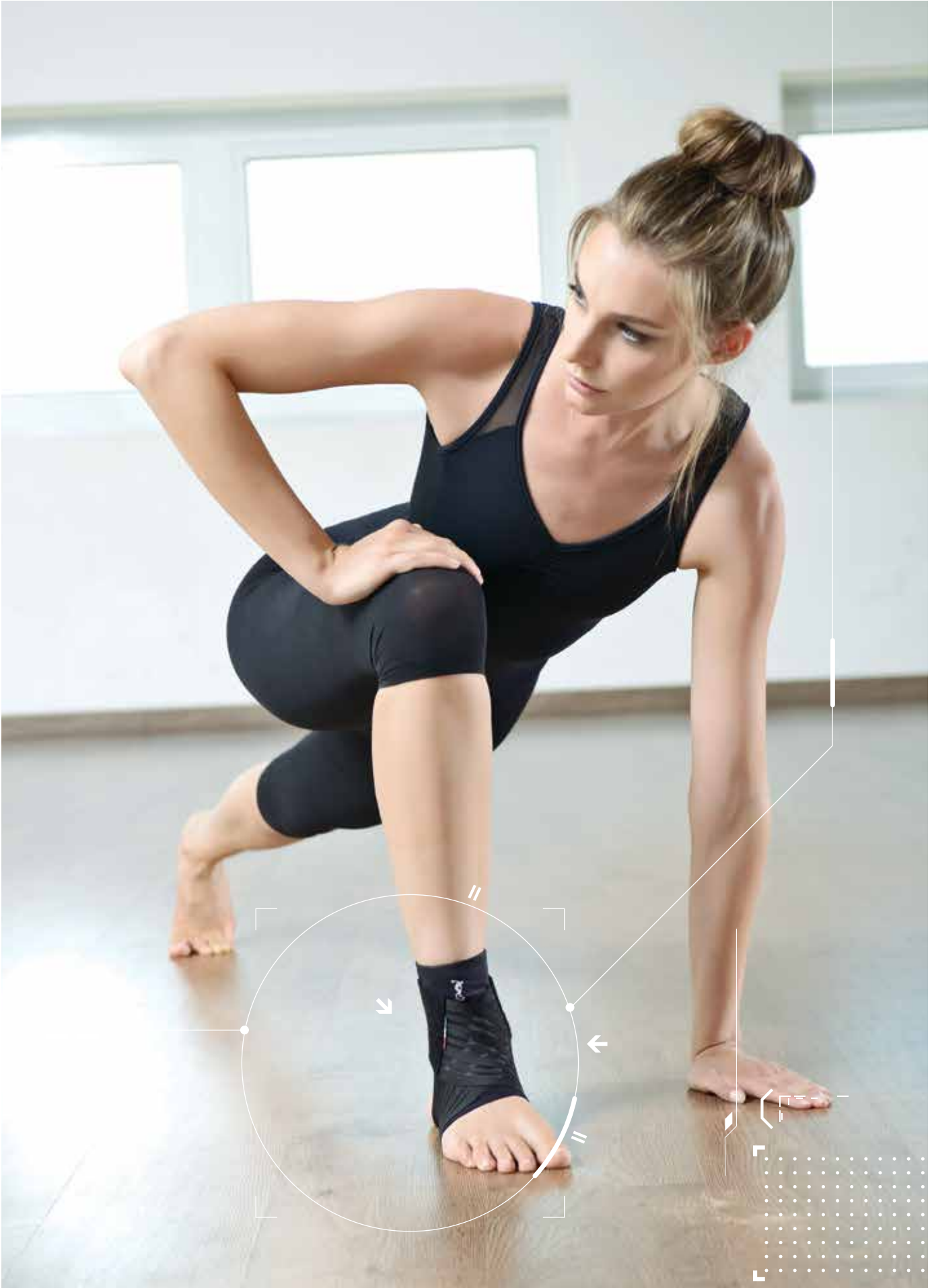

ARTO INFERIORE

ARTO INFERIORE

CVO-800 ANKLE STABIL

CAVIGLIERA STABILIZZANTE CON PLACCHE MALLEOLARI



- STRUTTURA**
- in poliestere con tallone aperto
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- placche malleolari in materiale plastico estraibili
- CHIUSURA**
- a laccio

- INDICAZIONI**
- distorsioni di I, II, III grado
 - esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
 - instabilità laterale di caviglia
 - prevenzione nella recidiva di distorsione
 - coadiuvante nel recupero sportivo
 - stabilizzazione di caviglia artrosica
 - esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	37-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46

Codice d'ordine: CVO-800

CVO-400

TUTORE PER CAVIGLIA E PIEDE CIONDOLANTE



- STRUTTURA**
- in polietilene flessibile con imbottitura sul polpaccio
- CHIUSURA**
- a strappo mediante cinturino
- NOTA**
- il materiale può essere ritagliato a misura e modellato

- INDICAZIONI**
- trattamento del piede ciondolante

MISURE (DX/SX)

Uomo - **Altezza** 34 cm

Donna - **Altezza** 31 cm

Codice d'ordine: CVO-400

LEVAMED® 508

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE



- STRUTTURA**
- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - conformazione anatomica senza cuciture
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio
- CHIUSURA**
- no

- INDICAZIONI**
- caviglia dolorosa
 - versamento intrarticolare tibio tarsico
 - instabilità lievi e croniche di caviglia
 - esito protesi caviglia
 - recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
 - tendinopatie

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm

Codice d'ordine: M.508

LEVAMED® E+ MOTION

CAVIGLIERA ELASTICA CON SUPPORTO IN SILICONE EMOTION



- STRUTTURA**
- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore
 - tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
 - conformazione anatomica senza cuciture
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- cuscinetti in silicone con fibre di quarzo retromalleolari integrati con design in 3D per massaggio
- CHIUSURA**
- no

- INDICAZIONI**
- caviglia dolorosa
 - versamento intrarticolare tibio tarsico
 - instabilità lievi e croniche di caviglia
 - esito protesi caviglia
 - recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
 - tendinopatie

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm

Codice d'ordine: M.508E

LEVAMED® ACTIVE

CAVIGLIERA ELASTICA CON SISTEMA DI CINGHIE STABILIZZANTI



STRUTTURA

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture
- dotata di sistema di fasce a strappo per garantire la stabilità all'articolazione e controllare la supinazione

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone retromalleolari integrati

CHIUSURA

no

NOTE

- la cavigliera, se necessario, può essere indossata senza il sistema di fasce stabilizzanti

INDICAZIONI

- funzionalità ridotta dei legamenti nell'articolazione tibio-tarsale
- insufficienza legamentosa
- protezione da ulteriori distorsioni, in particolare nell'attività sportiva
- stati infiammatori dell'articolazione tibio-tarsale (acuti o cronici, post traumatici o post operatori)
- lievi lesioni della sindesmosi

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm

Codice d'ordine: M.508ACTIVE

ACHIMED®

CAVIGLIERA ELASTICA PER IL TENDINE D'ACHILLE CON SUPPORTI IN SILICONE



STRUTTURA

- in materiale elastico con compressione propriocettiva altamente traspirante e termoregolatore con fibre di eucalipto
- tessuto Medi® con sistema Climafresh e Climacomfort
- conformazione anatomica senza cuciture

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- cuscinetti in silicone integrati

CHIUSURA

- no

NOTE

- dotata di una coppia di tallonette in silicone per ridurre le tensioni del tendine d'Achille

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie achilodinia; borsite del tendine di Achille.

MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm

Codice d'ordine: M.511

CAVIGLIERA M 501

CAVIGLIERA ELASTICA POLIESTENSIVA



STRUTTURA

- anatomica in materiale elastico bidirezionale (compressione di classe 2)
- conformazione anatomica
- tramatura differenziata sul tallone

STRUTTURA STABILIZZATRICE

- no

CHIUSURA

- no

INDICAZIONI

- caviglia dolorosa
- versamento intrarticolare tibio tarsico
- instabilità lievi e croniche di caviglia
- esito protesi caviglia
- recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
- tendinopatie


MISURE (ambidestro)

Taglie	Ø Caviglia
I	17-20 cm
II	20-22 cm
III	22-24 cm
IV	24-26 cm
V	26-28 cm
VI	28-30 cm

Codice d'ordine: M.501

CVO-730 KIT

SET DI 3 CUNEI DI PRONAZIONE
PER TUTORE WALKER

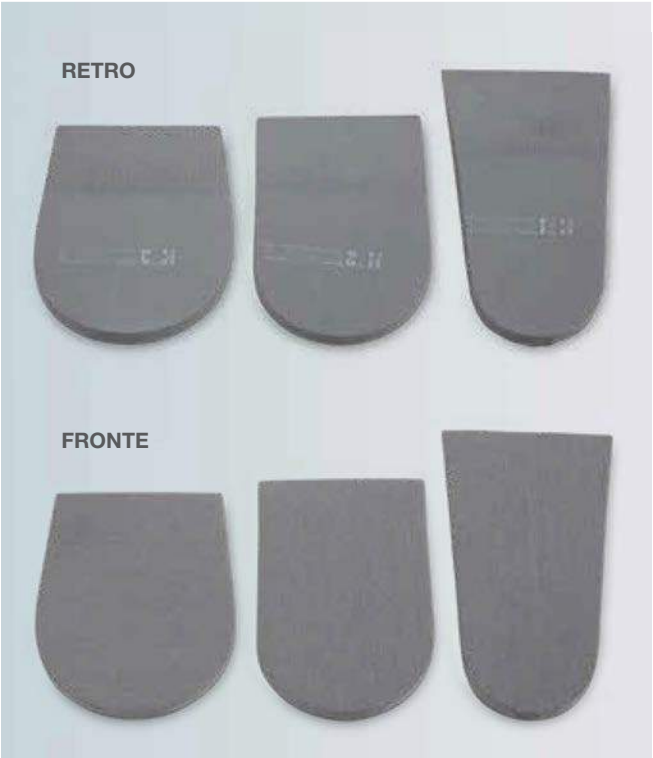

- STRUTTURA**
- kit composto da 3 cunei di pronazione di 10° ciascuno utilizzabili anche in combinata
 - realizzati in gomma sintetica
- NOTE**
- accessori per CVO 750, CVO 750 ECO, CVO 720

- INDICAZIONI**
- coadiuvante nel trattamento riabilitativo del tendine di Achille

MISURE

S	32–38
M	38–43
L	43–48

Codice d'ordine: CVO-730 KIT

SWI-BAS

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
MONOPODALICA



- STRUTTURA**
- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone in poliuretano
 - tavoletta monopodolica

- INDICAZIONI**
- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia

MISURE

Singola - unica

Codice d'ordine: SWI-BAS

SWI-TWO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
BIPODALICA



- STRUTTURA**
- in materiale plastico, zigrinato e dotato di tampone
 - tavoletta a ufo bipodolica

- INDICAZIONI**
- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia

MISURE

Singola - unica
(diametro 36 cm)

Codice d'ordine: SWI-TWO

SWI-PRO

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA
MONOPODALICA CON LASER



- STRUTTURA**
- in materiale plastico, zigrinato, dotato di rullo in gomma orientabile a 360° e di un puntatore a luce laser
 - tavoletta monopodolica
- NOTE**
- la luce laser permette di compiere molteplici esercizi riabilitativi e creare programmi personalizzati per spalla, anca e caviglia (metodo Perfetti)

- INDICAZIONI**
- coadiuvante nella riabilitazione della caviglia e della spalla

MISURE

Singola - unica

PER USO PROFESSIONALE

Codice d'ordine: SWI-PRO



STRUTTURA

- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®

PRESSORE

- in materiale ad alta densità posizionabile nella zona desiderata, con fascia di tensionamento a strappo

NOTE

- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

INDICAZIONI

- lievi epicondiliti o epitrocleiti
- trattamento conservativo della borsite olecranica
- esito rottura tendine distale del bicipite brachiale
- esito protesi capitello radiale
- esiti stabilizzati di fratture e lussazioni del gomito
- post operatorio nelle artroscopie di gomito

MISURE

Taglie	Ø Avambraccio
XS	18–22 cm
S	22–26 cm
M	26–30 cm
L	30–35 cm

Altezza 24,5 cm



5 cm
dal gomito

Codice d'ordine: FFG-300

COSCIALE

SUPPORTO PER COSCIA
FULLFIT®



- STRUTTURA**
- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®
 - dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità
- NOTE**
- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN antibatterico, in grado di mantenere il naturale equilibrio della pelle

- INDICAZIONI**
- trattamento delle contratture muscolari della coscia
 - coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
 - esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	40–45 cm
S	45–50 cm
M	50–56 cm
L	56–62 cm
XL	62–68 cm

Altezza anteriore 23 cm

Codice d'ordine: FFC-100

GINOCCHIERA

GINOCCHIERA TUBOLARE SAGOMATA
FULLFIT®



- STRUTTURA**
- soft tubolare in tessuto double-layer FGP FullFit® con sagomatura anatomica
 - dotata di particolare fascia siliconata interna superiore per garantire maggiore stabilità
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- nessuno
- CHIUSURA**
- nessuna
- NOTE**
- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio antibatterico della pelle

- INDICAZIONI**
- lievi distorsioni di ginocchio
 - idrartro o emartro moderato
 - cisti di Baker dolorosa
 - lievi gonalgie

MISURE

Taglie	Ø Coscia
XS	31–38 cm
S	38–45 cm
M	45–52 cm
L	52–59 cm
XL	59–66 cm
XXL	66–74 cm

Altezza 31,5 cm

Codice d'ordine: FFK-400

POLPACCERA

SUPPORTO PER POLPACCIO
FULLFIT®



- STRUTTURA**
- soft in tessuto double-layer FGP FullFit® anatomica
- NOTE**
- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

- INDICAZIONI**
- trattamento delle contratture muscolari del polpaccio
 - coadiuvante nel trattamento degli stiramenti muscolari
 - esiti di strappi muscolari nella ripresa sportiva

MISURE

Taglie	Ø Polpaccio
S	32–36 cm
M	36–40 cm
L	40–44 cm
XL	44–48 cm

Altezza 29 cm

Codice d'ordine: FFP-200

CAVIGLIERA

CAVIGLIERA SEMPLICE
FULLFIT®



- STRUTTURA**
- soft in tessuto double-layer FGP FullFit®
- CHIUSURA**
- no
- NOTE**
- il materiale è stato realizzato con filo QSKIN, in grado di mantenere il naturale equilibrio batterico della pelle

- INDICAZIONI**
- caviglia dolorosa
 - versamento intrarticolare tibio tarsico
 - instabilità lievi e croniche di caviglia
 - esito protesi caviglia
 - recupero dell'attività sportiva post traumatica e post chirurgica
 - tendinopatie

MISURE

Taglie	Ø Caviglia
S	16–20 cm
M	20–24 cm
L	24–28 cm
XL	28–33 cm

Codice d'ordine: FFA-500

L I N E A K I D Z

CLC-100K

COLLARE CERVICALE MORBIDO
PEDIATRICO



- STRUTTURA**
- gommapiuma ad alta densità rivestita con maglina in lycra
- MENTONIERA**
- assente
- FORO TRACHEALE**
- assente
- RADIOTRASPARENTE**
- sì
- CHIUSURA**
- a strappo

- INDICAZIONI**
- cervicalgia
 - traumi distorsivi del rachide cervicale
 - cervico brachialgie con o senza vertigini
 - coadiuvante nel trattamento del torcicollo miogeno

MISURE			
Taglie	Ø Collo	Altezza	
1°	18–22 cm	5 cm	
2°	22–28 cm	6 cm	
3°	28–33 cm	7 cm	
Codice d'ordine: CLC-100K			

DTX-03K

POLSIERA STECCATA PEDIATRICA



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
 - rinforzi laterali in polietilene
- STRUTTURA**
- morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno
 - completamente apribile
- CHIUSURA**
- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
 - ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione
- NOTE**
- per circonferenza polso superiore a 15 cm vedere prodotto con codice DT3-02

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - esiti fratture legno verde
 - esiti distacchi epifisari

MISURE (DX/SX)			
Taglie	Ø Polso	Altezza	
1°	10–11 cm	13 cm	
2°	11–13 cm	14 cm	
3°	13,5–14,5 cm	15 cm	
4°	oltre 15 cm	16 cm	
Codice d'ordine: DTX-03K			

DTX-04K

POLSIERA STECCATA LUNGA
PEDIATRICA



- STECCATURA**
- palmare in alluminio modellabile
 - rinforzi laterali in polietilene
- STRUTTURA**
- morbido tessuto in vellutino con monospugna all'interno
 - completamente apribile
- CHIUSURA**
- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
 - ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione
- NOTE**
- per circonferenza polso superiore a 15 cm vedere prodotto con codice DTX-06

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi moderati e severi del polso
 - tendiniti flessori ed estensori
 - esiti fratture del polso
 - post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
 - esiti fratture legno verde
 - esiti distacchi epifisari

MISURE (DX/SX)			
Taglie	Ø Polso	Altezza	
1°	10–11 cm	16 cm	
2°	11–13 cm	18 cm	
3°	13,5–14,5 cm	20 cm	
4°	oltre 15 cm	22 cm	
Codice d'ordine: DTX-04K			

RGB-100K

REGGIBRACCIO SEMPLICE
PEDIATRICO



- STRUTTURA**
- soft con sacca in morbido tessuto in vellutino e monospugna all'interno
 - fascia spalla in nastro jaquard regolabile con sistema a strappo
 - dotato di imbottitura per protezione collo
- CHIUSURA**
- a strappo

- INDICAZIONI**
- post trauma spalla e gomito

MISURE	
Taglie	
1°	da 3 a 8 anni
2°	da 8 a 12 anni
Codice d'ordine: RGB-100K	

IMB-200K

IMMOBILIZZATORE BRACCIO
E SPALLA PEDIATRICO



STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO

- in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con gomito libero
- dotato di fascia di immobilizzazione in vellutino

STRUTTURA CINGHIAGGIO

- in vellutino imbottito

INDICAZIONI

- lussazioni gleno-omerali
- post operatorio di fratture diafisarie e prossimale di omero
- traumi distorsivi moderati e severi della spalla
- trattamento distacchi epifisari composti della testa omerale
- fratture composte di clavicola

MISURE

Taglie

1°

da 3 a 8 anni

2°

da 8 a 12 anni

Codice d'ordine: IMB-200K

RDS-100K

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE
PEDIATRICO



STRUTTURA BASE

- della spinta posteriore in monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- cinghiaggio spalle in nastro jaquard regolabile con sistema a strappo e tubolare di protezione nella zona ascellare

INDICAZIONI

- trattamento delle fratture di clavicola (conservativo o chirurgico)
- lussazioni acromion claveari

MISURE

Taglie

1°

da 3 a 5 anni

2°

da 5 a 8 anni

3°

da 8 a 12 anni

Codice d'ordine: RDS-100K

EPICO-REVOK

TUTORE PER GOMITO R.O.M.
PEDIATRICO



STRUTTURA

- rigida in alluminio modellabile
- imbottitura realizzata in vellutino esternamente e monospugna all'interno
- supporto palmare regolabile
- cintura spalla regolabile con tubolare di protezione collo

TIPOLOGIA REGOLAZIONE

- snodo R.O.M. di dimensioni contenute
- regolabile mediante un semplice tasto
- disponibili 13 settaggi per flessione, estensione, immobilizzazione (con regolazione ogni 10°)

PRONO-SUPINAZIONE POLSO

- fissa

CHIUSURA

- a strappo

INDICAZIONI

- esiti fratture sovracondiloidee dell'omero
- esiti distacchi epifisari del gomito
- lussazione traumatica del gomito
- esiti fratture biossee dell'avambraccio
- esiti fratture di gomito

MISURE (DX/SX)

Universale

REGOLAZIONI

Ext.

Flex.

Imm.

0°

0°

0°

10°

10°

10°

20°

20°

20°

30°

30°

30°

40°

40°

40°

50°

50°

50°

60°

60°

60°

70°

70°

70°

80°

80°

80°

90°

90°

90°

100°

100°

100°

110°

110°

110°

120°

120°

120°

Codice d'ordine: EPICO-REVOK

IMA-KIDZ

DIVARICATORE D'ANCA PEDIATRICO



STRUTTURA

- corpetto regolabile grazie alla fascia ritagliabile
- dotato di chiusure a strappo
- stivaletti removibili con morbida spugna all'interno
- tessuto anallergico e traspirante per il massimo del comfort

CHIUSURA

- fibbie di regolazione con sistema a strappo per il primo posizionamento
- fibbie a scatto per una più facile apertura
- chiusure a sgancio rapido sulle fibbie regolabili
- cintura addominale a strappo con la possibilità di essere ritagliata su misura

INDICAZIONI

- trattamento nella diagnosi precoce delle displasie d'anca

MISURE

Taglie

Ø Vita

S

30–40 cm

M

40–50 cm

L

50–60 cm

Codice d'ordine: IMA-KIDZ

TEK-40

LINEA PHYLOTEK®
GINOCCHIERA TRASPIRANTE
PEDIATRICA



- STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo
- SNODO/ASTE**
- nessuno
- STABILIZZATORE ROTULEO**
- in silicone ad anello
- CHIUSURA**
- nessuna
- NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP

- INDICAZIONI**
- dolore femoro-rotuleo
 - lievi tendinopatie del rotuleo
 - esiti lussazioni rotulee
 - strabismo rotuleo
 - iperlassità di rotula
 - morbo di Sinding-Larsen-Johansson
 - iniziale Osgood-Schlatter

MISURE			
Taglie	Ø Coscia	Altezza	
S	20–25 cm	18 cm	
M	24–29 cm	21 cm	
L	28–33 cm	22 cm	
Codice d'ordine: TEK-40			

TTP-100K

CINTURINO SOTTOROTULEO
PEDIATRICO



- STRUTTURA**
- esterna in poliuretano con imbottitura in morbido materiale traspirante con texture jeans
 - con pressore in silicone rivestito in lycra
- CHIUSURA**
- a strappo con sistema di sgancio rapido
- NOTE**
- tessuto esterno con disegno jeans

- INDICAZIONI**
- sindrome di Osgood Schlatter

MISURE
Taglia unica ambidestra
Codice d'ordine: TTP-100K


GNT-601K

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA PEDIATRICA
IMMOBILIZZATRICE 0° A 3 PANNELLI



- STRUTTURA**
- dotata di pannelli laterali posizionabili in base alla circonferenza dell'arto
 - imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno con texture jeans
- SNODO/ASTE**
- stecche rigide in alluminio modellabile laterale, mediale e doppie nella zona posteriore
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo
- NOTE**
- vellutino esterno con disegno jeans

- INDICAZIONI**
- esiti fratture distacchi epifisari del ginocchio
 - traumi distorsivi del ginocchio

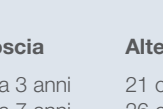MISURE			
Taglie	Ø Coscia	Altezza	
1°	da 0 a 3 anni	21 cm	
2°	da 3 a 7 anni	26 cm	
3°	da 7 a 10 anni	31 cm	
4°	da 10 a 14 anni	40 cm	
Codice d'ordine: GNT-601K			

GNO-990

LINEA POST OPERATORIA
GINOCCHIERA R.O.M. PEDIATRICA



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- SNODO/ASTE**
- monocentrico con regolazione mediante pin e coperchio di sicurezza montato su aste in alluminio
- CHIUSURA**
- mediante quattro fasce a strappo
- NOTE**
- vellutino esterno con texture jeans

- INDICAZIONI**
- traumi distorsivi medio-gravi del ginocchio
 - esiti distacchi epifisari del ginocchio
 - esito epifisiodesi
 - coadiuvante nel trattamento del morbo di Blount
 - iperlassità del ginocchio

MISURE	REGOLAZIONI		
	Ext.	Flex.	Imm.
Corta Altezza 25 cm	0°	0°	0°
Lunga Altezza 35 cm	15°	15°	15°
	30°	30°	30°
	45°	45°	45°
	60°	60°	60°
		75°	
		90°	
		105°	
Codice d'ordine: GNO-990			



- STRUTTURA**
- imbottitura in tessuto accoppiato con monospugna all'interno e vellutino grippante all'esterno
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- scafo esterno in tecnopolimero ad alta resistenza
 - suola antiscivolo con conformazione a barca
- CHIUSURA**
- frontale dell'imbottitura a strappo e 4 fasce di fissaggio

- INDICAZIONI**
- malattia di Sever
 - trattamento delle fratture tarsali, metatarsali e calcaneari
 - esiti di fratture distali di tibia e perone
 - immobilizzazione post operatoria
 - distorsioni di caviglia di III grado
 - trattamento post operatorio dell'artrorisi (piede piatto)

MISURE (ambidestro)		
Taglie	Calzata scarpa	Altezza
S	21-22	18 cm
M	23-25	20 cm
L	26-28	23,5 cm
XL	29-33	29,5 cm



Codice d'ordine: CVO-750K



- STRUTTURA**
- cuscinetti anatomici in gel di polimero
- STRUTTURA STABILIZZATRICE**
- dotata di valve corte in tecnopolimero
- CHIUSURA**
- mediante cinturini a strappo
 - cinturino regolabile sottocalcaneari

- INDICAZIONI**
- distorsioni di I, II, III grado
 - esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
 - instabilità laterale di caviglia
 - prevenzione nella recidiva di distorsione
 - coadiuvante nel recupero sportivo
 - esiti di distacchi epifisari della pinza malleolare
 - esiti stabilizzati di frattura a legno verde del pilone tibiale e del perone distale

MISURE
Taglia unica ambidestra
Altezza 17 cm

Codice d'ordine: M.STEP KIDZ



THE GAME GOES ON.

L I N E A P I E D E



PLANTARE PRT-S01

PLANTARE IN SILICONE CON COPERTURA IN TESSUTO

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con fori per aerazione
- con scarico metatarsale e calcaneare
- copertura in tessuto

INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36–37
M	38–39
L	40–41
XL	42–43
XXL	44–45

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S01



PLANTARE PRT-S02

PLANTARE IN SILICONE

TIPOLOGIA

- plantare

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- fori per aerazione
- scarico metatarsale e calcaneare

INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve metatarsalgia
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	36–37
M	38–39
L	40–41
XL	42–43
XXL	44–46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S02



SOLETTA PRT-S04

MEZZA SOLETTA METAPLANTARE IN SILICONE CON SCARICO CALCANEARE

TIPOLOGIA

- mezza soletta

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

INDICAZIONI

- lieve tallonite
- lieve dolore plantare
- fascite plantare lieve

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35–37
M	38–40
L	41–44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S04



TALLONIERA PRT-S06

TALLONIERA IN SILICONE CON ZIGRINATURA

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone zigrinato
- scarico ad oliva per la zona calcaneare

INDICAZIONI

- tallonite

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	35–37
M	38–40
L	41–44

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S06



TALLONIERA PRT-S07

TALLONIERA IN SILICONE

TIPOLOGIA

- talloniera

STRUTTURA

- silicone con bordi stabilizzanti
- scarico ad oliva per zona calcaneare

INDICAZIONI

- tallonite

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
S	30–34
M	35–39
L	40–44
XL	45–47

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S07



CUSCINETTO PRT-S09

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE ANTISCIVOLO

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone zigrinato con conformazione anatomica

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali

MISURE (DX/SX)

Taglie

Unica

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S09



CUSCINETTO PRT-S10

CUSCINETTO METATARSALE IN SILICONE

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone con distanziatore da posizionare fra le dita per evitare spostamenti all'interno della calzatura

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35–39
II	40–46

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S10



CUSCINETTO PRT-S11

CUSCINETTO IN SILICONE PER DITA A MARTELLO

TIPOLOGIA

- cuscinetto

STRUTTURA

- silicone conformato anatomicamente per le dita del piede
- dotato di separatore per evitare la frizione con la calzatura

INDICAZIONI

- dito a martello doloroso

MISURE

Taglie	Calzata scarpa
I	35–39
II	40–46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S11



SEPARATORE PRT-S12

SEPARATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con ridotto spessore

INDICAZIONI

- deviazione delle dita dei piedi
- sfregamenti interdigitali
- callosità interdigitali

MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S12



PRO_HALLUX PRT-S15 N

CORRETTORE SOFT PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tessuto elastico accoppiato contenitivo ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie

Calzata scarpa

S	36-38
M	38-42
L	42-44
XL	oltre 44

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S15 N



DIVARICATORE PRT-S13

DIVARICATORE IN SILICONE PER DITA PIEDE

TIPOLOGIA

- separatore

STRUTTURA

- silicone con conformazione anatomica per il corretto alloggiamento fra le dita

INDICAZIONI

- alluce valgo con secondo dito sovraddotto

MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 2 pezzi

Codice d'ordine: PRT-S13



HALLUX_MED PRT-S16

DIVARICATORE NOTTURNO PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- in tecnopolimero con sistema di fissaggio mediante 2 cinturini a strappo

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie

Calzata scarpa

S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S16



PROTEZIONE PRT-S20

PROTEZIONE TUBOLARE IN TESSUTO ED INTERNO IN SILICONE

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- in silicone all'interno e tessuto elastico all'esterno
- ritagliabile

INDICAZIONI

- protezione per dito in griffe doloroso
- protezione per calli dolorosi

MISURE

Taglie

S	4°, 5° dito
M	2°, 3°, 4° dito
L	1°, 2° dito

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S20



PROTEZIONE PRT-S14

PROTEZIONE IN SILICONE PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- silicone tubolare con anello di stabilizzazione

INDICAZIONI

- borsite dolorosa della metatarsofalangea dell'alluce

MISURE

Taglie

Calzata scarpa

I	35-39
II	40-46

Confezione: 1 pezzo

Codice d'ordine: PRT-S14



PDN-ALV

PROGRAMMA NIGHT & DAY PER ALLUCE VALGO



TIPOLOGIA

- correttore

STRUTTURA

- il programma Night & Day è composto dal tutore HALLUX_MED e PRO_HALLUX

FASE DAY

- Prevede l'uso di PRO_HALLUX durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone all'interno e sistema di regolazione laterale a strappo, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio

FASE NIGHT

- Questa fase prevede l'uso di HALLUX_MED durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e anallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale

INDICAZIONI

- esiti intervento di De Prado all'alluce
- alluce valgo lieve
- borsiti dolorose della metatarsofalangea dell'alluce
- iniziale alluce rigido doloroso

MISURE (DX/SX)

Taglie

Calzata scarpa

S	36-38
M	38-42
L	oltre 42

Codice d'ordine: PDN-ALV





FASCIA PRT-S21

FASCIA DI PROTEZIONE METATARSALE

TIPOLOGIA

- fascia

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto metatarsale in silicone

INDICAZIONI

- metatarsalgie centrali
- neuroma di Morton

MISURE

Taglie

Unica

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S21

NUOVO

UOMO



Non è un dispositivo medico.

MEMOSTEP PRT-S50

SOLETTA COMFORT/WORK

TIPOLOGIA

- soletta

STRUTTURA

- copertura in microfibra super assorbente
- imbottitura effetto memory nella zona metatarsale e calcaneare
- parte inferiore in feltro termoformato con carboni attivi per una sensazione di freschezza e di controllo degli odori

IDEALE PER

- scarpe da tutti i giorni
- scarpe da lavoro

MISURE - UOMO

Taglie

Calzata scarpa

S	39-40
M	41-42
L	43-44
XL	45-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine:
PRT-S50M uomo



PROTEZIONE PRT-S22

FASCIA DI PROTEZIONE CON CUSCINETTO ANATOMICO

TIPOLOGIA

- fascia

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone con scarico centrale per alluce

INDICAZIONI

- alluce valgo

MISURE

Taglie

Unica

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S22

NUOVO

DONNA



Non è un dispositivo medico.

ACTIONSTEP PRT-S51

SOLETTA SPORTIVA

TIPOLOGIA

- soletta

STRUTTURA

- copertura in microfibra assorbente con texture sportiva
- scocca semirigida iniettata nella parte del retro piede
- base realizzata da EVA di diverse densità
- inserto in EVA anti shock a livello del tallone
- parte inferiore con scanalature che garantiscono una maggiore stabilità all'interno della calzatura
- pelota metatarsale termoformata

IDEALE PER

- uso sportivo come corsa, trekking, basket, calcio, ciclismo etc.

MISURE

Taglie

Calzata scarpa

S	35-36
M	37-38
L	39-40
XL	41-42
XXL	43-44
XXXL	45-46

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S51

PROTEZIONE PRT-S23

PROTEZIONE CON SILICONE PER ALLUCE VALGO

TIPOLOGIA

- protezione

STRUTTURA

- morbido tessuto elastico
- cuscinetto interno anatomico in silicone per alluce

INDICAZIONI

- alluce valgo

MISURE

Taglie

Unica

Confezione: 1 paio

Codice d'ordine: PRT-S23

GUIDA ALLE MISURAZIONI



Circonferenza collo



Circonferenza torace




Circonferenza vita



Circonferenza polso



Circonferenza bacino

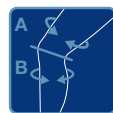

Circonferenza coscia.
A: misurare 15 cm al di sopra
del centro del ginocchio.
B: misurare 5 cm al di sotto
del centro del ginocchio



Lunghezza mano.
Misurare dal polso alla punta
del dito medio



Circonferenza seno/vita



Circonferenza coscia.
Misurare 10/15 cm al di sopra
del centro del ginocchio



Misurare dalla mezzera della linea
ideale che congiunge le estremità di
ulna e radio (individuabili alla palpa-
zione) all'inizio dell'ultima falange del
pollice



Circonferenza torace/vita



Circonferenza gamba.
Misurare 10/15 cm al di sotto
del centro del ginocchio



Considerare la distanza tra i centri di
rotazione del polso e del 5° metacarpo



Ampiezza spalle



Misura calzata scarpa



Lunghezza avambraccio.
Misurare dal gomito alla base
delle dita




vertebra
C7/T1
L5/S1 ca.
Lunghezza colonna
vertebrale.
Misurare dalla zona
sacrale alla cervicale



Circonferenza caviglia



Circonferenza avambraccio.
Misurare 5 cm al di sotto
della punta del gomito

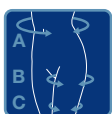


A: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale
C: circonferenza distale



Circonferenza collo del piede



Circonferenza bicipite

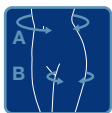

A: circonferenza vita.
B: circonferenza prossimale



Circonferenza vita

L'azienda, in ragione dei continui studi che effettua al fine di migliorare l'efficacia dei prodotti offerti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso i dati ed i dettagli tecnici relativi ai propri articoli.



FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
 facebook.com/fgpsrl
 linkedin.com/company/fgp-srl



Scarica l'App
FGPOrteSystem®



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 0 - 04/18

www.dlabcomunicazione.it